


Brugervejledning



18ch T/R-knæspole til GE 3.0T MR-systemer

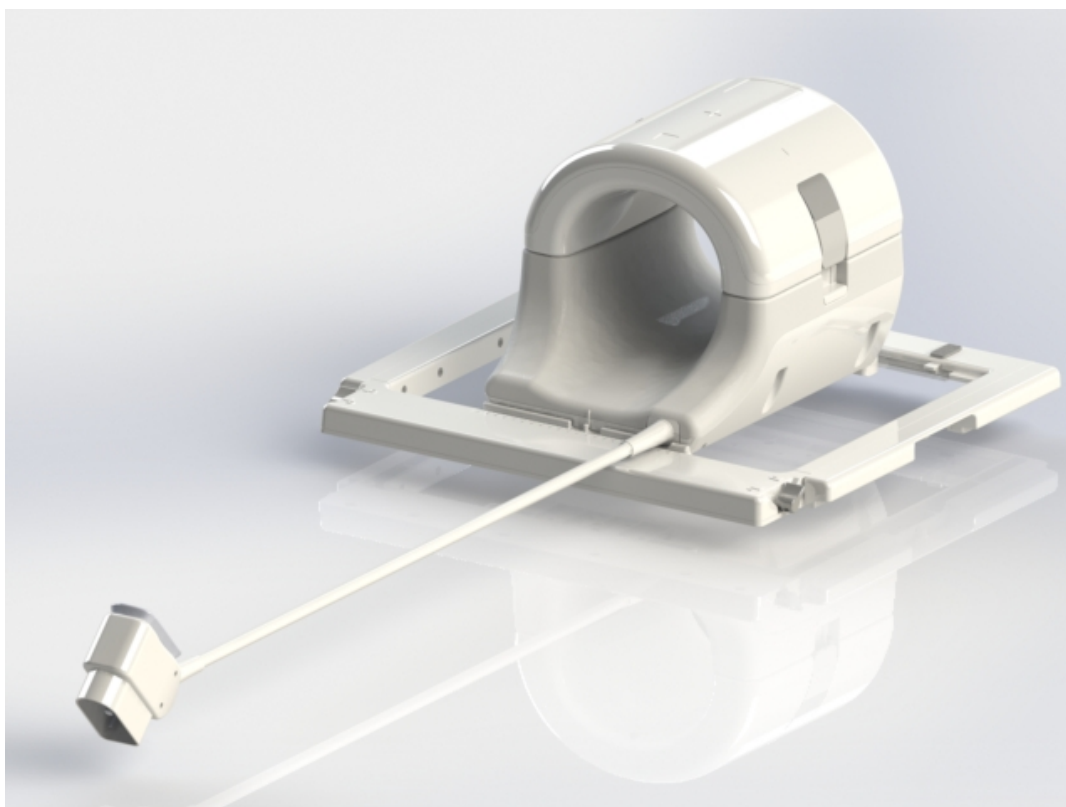

Modelnummer:

GE	QED
5561409-2	Q7000074

Garanti og ansvar

Ansvaret for vedligeholdelse og administration af produktet efter levering ligger hos den kunde, der har købt produktet. Garantien dækker ikke følgende forhold, selv under garantiperioden:

- Skade eller tab som følge af fejlagtig brug eller misbrug.
- Skader eller tab som følge af force majeure, såsom brand, jordskælv, oversvømmelser, lynnedslag osv.
- Skader eller tab som følge af manglende opfyldelse af nærmere angivne betingelser for dette udstyr, såsom utilstrækkelig strømforsyning, forkert installation eller uacceptable miljøforhold.
- Skade på grund af ændringer eller ombygning af produktet.

QED vil under ingen omstændigheder være ansvarlig for følgende:

- Skader, tab eller problemer forårsaget af flytning, ombygning eller reparation udført af personale, der ikke er udtrykkeligt godkendt af QED.
- Skade eller tab, der skyldes uagtsomhed eller tilsidesættelse af de forholdsregler og betjeningsanvisninger, der er indeholdt i denne betjeningsvejledning.

Transport- og opbevaringsforhold

HENSTILLING: DETTE UDSKYR SKAL TRANSPORTERES OG OPBEVARES PÅ FØLGENDE MÅDE:


1. Omgivende temperaturområde på -40 °C til +70 °C
2. Relativ luftfugtighed på 10 % til 100 %
3. Atmosfærisk trykområde på 50 kPa til 106 kPa

Direktiv om medicinske anordninger

Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinske anordninger, når de bærer følgende CE-konformitetsmærke:



Autoriseret repræsentant i Europa:

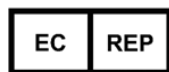

Medical Device Safety Service GmbH (MDSS)
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Tyskland

Uautoriseret ændring af produktet eller konfigurationen ugyldiggør CE-mærket. Kontakt din lokale distributør vedrørende andre lande.

Amerikansk lovgivning

Forsigtig: Ifølge amerikansk lov må denne anordning kun sælges, distribueres eller anvendes på foranledning af en læge. Anordningen må i henhold til amerikansk lov kun bruges til undersøgelsesformål til indikationer, som ikke er nævnt i indikationserklæringen.

Udstedelsesdato: Februar 2015

Indledning

Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om 18ch T/R-knæspole med sende/modtage-funktion. For at sikre, at dette produkt anvendes på forsvarlig vis, skal denne vejledning og MR-systemets brugervejledning læses grundigt, inden produktet tages i brug. Denne vejledning indeholder ikke nogen instruktioner vedrørende udstyr, som ikke hidrører fra QED. Kontakt den originale udstyrsfabrikant for oplysninger om udstyr, som ikke hidrører fra QED.

Kompatibilitet

18ch T/R-knæspolen er kompatibel med GE 3.0T MR-systemer.

Brugerprofil

Operatør – Røntgenteknikere, bioanalytikere, læger (bemærk, at alle gældende love i det pågældende land skal overholdes).

Brugeruddannelse – Der kræves ingen særlig uddannelse for at bruge denne spole (GE giver imidlertid et omfattende kursus i MR-systemer for at instruere operatører i korrekt brug af MR-systemer).

Patientoplysninger

Alder, sundhed, tilstand – Ingen særlige begrænsninger.


Vægt – 180 kg eller derunder (se brugsanvisningen for MR-systemet, og hvis den maksimalt tilladte patientvægt for systemet er lavere end for denne spole, skal den maksimale vægt for systemet gives første prioritet).

Indholdsfortegnelse

Indledning	3
Kompatibilitet	3
Brugerprofil	3
Patientoplysninger	3
Indholdsfortegnelse	4
Kapitel 1 – 18ch T/R-knæspole komponenter	5
Kapitel 2 – Sikkerhed.....	6
Symboler	6
Indikationer	7
Kontraindikationer	7
Forholdsregler	7
Forsigtighedsregler – RF-spole	7
Forsigtighedsregler – MR-system	8
Nødprocedurer.....	9
Kapitel 3 – Placering af sende/modtage-port.....	10
Placering af sende/modtage-port.....	10
Kapitel 4 – Kvalitetssikring	11
Scannerverifikation	11
SNR-test.....	11
Kvalitetssikringsværktøj ved flere spoler (MCQA-værktøj)	16
Sådan anvendes MCQA-fremviseren	19
Kapitel 5 – Spoleopsætning og brug	20
Placering af 18ch T/R-knæspole på systemlejet	20
Pudekonfiguration	24
Placering af patienten	25
Låsning af spolen.....	26
Spolens referencemærke.....	27
Kapitel 6 – Rengøring, vedligeholdelse, service og bortskaffelse	28
Rengøring af RF-spolen	28
Disinfektion	28
Vedligeholdelse.....	29
Service	29
Bortskaffelse	29

Kapitel 1 – 18ch T/R-knæspole komponenter

18ch T/R-knæspolen sendes med de dele, som er vist nedenfor. Ved modtagelsen skal det sikres, at alle dele er indeholdt i forsendelsen.

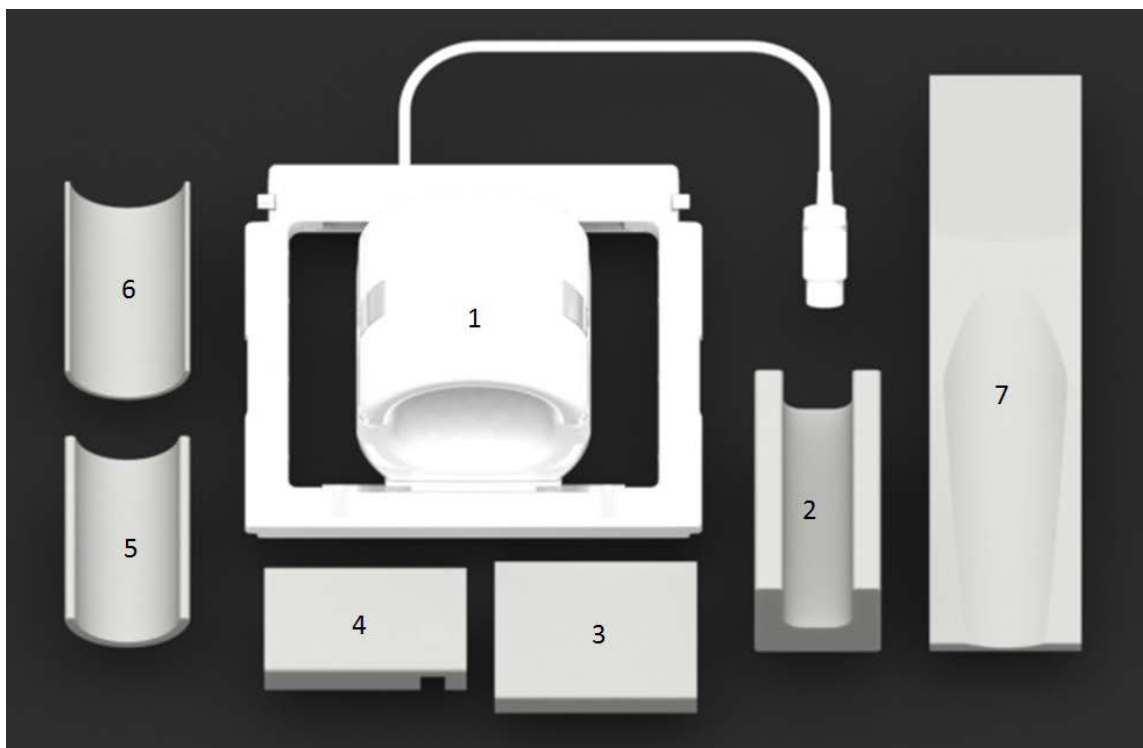

Del nr.	Beskrivelse	Mængde	GE del nr.	QED del nr.
1	18ch T/R-knæspole med sende/modtagefunktion	1	5561409-2	Q7000074
2	18ch T/R-knæspole med sende/modtagefunktion - fodpude	1	5561409-7	3003887
3	18ch T/R-knæspole med sende/modtagefunktion - Lårpude	1	5561409-10	3003863
4	18ch T/R-knæspole med sende/modtagefunktion - Lægpude	1	5561409-11	3003896
5	18ch T/R-knæspole med sende/modtagefunktion - Bundpude, 1,27 cm	1	5561409-8	3003885
6	18ch T/R-knæspole med sende/modtagefunktion - Bundpude, 64 cm	1	5561409-9	3003884
7	18ch T/R-knæspole med sende/modtagefunktion - Pude, knæ uden billeddannelse	1	5561409-6	3003888


Samlet produktvægt: 6,8 kg

Kapitel 2 – Sikkerhed

Dette afsnit beskriver de almene forholdsregler og sikkerhedsoplysninger, der skal følges, når spolen er i brug.

Når du bruger MR-systemet, skal du også tage hensyn til de forholdsregler, der er beskrevet i brugervejledningen for MR-systemet.

Symboler

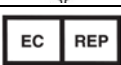	Forsigtig
	Se brugsanvisningen
	Separat samling for elektrisk og elektronisk udstyr
	Klasse II-udstyr
	Type BF anvendt del
	Fabrikant
	Fremstillingsdato med dato i formatet åååå-mm
	Send/modtag
	Autoriseret repræsentant i EU
	Katalognummer
	Serienummer
	Intertek ETL Listed (Canada og USA)
	Temperaturbegrænsning
	Fugtighedsbegrænsning
	Begrænsning i atmosfærisk tryk
	Forbrændingsfare

Indikationer

18ch T/R-knæspole med sende/modtage-funktion er beregnet til brug med GE 3.0T MR-systemer med henblik på at producere diagnostiske billeder af knæet, der kan fortolkes af en specialuddannet læge.

Kontraindikationer



Scanning af patienter, der har metalliske implantater eller elektrisk, magnetisk eller mekanisk aktiverede implantater (f.eks. pacemakere) er kontraindiceret. Scanning af patienter med MR-betingede implantater er tilladt, såfremt brugeren overholder implantationsbetingelserne.



Scanning af patienter med intrakranielle aneurismeclips er kontraindiceret, medmindre lægen er sikker på, at clip'en ikke er magnetisk aktiv.



Scanning af nyfødte, spædbørn og børn er kontraindiceret for 18ch T/R-knæspolen.

Forholdsregler



Patienter, som har større risiko for hjertestop end normalt



Patienter med øget sandsynlighed for anfald eller klaustrofobi



Patienter, der er bevidstløse, kraftigt bedøvede eller i en forvirret mental tilstand



Patienter med manglende evne til at opretholde pålidelig kommunikation (f.eks. spædbørn eller småbørn)



Patienter, som har mistet følelsen i en kropsdel



Patienter, som er eller muligvis er gravide



Patienter, der har svært ved at regulere deres kropstemperatur, eller som er særligt følsomme over for stigninger i kropstemperatur (f.eks. patienter med feber, hjertesvigt eller nedsat svedfunktion)

Forsigtighedsregler – RF-spole




Læg ikke frakoblede enheder (RF-spoler, kabler osv.) i gantry under scanningen.




Tilslut kun de nærmere angivne RF-spoler til den dertil egnede tilslutningsport.

- ⚠ Fjern alle metalgenstande, herunder tøj med metaltråde eller metaldele, ure og mønter, og alle materialer, der kan indeholde metalpulver, såsom kosmetik, tatoveringer, omslag, plastre og tape, før scanningen foretages.
- ⚠ Brug ikke en defekt RF-spole, især hvis yderdækningen er beskadiget, eller hvis metaldele stikker ud.
- ⚠ Forsøg ikke at ændre eller justere på spolen.
- ⚠ Du må ikke krydse eller lave løkker af spolekabler.
- ⚠ Sørg for, at patienten ikke kommer i kontakt med spolekablerne.
- ⚠ Sørg for, at spolen ikke kommer i kontakt med væsker, såsom vand eller medicin.
- ⚠ Hvis en spole viser sig at være defekt, skal du straks holde op med at bruge den og kontakte din GE-repræsentant.
- ⚠ Benyt kun det tilbehør, som er beskrevet i denne vejledning, sammen med spolen.

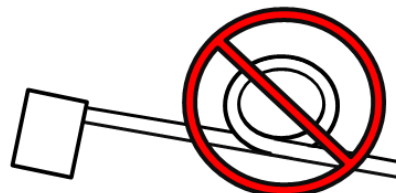

Forsigtighedsregler – MR-system

- ⚠ Lad ikke patienten danne en løkke med nogen dele af sin krop. Brug puder til at sikre, at patientens hænder og ben ikke berører spolen, MR-systemet, patientlejet eller en anden kropsdel, der kan danne en løkke.

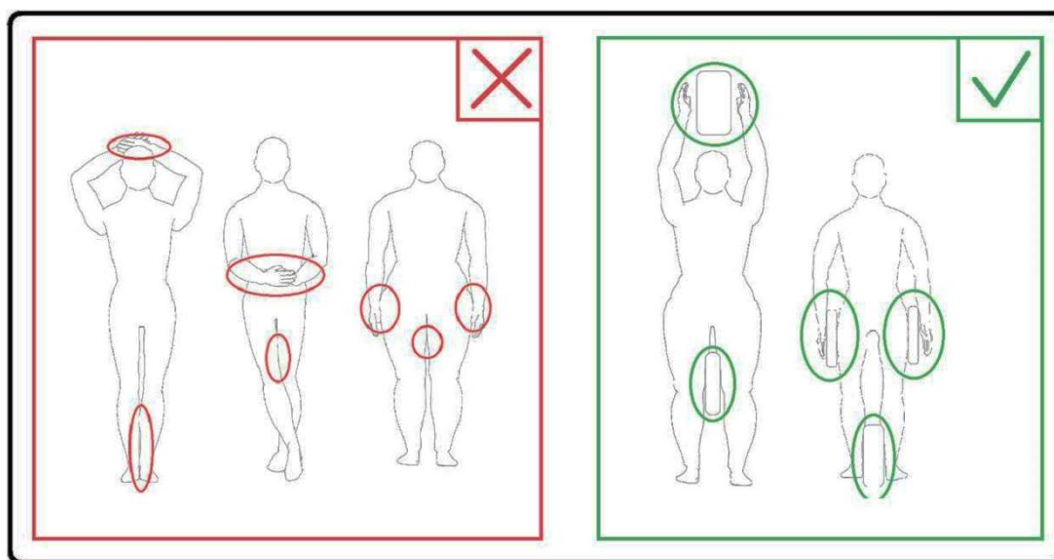

-  Lad ikke patienten eller RF-spolen berøre nogen dele af MR-systemet. Brug om nødvendigt puder til at adskille patienten fra røret.
-  Stop scanningen med det samme, hvis patienten klager over varmek fornemmelser eller prikkende, sviende eller lignende fornemmelser. Få fat i en læge, inden du fortsætter med scanningen.
-  Undlad at scanne patienter med ferromagnetiske metalimplantater.
-  Lad ikke personer med pacemakere eller andet indopereret elektronisk udstyr komme ind i magnetfeltet. Rådspørg fabrikanten af MR-systemet om information om sikker afstand.
-  Brug af medicinske produkter i transdermale plastre kan forårsage forbrændinger i den underliggende hud.
-  Patienter, der arbejder i miljøer, hvor der er risiko for at få indlejrede metalfragmenter, skal screenes omhyggeligt, før de gennemgår en MR-undersøgelse.

Nødprocedurer

Hvis der opstår en nødsituation under scanningen, skal scanningen stoppes med det samme, og patienten skal fjernes fra lokalet og modtage lægehjælp, hvis det er nødvendigt.

Kapitel 3 – Placering af sende/modtage-port

Placering af sende/modtage-port

18ch T/R-knæspolen er en spole med sende/modtage-funktion. For at kunne bruge spolen skal systemets interfacestik være tilsluttet den rigtige tilslutningsport, der både understøtter sende- og modtagefunktioner. Følgende tabel viser de GE 3T MR-systemer, som er kompatible med spolen og den respektive tilslutningsport, som skal bruges med denne spole.

Understøttet 3T MR-system	Sende/modtage-port
SIGNA Pioneer	P2

Kapitel 4 – Kvalitetssikring

Scannerverifikation

Udfør signal-til-støj-kontrol på systemniveau. Der henvises til Service Methods CD (cd med servicemetoder), System Level Procedures (systemprocedurer), Functional Checks (funktionskontrol); Signal to Noise Check (signal-til-støj-kontrol).

SNR-test

Nødvendige værktøjer/tilbehør


Beskrivelse	GE del nr.	QED del nr.	Mængde
Large Cylindrical Unified Phantom (stort cylindrisk enhedsfantom), SiOil	5342679-2	Ikke relevant	1
18ch T/R-knæspole med sende/modtage-funktion - bundpude, 1,27 cm	5561409-8	3003885	1

Spole- og fantomopsætning og procedure


1. Noter serienummeret på de(n) spole(r), der anvendes, samt software build version (testrecord eller getver).
2. Fjern eventuelle andre overfladespoler (hvis de findes) fra patientlejet.
3. Transporter knæspolen til patientlejet. Hvis spolen transporteres ved håndkraft, skal spolen bæres med begge hænder i håndtaget på rammen.




4. Anbring spolen på patientlejet. Bemærk, at retningspilen, som er vist på billedet nedenfor, skal pege **mod** røret.

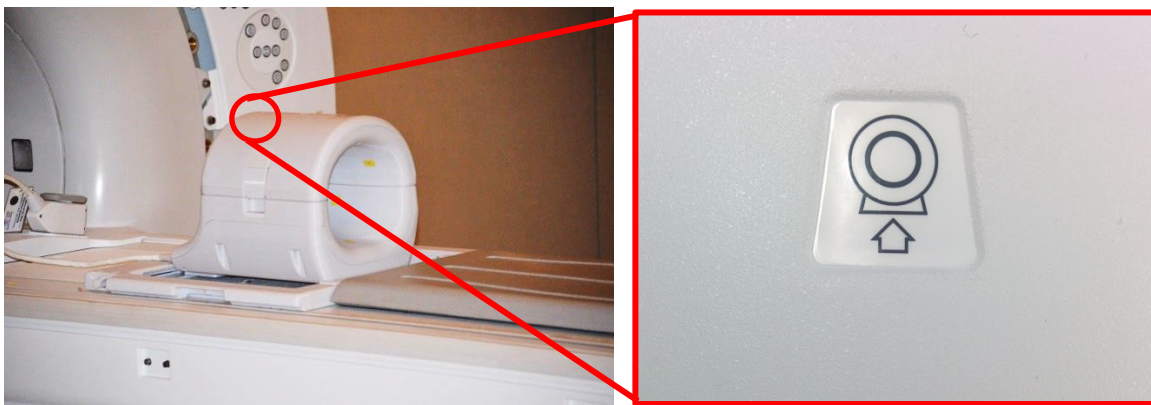


5. Slut spolestikket til den relevante sendeport på systemet. (Se kapitel 3 – Placering af sende/modtage-port). Drej enden af P-Port-stikket omkring, så den viser stillingen LÅST som vist på billedet på højre.

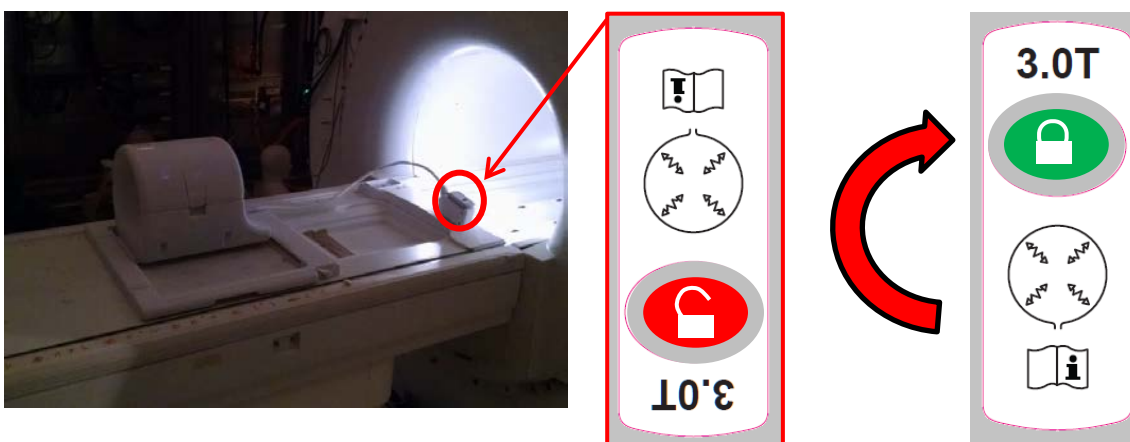

6. Sørg for, at spolens højre/venstre-position er midt i rammen. Hvis der skal foretages justering, skal knappen på spolerammen drejes for at låse spolen og skubbe det hen til den ønskede position.

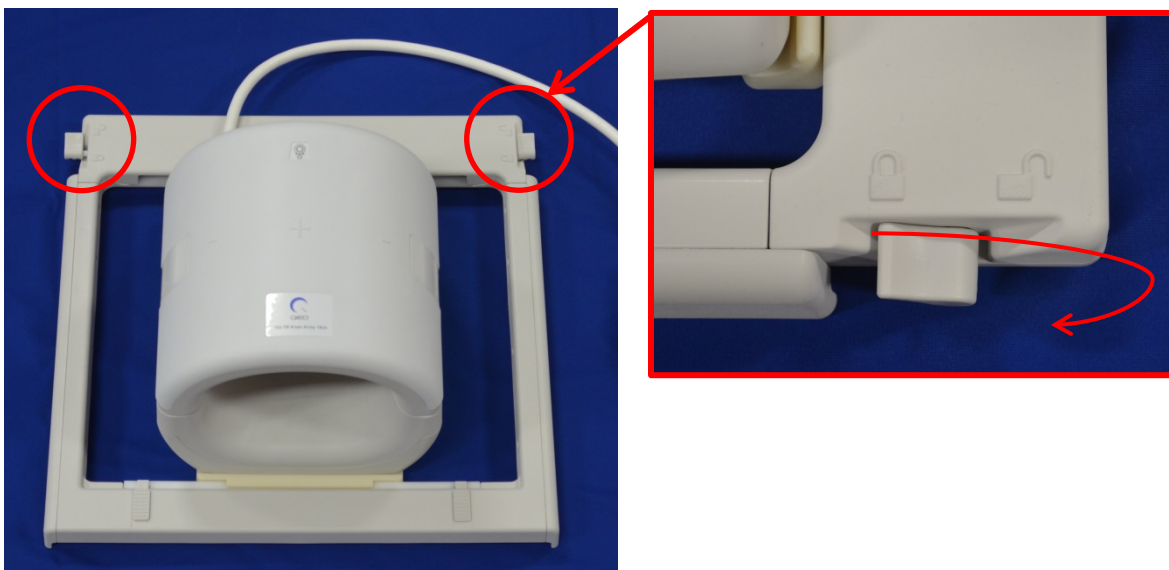

7. Når spolen har nået den ønskede position, drejes knappen over i låsepositionen igen for at holde spolen på plads.

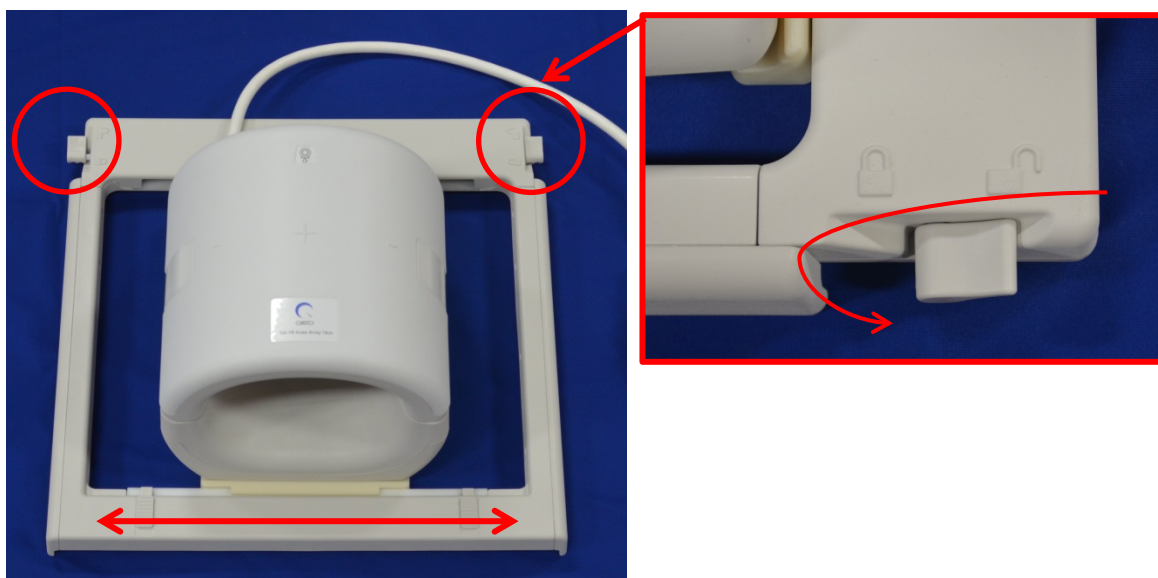



8. Fraskil den forreste spole ved at trække i de to låseflapper samtidigt, indtil de to halvdele er skilt fuldstændigt fra hinanden.



9. Anbring 18ch T/R-knæspolen - bundpude, 1,27 cm (5561409-8) og Large Cylindrical Unified Phantom (stort cylindrisk enhedsfantom), SiOil (5342679-2), på spolen som vist nedenfor.





10. Sæt den forreste spolehalvdel på igen. **Sørg for, at de to halvdele er lukket helt i, og at låseflapperne er skubbet ind.**

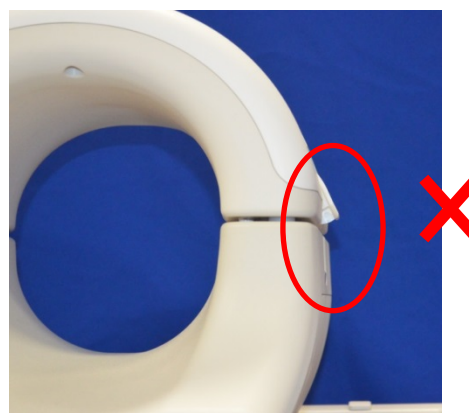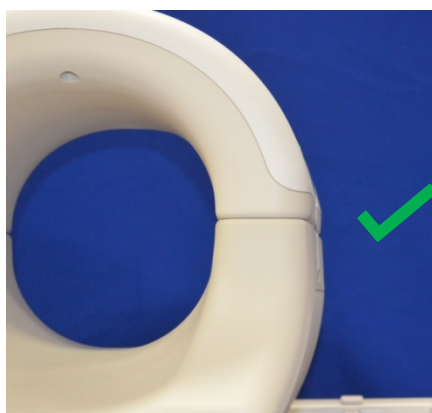

Forsigtig: Pas på ikke at sætte fingrene under låsen. Hold kun de tilgængelige flapper som vist på ovenstående billede.

11. Indstil spolen i henhold til de referencemærker, der er vist nedenfor, og før spolen ind i røret.

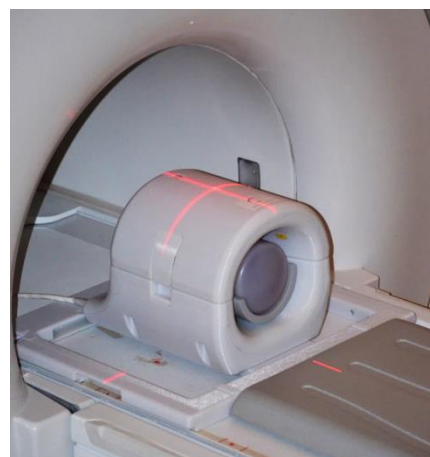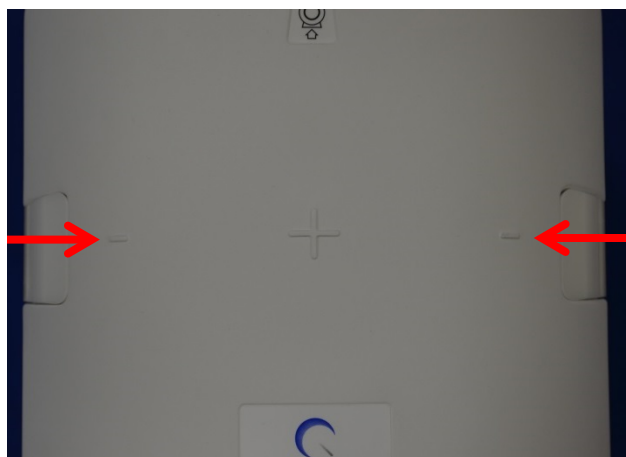


Kvalitetssikringsværktøj ved flere spoler (MCQA-værktøj)

Alle tests relateret til RF-spolen skal køres på et system, der er velkalibreret. EPIWP (hvid pixel fra installation i specifikationerne) skal udføres uden fejl.

Test-id	Parameterbeskrivelse	Forventet resultat
1	EPIWP i specifikationer	PASS (udført)


Sådan startes MCQA:

12. Fra det fælles Common Service Desktop (serviceskrivebord) (CSD) skal du gå til Service Browser (servicebrowser) og vælge [Image Quality] (billedkvalitet) "Multi-Coil QA Tool" (QA-værktøj med flere spoler) og derefter "Click here to start this tool" (klik her for at starte dette værktøj), som vist i figur 1.

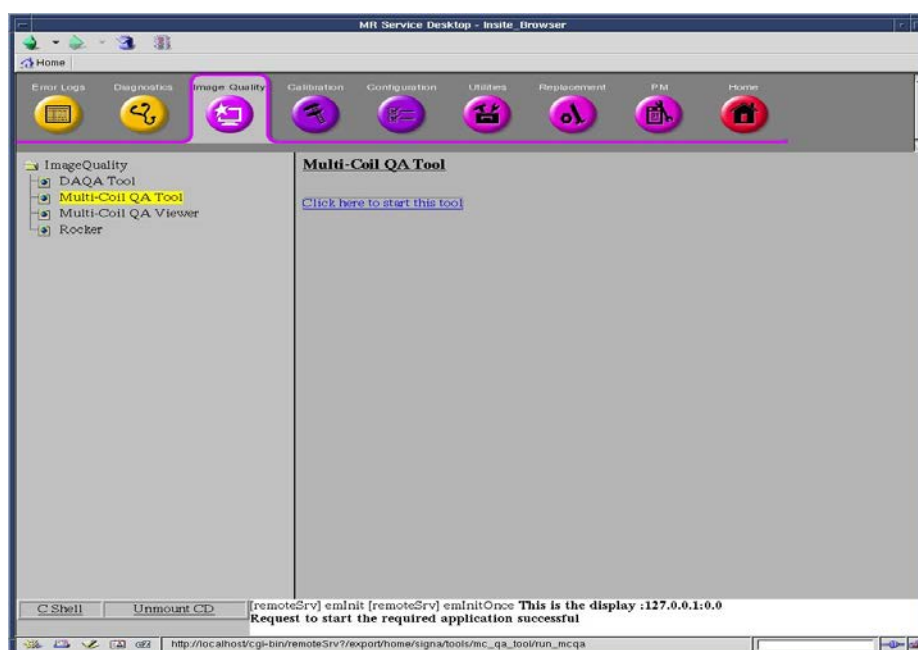

Figur 1


Bemærk: Hvis advarslen "No valid MCR-V (or MCR2/3)" (ingen gyldig MCR-V (eller MCR2/3)) (figur 2) vises, skal du vælge [Yes] (ja) og fortsætte med testen. MCR-V diagnostik skal køres, før systemet overdrages til kunden.

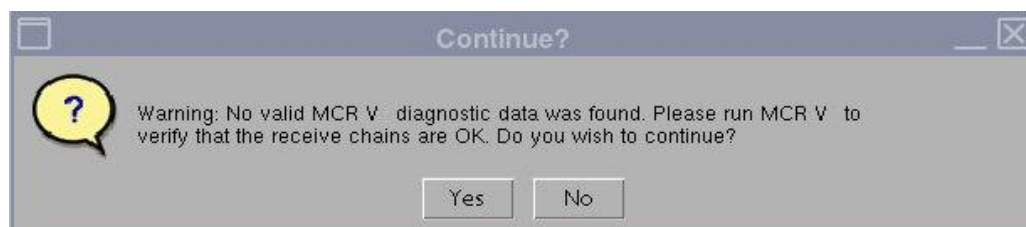

Figur 2


Det aktuelle spolefelt vil automatisk blive udfyldt (figur 3) ud fra spole-id for den spole, som er tilsluttet LPCA. Indtast serienummeret på den spole, der testes i feltet Coil Serial # (spolens serienummer).

13. Klik på **[Start]** for at begynde den automatiske test, som vist i figur 3. Afhængig af antallet af teststeder (spolens kompleksitet) kan testen tage fra 3 til 5 minutter.

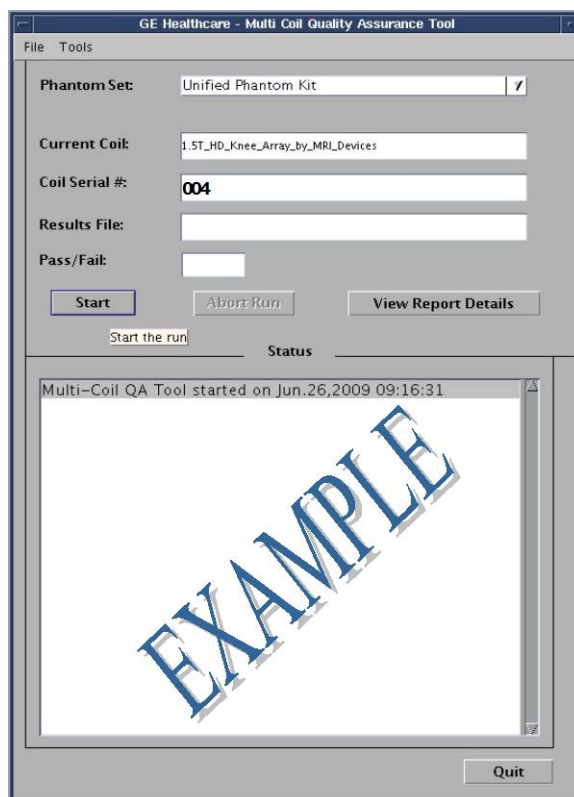


Figur 3

14. Efter opstart vises meddelelsen "Phantom placement and coil landmarking are critical for repeatable results" (fantomet's placering og spolens referencemærker er kritisk nødvendige for gentagne resultater). Hvis referencemærket er sat korrekt, og der ikke er nogen luftbobler i fantomet, skal du klikke på **[Yes]** (ja) for at fortsætte. (Figur 4).

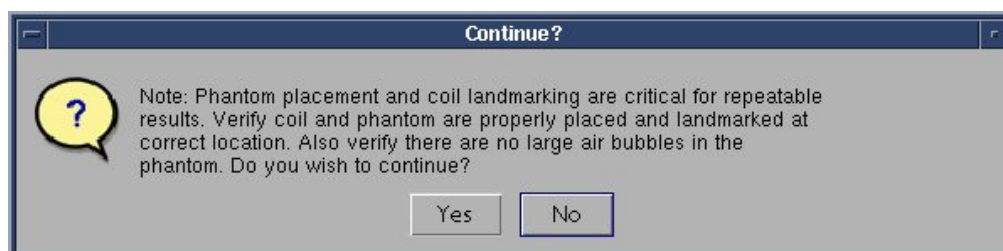

Figur 4

Bemærk: Status-vinduet for MCQA-værktøjets grafiske brugergrænseflade vil blive ved med at opdatere for at give information om, hvad værktøjet gør på et hvilket som helst tidspunkt. Der vises en tidslinje (figur 5), som viser den omtrentlige samlede testtid, forløben tid og procentvis fuldførelse.

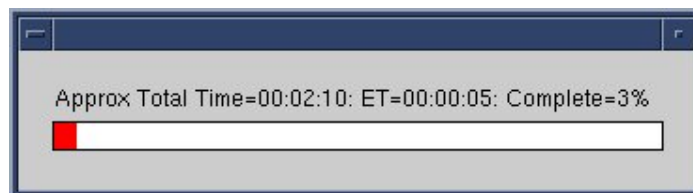


Figur 5

Når testen er gennemført, vises der testresultater på skærbilledet (figur 6). PASS/FAIL (udført/mislykket) -status viser PASS (udført), hvis alle spoleelementer fungerer korrekt. MCQA-værktøjets grafiske brugergrænseflade viser "FAIL" (mislykket) af en af følgende årsager, men ikke begrænset til:

- Fejlbehæftet spoleelement
- Forkert fantom anvendt til testen
- Forkert positionering/placering af fantomet

Yderligere oplysninger om MCQA-testen kan findes på dvd'en MR service methods (MR-servicemetoder) eller webstedet via følgende sti: Troubleshooting -> System -> Multi-Coil Quality Assurance Tool (fejlfinding > system > kvalitetssikringsværktøj ved flere spoler)

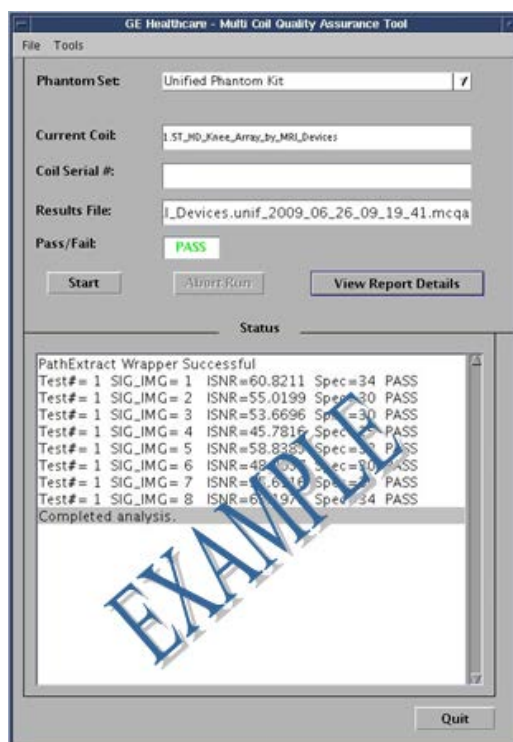

Figur 6


15. Klik på knappen **[Quit]** (afslut) for at forlade MCQA-værktøjet.

Sådan anvendes MCQA-fremviseren

Hvis resultaterne skal vises på et senere stadie, benyttes følgende trin:

1. I MCQA-værktøjets vindue skal du vælge File > Open > Results File (fil > åbn > resultatfil) og vælge den ønskede spoleresultatfil. Vælg [View Report Details] (vis rapportoplysninger) for at se resultaterne.

Bemærk: Resultatfremviseren vil åbne som vist i figur 7. Navnet på resultatfilen og resultatet Pass/Fail (udført/mislykket), der vises på værktøjets grafiske brugergrænseflade, angives også i toppen af fremviseren.

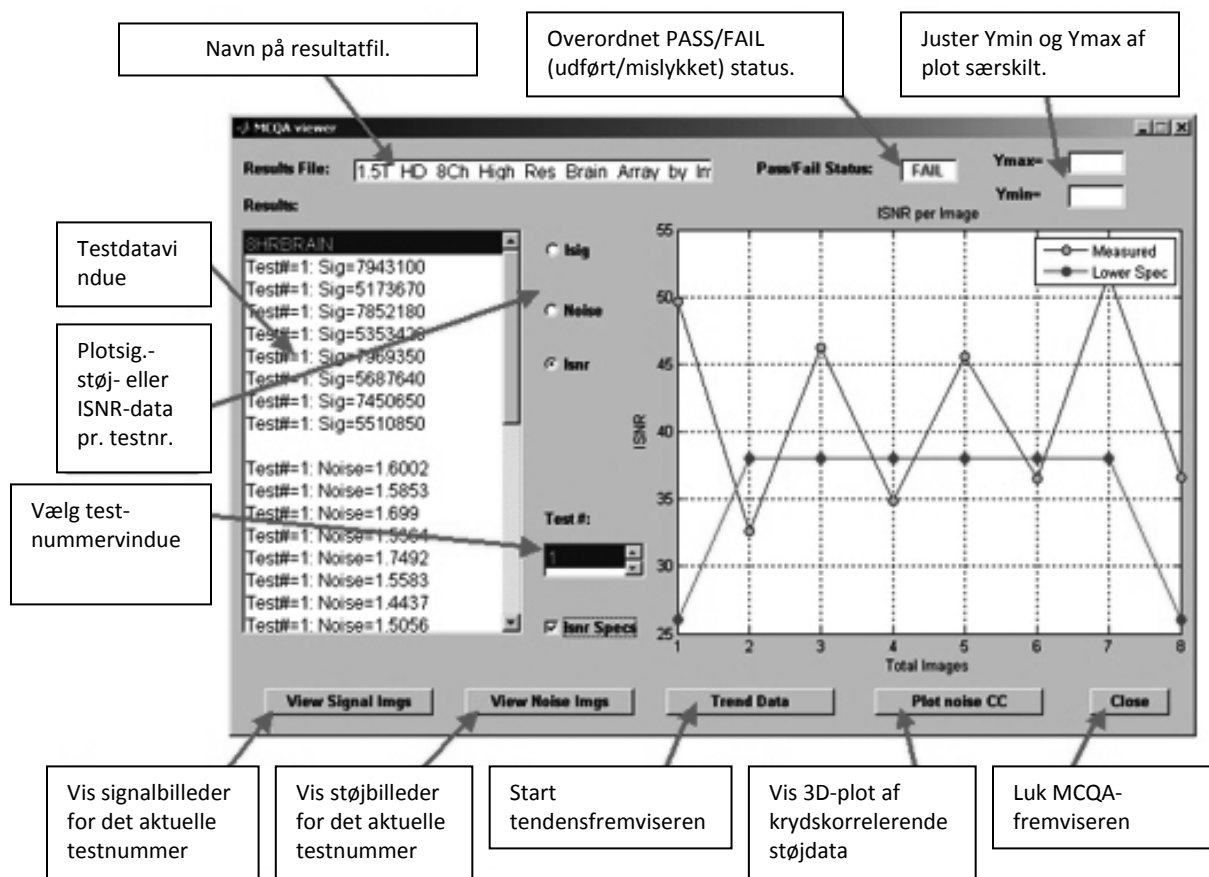

Figur 7

2. Vælg ISNR-indstillingen og afkrydsningsfeltet ISNR Specs (ISNR-specifikationer) midt i resultatfremviseren for at se resultaterne.

Test-id	Parameterbeskrivelse	Forventet resultat
1	EPIWP i specifikationer	PASS (udført)


Kapitel 5 – Spoleopsætning og brug

Placering af 18ch T/R-knæspole på systemlejet


1. Fjern eventuelle andre overfladespoler (hvis de findes) fra patientlejet.
2. Transporter knæspolen til patientlejet. Hvis spolen transporteres ved håndkraft, skal spolen bæres med begge hænder i håndtaget på rammen.




3. Anbring spolen på patientlejet. Bemærk, at retningspilen, som er vist på billedet nedenfor, skal pege **mod** røret.

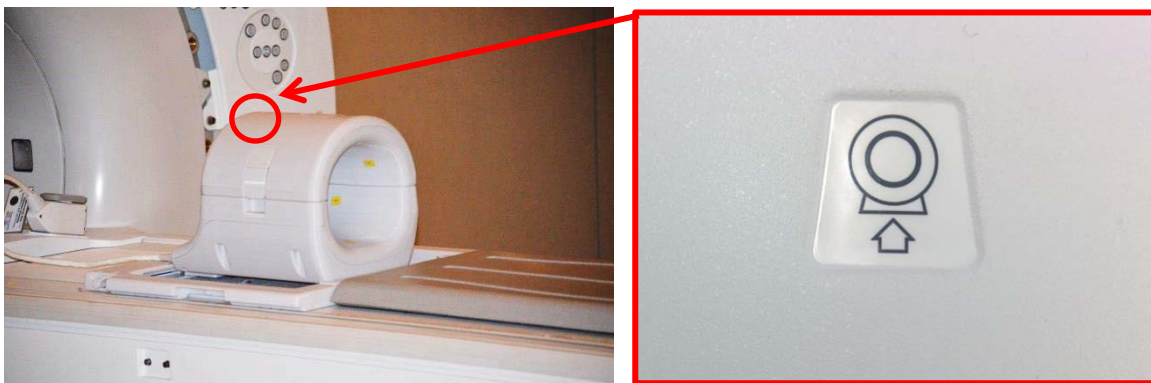

4. Tilslut spolestikket til den relevante sendeport på systemet. (se kapitel 3 – Placering af sende/modtage-port). Drej enden af P-Port-stikket omkring, så den viser stillingen LÅST som vist på billedet på højre.

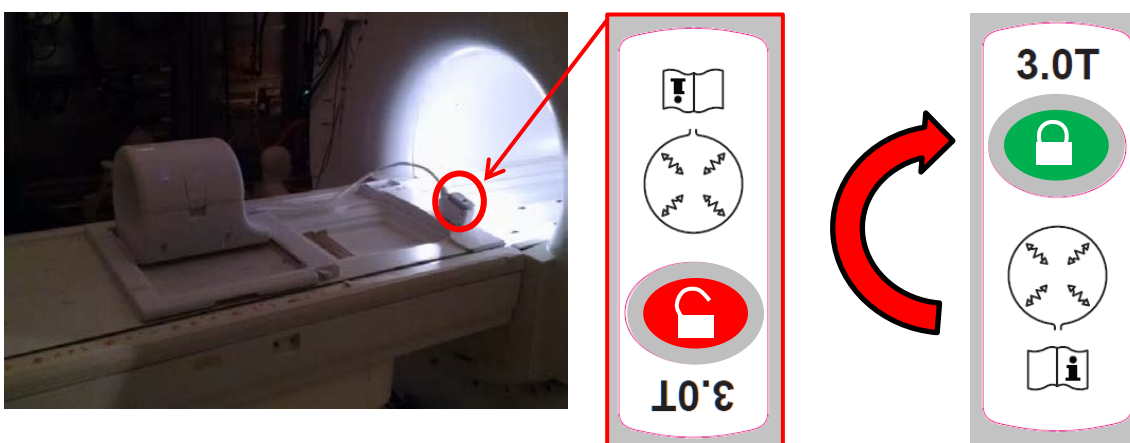

5. Juster spolen i højre/venstre-retningen for at bedre patientens komfort. Hvis der skal foretages justering, skal knappen på spolerammen drejes for at låse spolen og skubbe det hen til den ønskede position.

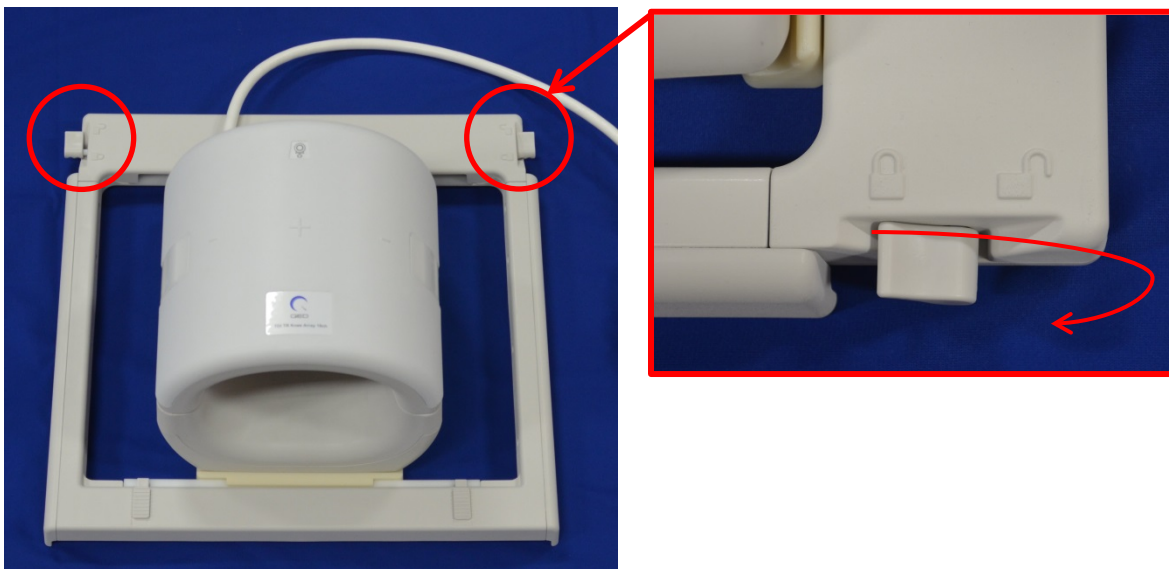


BEMÆRK: Hvis der ønskes en spoleposition ud over 8 cm fra isocenter i den tværgående retning:

- a) Skub spolen så langt som muligt op mod stoppet.
- b) Træk stoppet tilbage ved at trække tilbage i grebet.
- c) Skub spolen forbi stoppet til den ønskede position.



6. Når spolen har nået den ønskede position, drejes knappen over i låsepositionen igen for at holde spolen på plads.

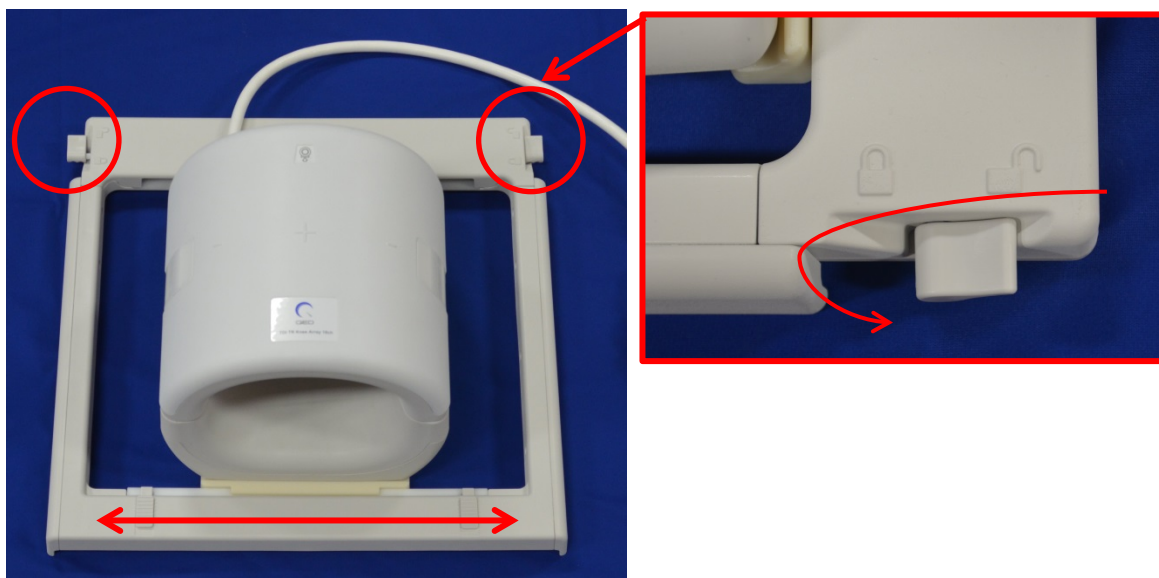


7. Fraskil den forreste spole ved at trække i de to låseflapper samtidigt, indtil de to halvdele er skilt fuldstændigt fra hinanden.



Pudekonfiguration



Der leveres forskellige puder med knæspolen med sende/modtage-funktion for at mindske bevægelsesartefakt og bidrage til patientens komfort. Nogle puder giver desuden isolering mellem patientens krop og kablet for at undgå potentielle farer i forbindelse med berøring af kablet og/eller elektriske forbrændinger.

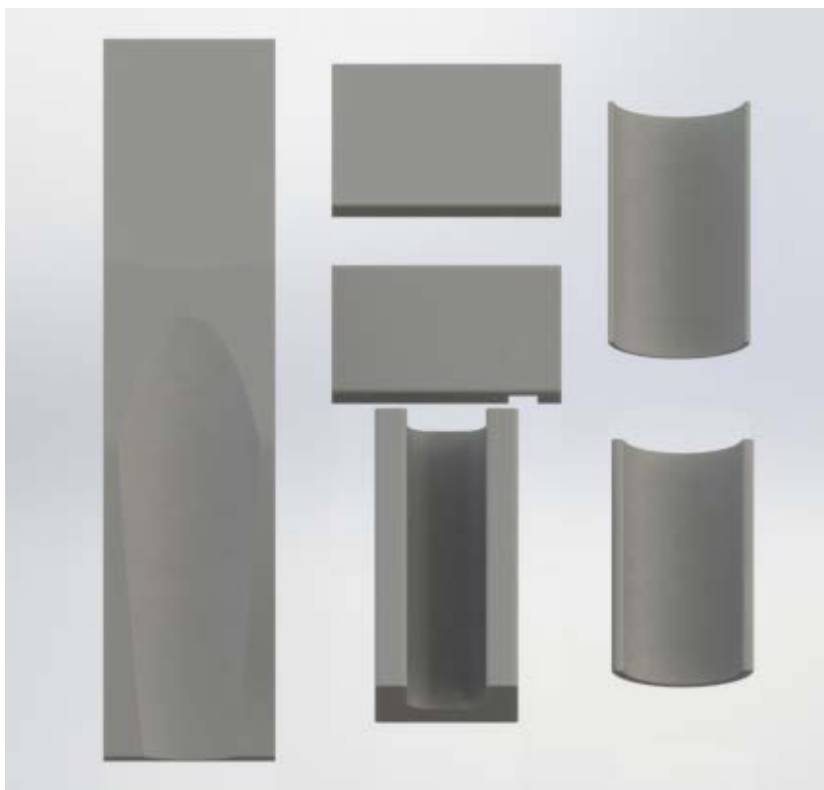

Placering af patienten

18ch T/R-knæspolen er designet til enten at vise venstre eller højre knæ, mens patienten ligger på ryggen, idet fødderne går først ind i magneten.

8. Læg spole og puder på plads, inden patienten placeres. 18ch T/R-knæspolen leveres med et udvalg af puder for at fremme patientens komfort. Nedenfor er et eksempel af det anbefalede layout:

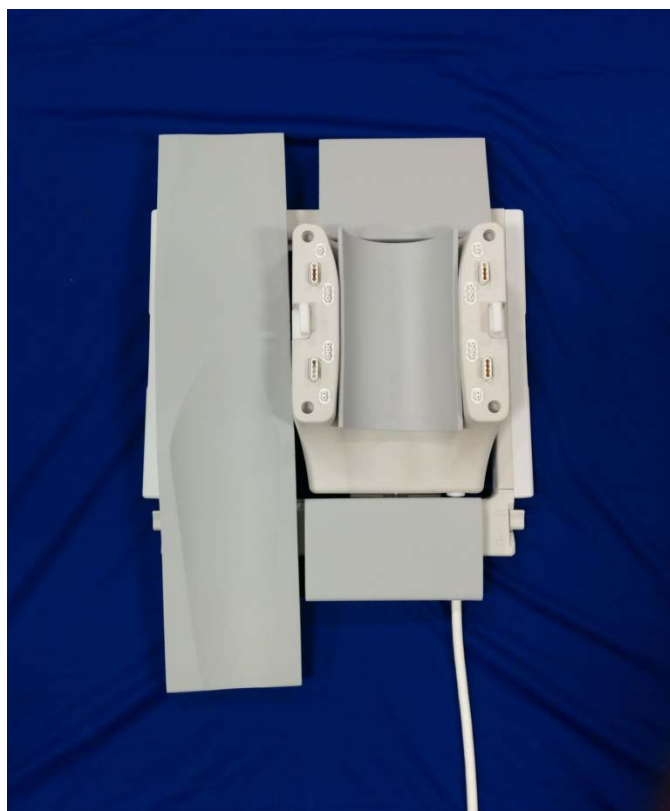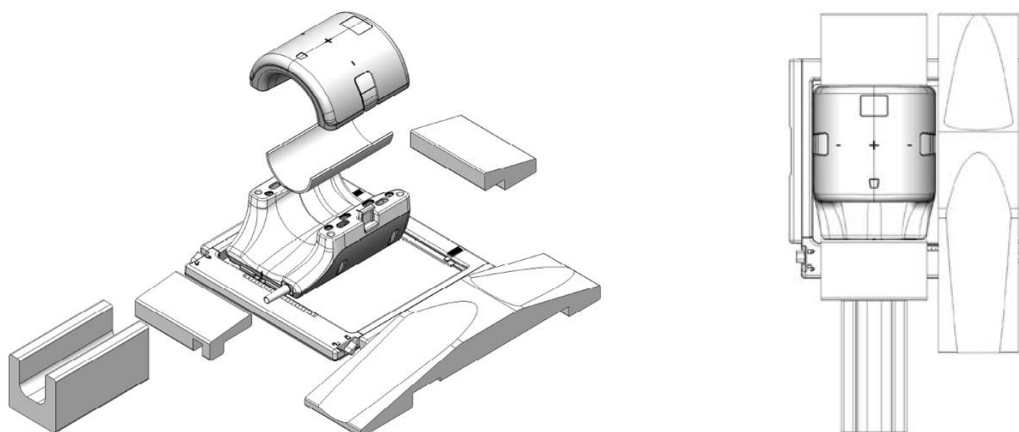


9. Anbring patientens knæ i den bagerste del af spolen. Der skal benyttes hensigtsmæssige puder til at immobilisere patientens knæ korrekt og varetage patientens komfort.





Låsning af spolen

10. Luk spolen og sørg for, at patienten, kitlen eller sengetøjet ikke kommer i klemme mellem spolens to halvdele. Det kan give anledning til dårlig billedkvalitet og muligvis beskadige spolen.

De to spolehalvdele er udformet således, at spolen kun kan lukkes, når de vender i den rigtige retning.

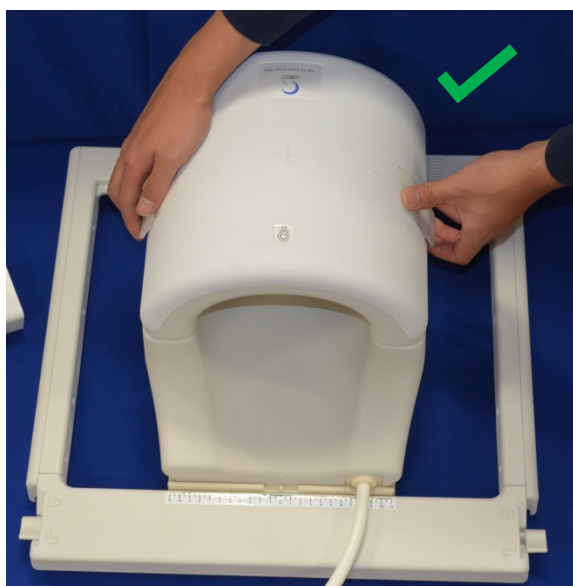



11. Når den forreste halvdel er helt lukket, skal låsens flapper skubbes ned på begge sider mod spoleoverfladen, så de mekaniske låse låser rigtigt. Hvis låsene ikke låser rigtigt, kan spolen løsgøres under scanningen og medføre et fuldstændigt tab af forbindelse eller intermitterende forbindelse mellem spolens halvdele, hvilket vil resultere i dårlig billedkvalitet eller skade på spolen.

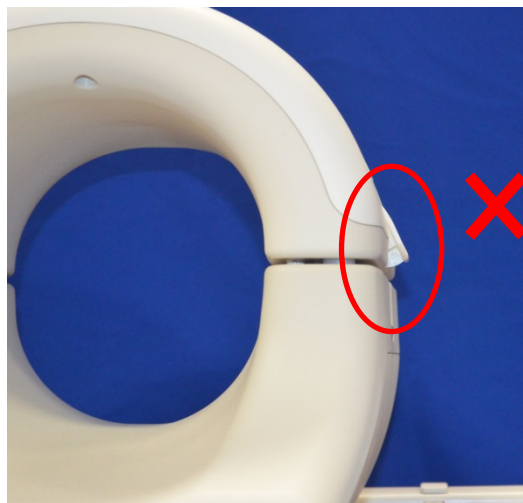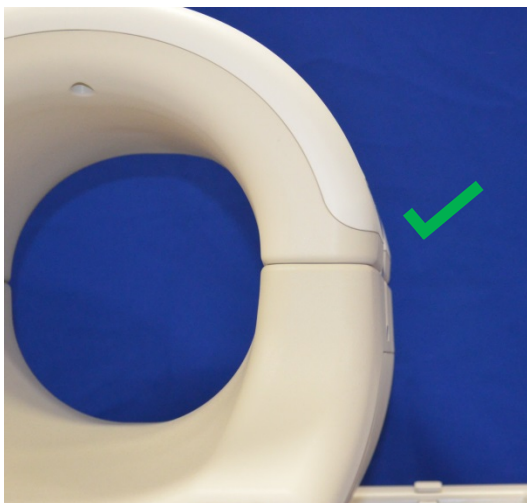

Forsigtig: Pas på ikke at sætte fingrene under låsen. Hold kun de tilgængelige flapper som vist på ovenstående billede.

Spolens referencemærke

12. Før patienten ind i magneten og juster spolens placering ved hjælp referencemærkerne oven på 18ch T/R-knæspolen.

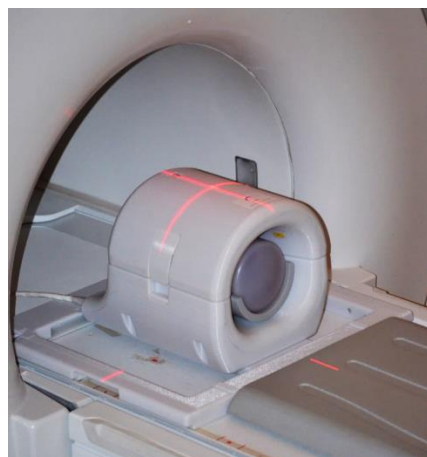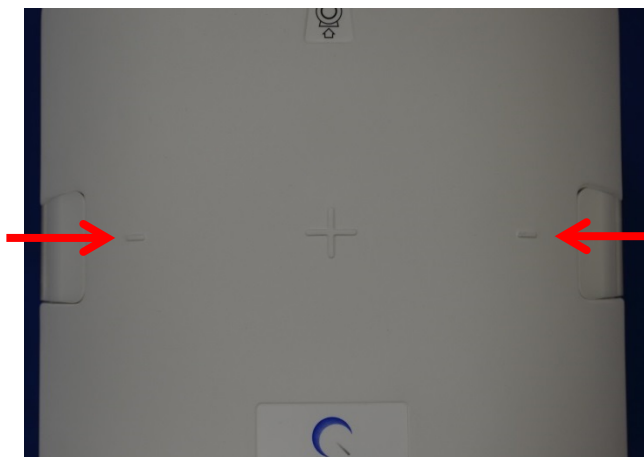

Kapitel 6 – Rengøring, vedligeholdelse, service og bortskaffelse

Rengøring af RF-spolen



Forsigtig: Hæld ikke rengøringsmiddel direkte ud over spolen eller tilbehøret.



Forsigtig: Spolen og tilbehøret må ikke steriliseres.

RF-spolen og patientens komfortpuder skal rengøres efter hver brug ved hjælp af følgende procedure:

1. Afbryd RF-spolens forbindelse til MR-scanneren, inden spolen rengøres.
2. Aftør eventuelt snavs på spolens overflade med en tør klud. Hvis snavs er svært at få af, skal rengøring foretages i henhold til de procedurer, som er beskrevet nedenfor.
3. Aftør med en klud, der er fugtet i en opløsning med 10 % blegemiddel og 90 % postevand eller 70 % ethanol og 30 % postevand.
4. Hvis spolen skal returneres til GE Healthcare til service, skal den aftørres med en 10 % blegemiddelopløsning (som beskrevet ovenfor) for at mindske risikoen for eksponering for potentielle smitstoffer.
5. Bortskaf eventuelle materialer for at rense spolen og puderne i henhold til alle myndighedsforskrifter.

Desinfektion

Hvis det er nødvendigt at desinficere RF-spolen og patientens komfortpuder, skal den rengøres som beskrevet ovenfor efterfulgt af følgende procedure:

Trin forud for desinfektion:

1. Fugt alle overflader med CaviCide (med sprayapplikator eller vådservietter til visse overflader, såsom dem der er tæt på elektriske kontakter). Sørg for, at alle overflader er synligt våde og forbliver våde i mindst 30 sekunder.
2. Brug en blød nylonbørste og/eller supplerende rengøringsmiddel/desinficerende vådservietter til at løsne snavs eller mikrobiel belastning, der er hærdet eller svært at fjerne. Kom yderligere rengøringsmiddel/desinfektionsmiddel (med sprayapplikator eller vådservietter til visse overflader, såsom dem der er tæt på elektriske kontakter) på områder, der tidligere er blevet børstet eller aftørret. Sørg for, at disse tidligere børstede eller aftørrede overflader fortsat er synligt våde og forbliver våde i mindst 30 sekunder.
3. Aftør overflader med ren køkkenrulle for at fjerne snavs.

4. Kassér brugte børster, brugte vådservietter med rengøringsmiddel/desinfektionsmiddel og brugt køkkenrulle.
5. Gentag trin 1 til 4.
6. Hvis der fortsat er snavs på overfladerne, gentages trinnene før desinfektion.

Desinfektionstrin:

7. Kom CaviCide (med sprayapplikator eller vådservietter for visse overflader, såsom dem der er tæt på elektriske kontakter) direkte på områder, der tidligere er blevet rengjort, og sørg for, at alle overflader er våde og forbliver våde i mindst to (2) minutter.
8. Aftør med ren køkkenrulle for at fjerne resterende rengøringsmiddel/desinfektionsmiddel.
9. Kassér brugt rengøringsmiddel/desinficerende vådservietter og brugt køkkenrulle.

Lad spole og tilbehør tørre før brug.

Vedligeholdelse

RF-spolen har ikke behov for nogen regelmæssig planlagt vedligeholdelse.

Service

Kontakt din GE-repræsentant, hvis du har spørgsmål vedrørende service af RF-spolen.

Bortskaffelse

Kontakt din GE-repræsentant, hvis du har spørgsmål vedrørende returnering eller bortskaffelse af RF-spolen.

DENNE SIDE ER MED VILJE TOM

Fabrikant:

Quality Electrodynamics, LLC. (QED)
700 Beta Drive, Suite 100
Mayfield Village, OH 44143
USA
www.qualityelectrodynamics.com

Distributør:

GE Medical Systems, LLC

Importør for Tyrkiet:

GE Medical Systems Turkey Ltd.
Sti. Esentepe Mah. Harman Sok. No: 8
34394 Sisli – Istanbul, Tyrkiet