


Manuel d'utilisation



Antenne genou 18ch T/R pour systèmes IRM GE 3,0 T

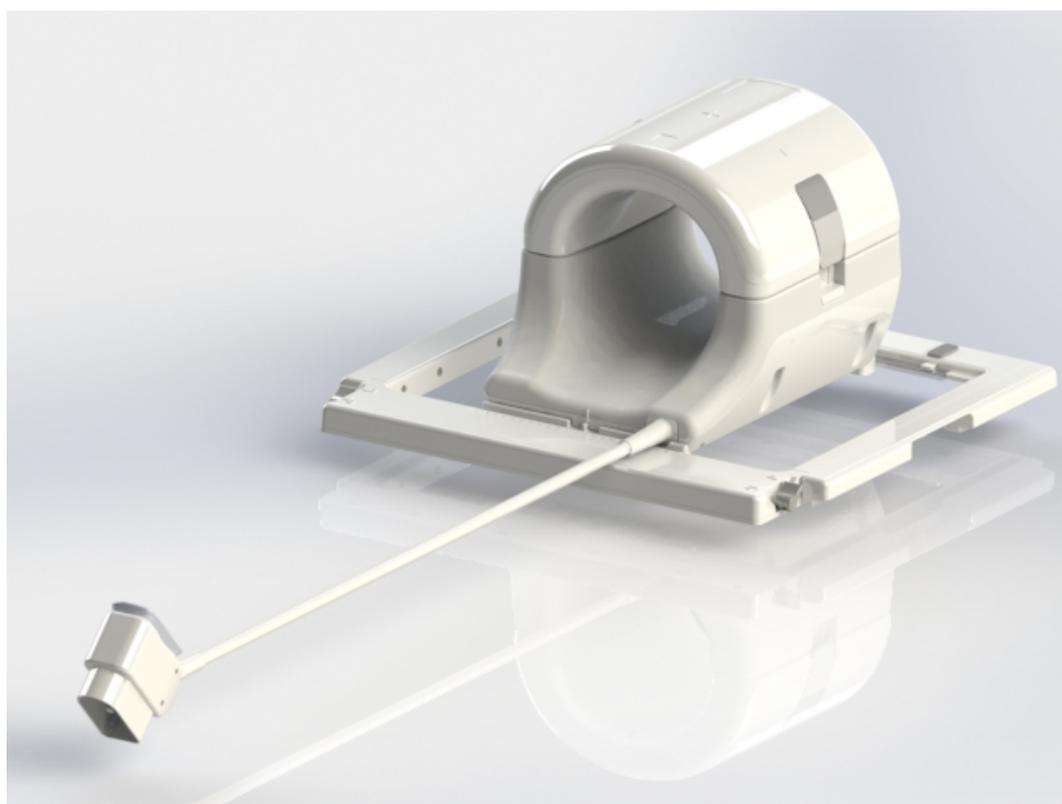

Numéro du modèle :

GE	QED
5561409-2	Q7000074

Garantie et responsabilité

La responsabilité de l'entretien et de la gestion du produit après livraison incombe à l'acheteur. La garantie ne couvre pas les éléments suivants, même pendant la période de garantie :

- Dommages ou pertes dus à une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive.
- Dommages ou pertes dus à des catastrophes naturelles telles que incendies, tremblements de terre, inondations, foudre, etc.
- Dommages ou pertes dus à l'incapacité d'assurer les conditions spécifiées pour cet équipement, comme une alimentation électrique inadaptée, une installation incorrecte ou des conditions environnementales inacceptables.
- Dommages dus à des altérations ou des modifications apportées au produit.

QED décline toute responsabilité dans les cas suivants :

- Dommages, pertes ou problèmes causés par un déplacement, une modification ou une réparation effectuée par du personnel non explicitement agréé par QED.
- Dommages ou pertes résultant de la négligence ou du non-respect des précautions et instructions d'utilisation contenues dans le présent manuel d'utilisation.

Conditions de transport et d'entreposage

NOTIFICATION : CET ÉQUIPEMENT DOIT ÊTRE TRANSPORTÉ ET ENTREPOSÉ DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :


1. Plage de température ambiante comprise entre -40° et +70° C
2. Plage d'humidité relative comprise entre 10 et 100 %
3. Plage de pression atmosphérique comprise entre 50 et 106 kPa

Directive relative aux appareils médicaux

Ce produit est conforme aux exigences de la Directive 93/42/CEE du Conseil européen concernant les appareils médicaux et porte la marque de conformité CE suivante :



Représentant agréé pour l'Europe :

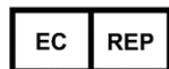

Medical Device Safety Service GmbH (MDSS)
Schiffgraben 41
30175 Hanover
Allemagne

Toute modification non autorisée du produit ou de sa configuration annule la validité du marquage CE. Pour les autres pays, veuillez contacter votre distributeur local.

Loi fédérale des États-Unis

Attention : La loi fédérale restreint la vente, la distribution et l'utilisation de cet appareil à un médecin ou sur la prescription d'un médecin. La loi fédérale limite cet appareil à un usage de recherche pour les indications qui ne figurent pas dans la déclaration des indications.

Date de publication : février 2015

Introduction

Ce manuel contient des informations détaillées concernant les consignes de sécurité, l'utilisation et l'entretien de l'antenne genou 18ch T/R. Pour une utilisation sûre et précise du produit, lisez ce manuel ainsi que le manuel d'utilisation du système IRM avant d'employer le produit. Ce manuel ne contient pas d'instructions concernant l'équipement non fourni par QED. Consultez le fabricant d'origine pour des renseignements sur l'équipement non fourni par QED.

Compatibilité

L'antenne genou 18ch T/R est compatible avec les systèmes IRM GE 3,0 T.

Profil de l'utilisateur

Opérateurs : technologues en radiologie, technologues de laboratoire médical, médecins (à noter toutefois que toutes les lois applicables dans le pays concerné doivent être respectées).

Formation de l'utilisateur : aucune formation particulière n'est requise pour utiliser cette antenne (en revanche, GE dispense un cours de formation complet sur les systèmes IRM afin de former les opérateurs à l'utilisation correcte de ces systèmes).

Informations sur le patient

Âge, état de santé, condition physique : aucune limitation spéciale.


Poids maximum : 180 kg (400 lbs) (consultez le manuel d'utilisation du système IRM et, si le poids maximal du patient autorisé pour le système est inférieur à celui de cette antenne, la priorité doit être donnée au poids maximal du système).

Table des matières

Introduction	3
Compatibilité.....	3
Profil de l'utilisateur.....	3
Informations sur le patient	3
Table des matières	4
Chapitre 1 – Composants de l'antenne genou 18ch T/R	5
Chapitre 2 – Sécurité.....	6
Symboles	6
Indications.....	7
Contre-indications.....	7
Précautions	7
Attention – Antenne RF	7
Attention – Système IRM	8
Procédures d'urgence	9
Chapitre 3 – Emplacement du port E/R	10
Emplacement du port E/R.....	10
Chapitre 4 – Assurance qualité	11
Vérification du scanner	11
Test RSB.....	11
Outil d'assurance qualité multi-antenne (OAQM)	16
Utilisation de la visionneuse OAQM	20
Chapitre 5 – Installation et utilisation de l'antenne	21
Positionnement de l'antenne genou 18ch T/R sur la table d'examen.....	21
Configuration du support.....	24
Positionnement du patient	25
Verrouillage de l'antenne.....	26
Repérage de l'antenne	27
Chapitre 6 – Nettoyage, entretien, réparation et mise au rebut.....	28
Nettoyage de l'antenne RF.....	28
Désinfection	28
Entretien	29
Réparation.....	29
Mise au rebut.....	29

Chapitre 1 – Composants de l'antenne genou 18ch T/R

L'antenne genou 18ch T/R est livrée avec les pièces indiquées ci-dessous. À réception, vérifiez que toutes les pièces sont présentes dans la livraison.

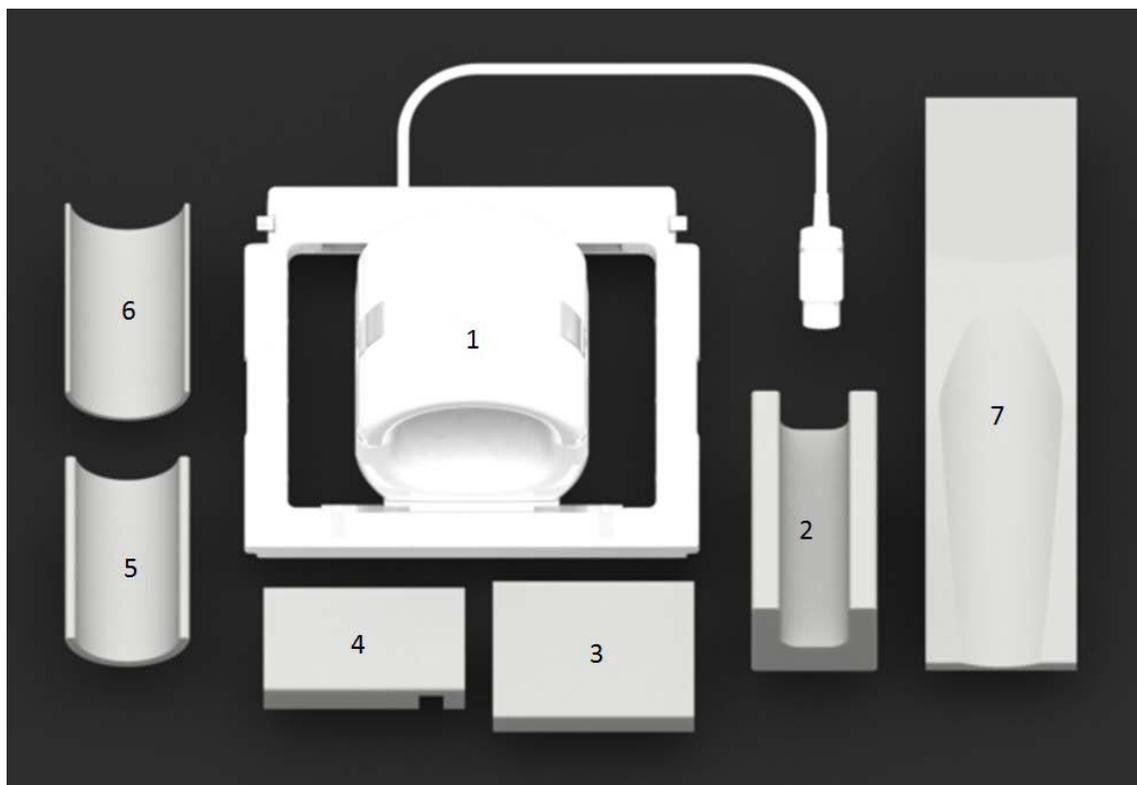

Référence	Description	Qté	Référence GE	Référence QED
1	Antenne genou 18ch T/R	1	5561409-2	Q7000074
2	Antenne genou 18ch T/R - support pied	1	5561409-7	3003887
3	Antenne genou 18ch T/R - support cuisse	1	5561409-10	3003863
4	Antenne genou 18ch T/R - support mollet	1	5561409-11	3003896
5	Antenne genou 18ch T/R - support bas, 0,5"	1	5561409-8	3003885
6	Antenne genou 18ch T/R - support bas, 0,25"	1	5561409-9	3003884
7	Antenne genou 18ch T/R - support genou non examiné	1	5561409-6	3003888


Poids total du produit : 6,8 kg (15,0 lb)

Chapitre 2 – Sécurité

Cette section indique les précautions et consignes générales de sécurité qui doivent être observées lors de l'utilisation de cette antenne.

Lorsque vous utilisez le système IRM, consultez également les précautions indiquées dans le manuel d'utilisation de ce système.

Symboles

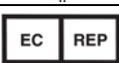	Attention
	Consulter le mode d'emploi
	Collecte sélective de l'équipement électrique et électronique
	Équipement de classe II
	Pièce appliquée de type BF
	Fabricant
	Date de fabrication au format aaaa-mm
	Émission/réception
	Représentant agréé pour l'UE
	Numéro de référence
	Numéro de série
	Certifié Intertek ETL (Canada et États-Unis)
	Limite de température
	Limite d'humidité
	Limite de pression atmosphérique
	Risque de brûlure

Indications

L'antenne genou 18ch T/R est conçue pour une utilisation avec les systèmes IRM GE 3,0 T afin de produire des images diagnostiques du genou qui peuvent être interprétées par un médecin qualifié.

Contre-indications



L'examen des patients porteurs d'implants métalliques ou activés de façon électrique, magnétique ou mécanique (stimulateurs cardiaques, par exemple) est contre-indiqué. L'examen de patients porteurs d'implants compatibles IRM sous condition est acceptable dans la mesure où l'utilisateur respecte les conditions relatives à l'implant.



L'examen de patients porteurs de clips d'anévrisme intracranien est contre-indiqué, sauf si le médecin est certain que le clip ne présente pas d'activité magnétique.



L'examen des nouveau-nés, des nourrissons et des enfants est contre-indiqué avec l'antenne genou 18ch T/R.

Précautions



Patients présentant un potentiel d'arrêt cardiaque supérieur à la normale



Patients présentant un risque accru d'épilepsie ou de claustrophobie



Patients inconscients, sous sédation lourde ou en état de confusion mentale



Patients incapables de communiquer de façon fiable (nourrissons ou jeunes enfants, par exemple)



Patients présentant une perte de sensations d'une partie du corps



Patientes enceintes ou susceptibles d'être enceintes



Patients présentant des difficultés de régulation de la température corporelle ou particulièrement sensibles à l'élévation de la température corporelle (par exemple, patients fiévreux, insuffisants cardiaques, ou présentant un trouble de la sudation)

Attention – Antenne RF



Ne placez pas de dispositifs déconnectés (antennes RF, câbles, etc.) dans le statif pendant l'examen.




Raccordez exclusivement les antennes RF désignées au port de connexion d'antenne RF.

-  Retirez tous les objets métalliques, y compris les vêtements contenant des fils ou des pièces métalliques, les montres et pièces de monnaie, ainsi que tous les matériaux contenant de la poudre de métal, tels que cosmétiques, tatouages, cataplasmes, timbres et adhésif avant l'examen.
-  N'utilisez pas une antenne RF défectueuse, en particulier lorsque l'enveloppe extérieure est endommagée ou si des parties métalliques sont exposées.
-  Ne tentez pas de changer ni de modifier l'antenne.
-  Ne croisez pas les câbles et ne les mettez pas en boucle.
-  Veillez à ce que le patient ne soit pas en contact direct avec les câbles de l'antenne.
-  Veillez à ce que l'antenne n'entre pas en contact avec des liquides, comme de l'eau ou des médicaments.
-  Lorsqu'une antenne s'avère défectueuse, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez votre représentant GE.
-  Utilisez uniquement les accessoires décrits dans ce manuel avec l'antenne.



Attention – Système IRM

-  Ne laissez pas le patient former une boucle entre des parties du corps. Utilisez les supports pour que les mains et les jambes du patient ne touchent en aucun cas l'antenne, le système IRM ou une autre partie de son corps susceptible de former une boucle.

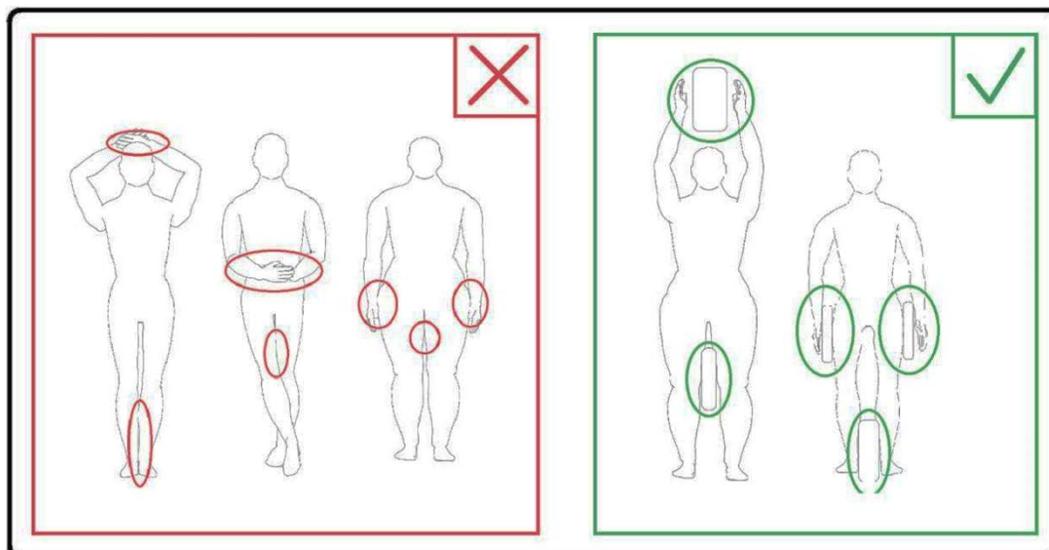

- ⚠ Ne laissez pas le patient ou l'antenne RF entrer en contact avec une partie du système IRM. Utilisez les supports pour séparer le patient du tunnel, si nécessaire.
- ⚠ Interrompez immédiatement l'examen si le patient se plaint d'une sensation de chaleur, de fourmillement, de picotement ou de sensations similaires. Contactez un médecin avant de poursuivre l'examen.
- ⚠ N'examinez pas un patient porteur d'implants ferromagnétiques.
- ⚠ Ne laissez pénétrer dans le champ magnétique aucune personne porteuse d'un stimulateur cardiaque ou d'autres dispositifs électroniques implantés. Consultez le fabricant du système IRM pour connaître la distance de sécurité.
- ⚠ L'utilisation de substances médicinales dans des timbres transdermiques peut provoquer des brûlures cutanées sous le timbre.
- ⚠ Les patients qui travaillent dans des environnements comportant un risque d'incrustation de fragments métalliques doivent être soigneusement examinés avant de subir un examen d'IRM.

Procédures d'urgence

En cas d'urgence pendant l'examen, interrompez-le immédiatement, évacuez le patient de la salle et obtenez une assistance médicale si nécessaire.

Chapitre 3 – Emplacement du port E/R

Emplacement du port E/R

L'antenne genou 18ch T/R est un émetteur/récepteur. Pour utiliser correctement l'antenne, le connecteur d'interface du système doit être raccordé au port de connexion approprié, acceptant les fonctions d'émission et de réception. Le tableau ci-après indique le ou les systèmes IRM GE 3,0 T compatibles avec l'antenne et le port de connexion correspondant à utiliser pour cette antenne.

Système IRM 3,0 T pris en charge	Port de connexion E/R désigné
SIGNA Pioneer	P2

Chapitre 4 – Assurance qualité

Vérification du scanner

Effectuez le contrôle du rapport de signal sur bruit du système. Consultez le CD Service Methods ; System Level Procedures ; Functional Checks ; Signal to Noise Check.

Test RSB

Outils/équipements nécessaires


Description	Référence GE	Référence QED	Qté
Fantôme cylindrique unifié grand format, SiOil	5342679-2	S. O.	1
Antenne genou 18ch T/R - support bas, 0,5"	5561409-8	3003885	1

Procédure et configuration de l'antenne et du fantôme


1. Enregistrez le numéro de série de la ou des antennes utilisées, ainsi que la version d'édition du logiciel (avec la commande testrecord ou getver).
2. Retirez toute autre antenne de surface (le cas échéant) de la table d'examen.
3. Transportez l'antenne genou jusqu'à la table d'examen. Si vous transportez l'antenne à la main, veillez à la saisir à deux mains par la poignée du cadre.




- Placez l'antenne sur la table d'examen. Notez que la flèche de direction du tunnel illustrée ci-dessous doit pointer **vers** le tunnel.

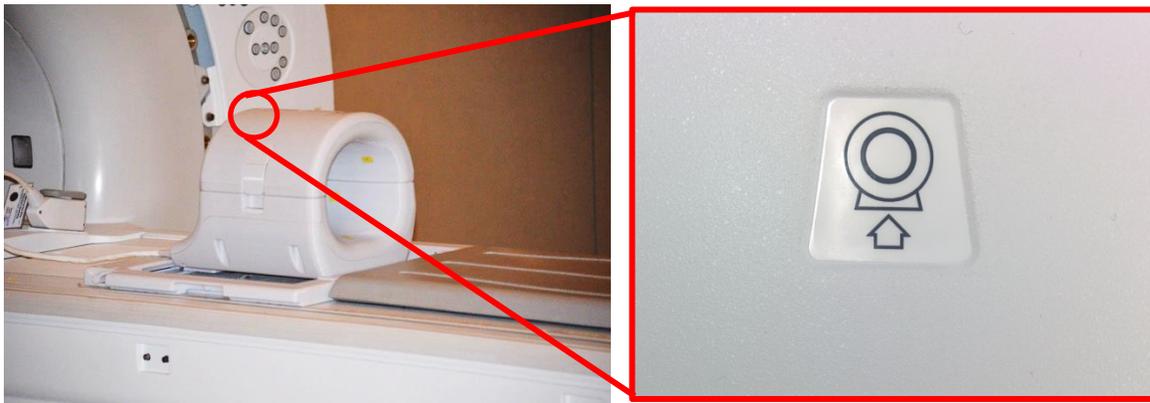


- Raccordez le connecteur de l'antenne au port d'émission approprié du système. (Consultez le chapitre 3 – Emplacement du port E/R). Tournez l'extrémité du connecteur du port P de sorte que la position VERROUILLÉ soit visible, comme illustré sur l'image de droite.

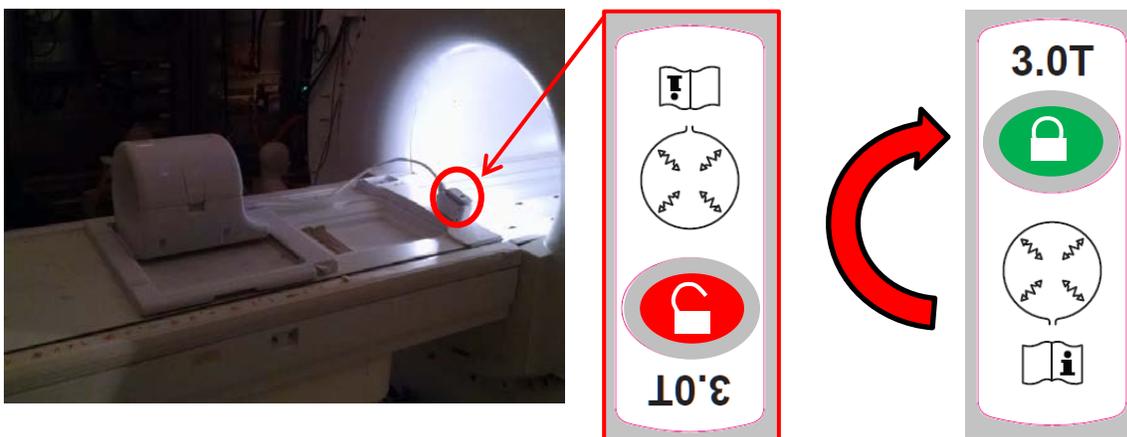

6. Vérifiez que la position gauche-droite de l'antenne se trouve au centre du cadre. Si des réglages sont nécessaires, tournez la molette sur le cadre de l'antenne pour la déverrouiller et la faire glisser dans la position voulue.

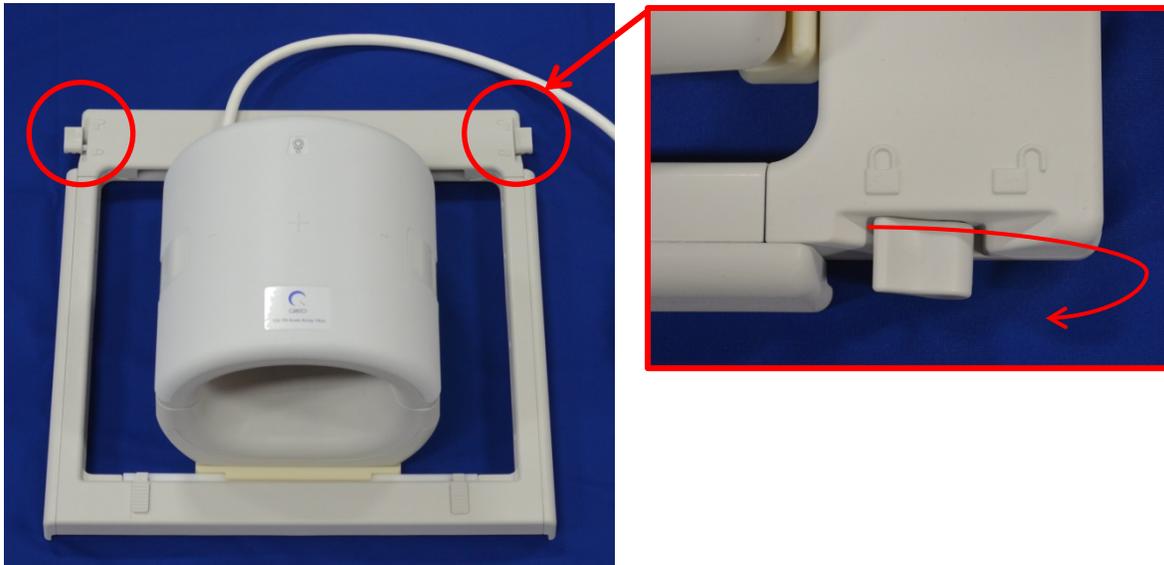


7. Une fois l'antenne positionnée correctement, tournez de nouveau la molette pour la verrouiller en place.

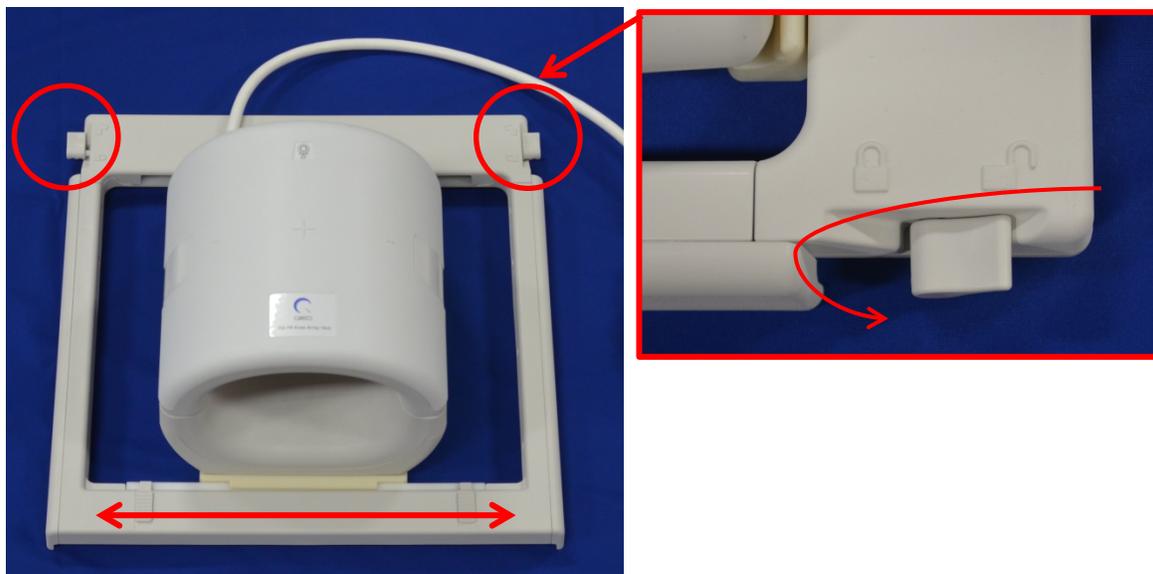


8. Séparez la moitié supérieure de l'antenne en tirant simultanément sur les deux languettes de fixation jusqu'à ce que les deux moitiés soient entièrement désengagées.



9. Placez le support bas 0,5" de l'antenne genou 18ch T/R (5561409-8) et le fantôme cylindrique unifié grand format, SiOil (5342679-2) sur l'antenne comme illustré ci-dessous.


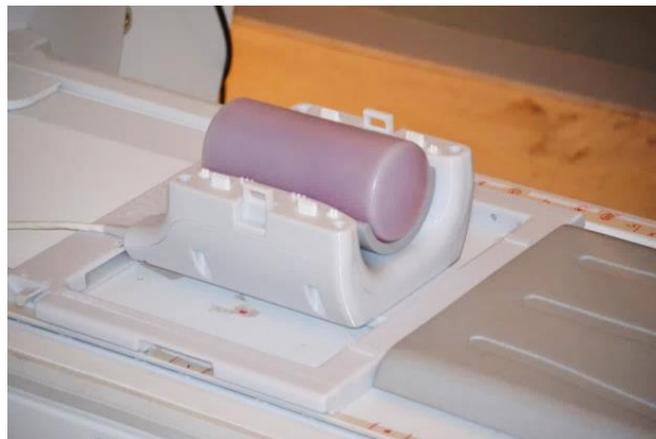


10. Remettez en place la moitié supérieure de l'antenne. **Vérifiez que les deux moitiés sont entièrement fermées et que les languettes de fixation sont rabattues vers l'intérieur.**

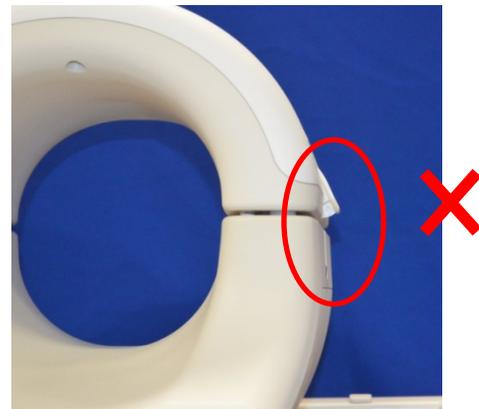

Attention : Prenez soin de ne pas placer vos doigts sous la fixation. Saisissez uniquement les languettes accessibles comme illustré ci-dessus.

11. Repérez l'antenne sur les repères indiqués ci-dessous et poussez l'antenne dans le tunnel.

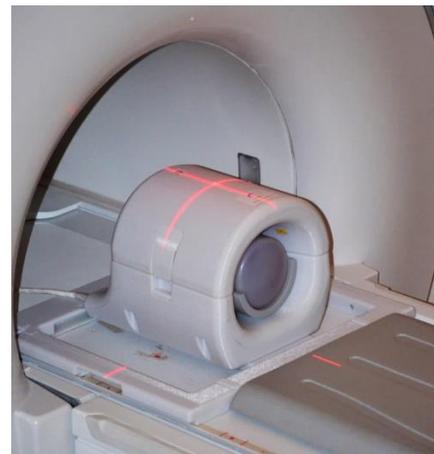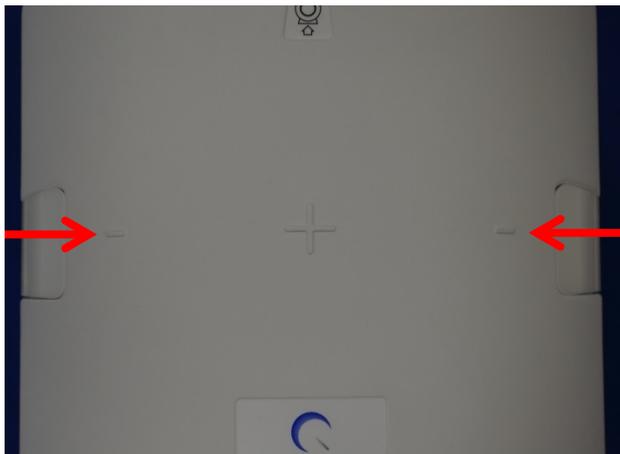

Outil d'assurance qualité multi-antenne (OAQM)

Tous les tests relatifs à l'antenne RF doivent être exécutés sur un système correctement étalonné. Le test EPIWP (pixel blanc d'installation dans les spécifications) doit obtenir le résultat Pass (Passe).

Type de test	Description du paramètre	Résultat escompté
1	EPIWP dans les spécifications	PASS (PASSE)

Pour lancer l'OAQM :

- Depuis Common Service Desktop (CSD) (Bureau de service commun (BSC)), accédez à Service Browser (Navigateur de service) et sélectionnez [Image Quality] (Qualité d'image) « Multi-Coil QA Tool » (Outil AQ multi-antenne) puis « Click here to start this tool » (Cliquez ici pour démarrer cet outil) comme illustré à la figure 1.

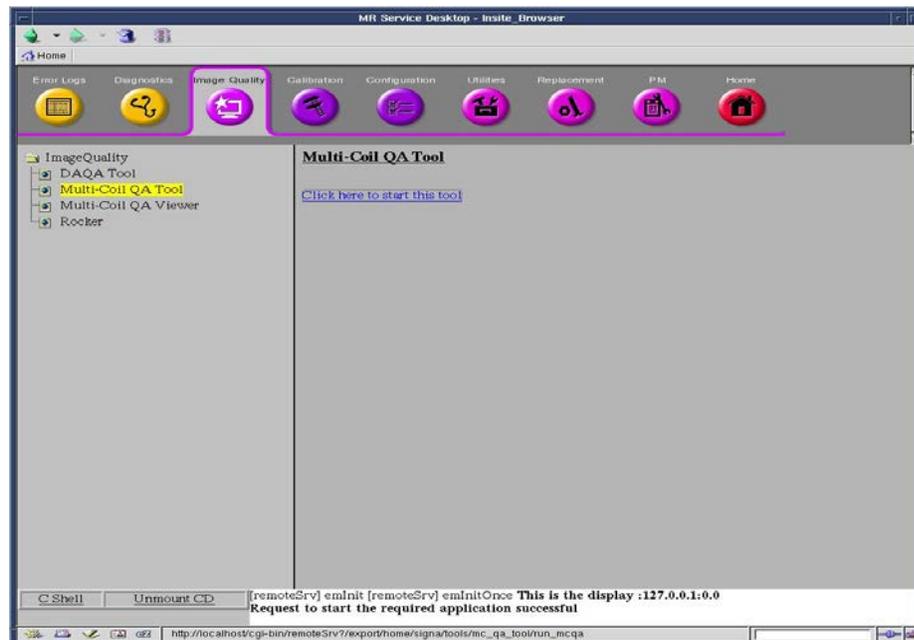


Figure 1

Remarque : Si un avertissement « No valid MCR-V (or MCR2/3) » (Pas de MCR-V (ou MCR2/3) valide) (Figure 2) s'affiche, sélectionnez [Yes] (Oui) et procédez au test. Les diagnostics MCR-V doivent être exécutés avant de remettre le système au client.

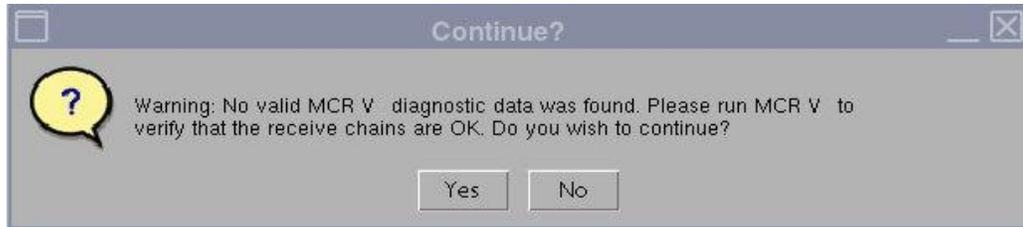


Figure 2

Le champ de l'antenne actuelle est automatiquement renseigné (Figure 3), en fonction de l'ID de l'antenne connectée au LPCA. Indiquez le numéro de série de l'antenne testée dans le champ Coil Serial # (N° de série de l'antenne).

13. Cliquez sur **[Start]** (Démarrer) pour commencer le test automatisé présenté à la figure 3. Selon le nombre d'emplacements de test (complexité de l'antenne), le test peut prendre de 3 à 5 minutes.

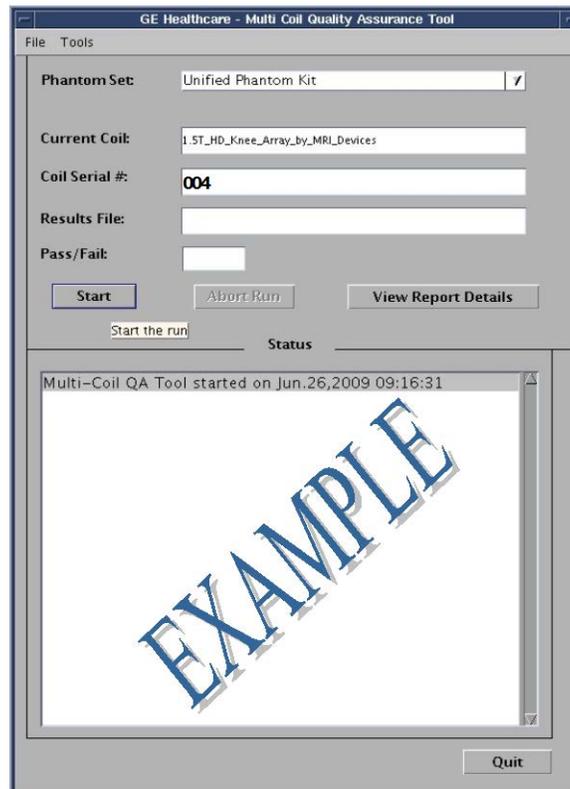


Figure 3

14. Au démarrage, une remarque indiquant « Phantom placement and coil landmarking are critical for repeatable results » (Le positionnement du fantôme et le repérage de l'antenne sont essentiels pour obtenir des résultats reproductibles) s'affiche. Si le repérage a été défini correctement et qu'il n'existe pas de bulles d'air dans le fantôme, cliquez sur **[Yes]** (Oui) pour continuer. (Figure 4).

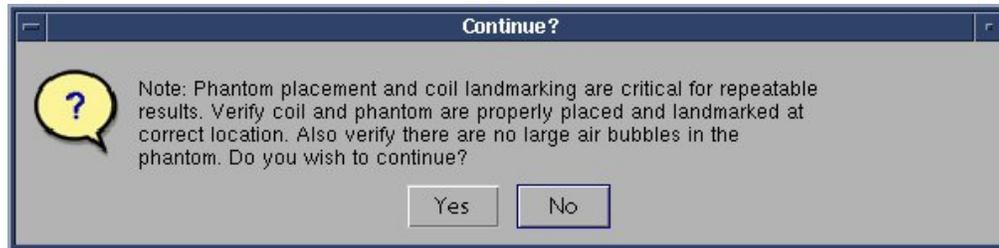


Figure 4

Remarque : La fenêtre d'état de l'interface graphique de l'outil OAQM est continuellement actualisée pour indiquer l'action exécutée par l'outil à tout moment. Une barre de progression (Figure 5) s'affiche pour indiquer la durée totale approximative du test, le temps écoulé et le pourcentage terminé.

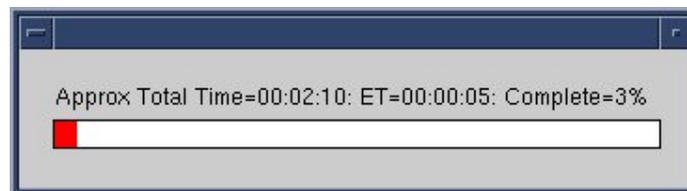


Figure 5

Une fois le test terminé, les résultats s'affichent à l'écran (Figure 6). L'état PASS/FAIL (PASSE/ÉCHEC) indique PASS (PASSE) si tous les éléments de l'antenne fonctionnent correctement. L'interface graphique de l'outil OAQM affiche « Fail » (Échec) pour l'une des raisons suivantes (liste non exhaustive) :

- Élément d'antenne défectueux
- Fantôme incorrect utilisé pour le test
- Positionnement/placement incorrect du fantôme

Des informations plus détaillées sur le test OAQM se trouvent sur le DVD des méthodes d'entretien RM ou sur le site web via le chemin suivant : Troubleshooting -> System -> Multi-Coil Quality Assurance Tool (Dépannage -> Système -> Outil d'assurance qualité multi-antenne)

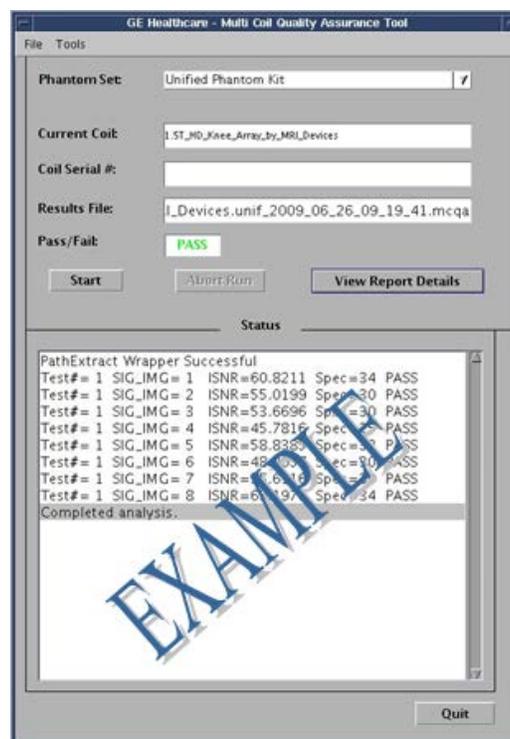


Figure 6


15. Cliquez sur le bouton **[Quit]** (Quitter) pour quitter l'outil OAQM.

Utilisation de la visionneuse OAQM

Si les résultats doivent être affichés ultérieurement, procédez comme suit :

1. Dans l'outil OAQM sélectionnez File > Open > Results File (Fichier > Ouvrir > Fichier de résultats) et sélectionnez le fichier de résultats de l'antenne voulue, puis [View Report Details] (Afficher les détails du rapport) pour revoir les résultats.

Remarque : La visionneuse de résultats s'ouvre comme illustré à la figure 7. Le nom du fichier de résultats et les résultats Pass/Fail (Passe/Échec) indiqués dans l'interface graphique de l'outil sont également présentés en haut de la visionneuse.

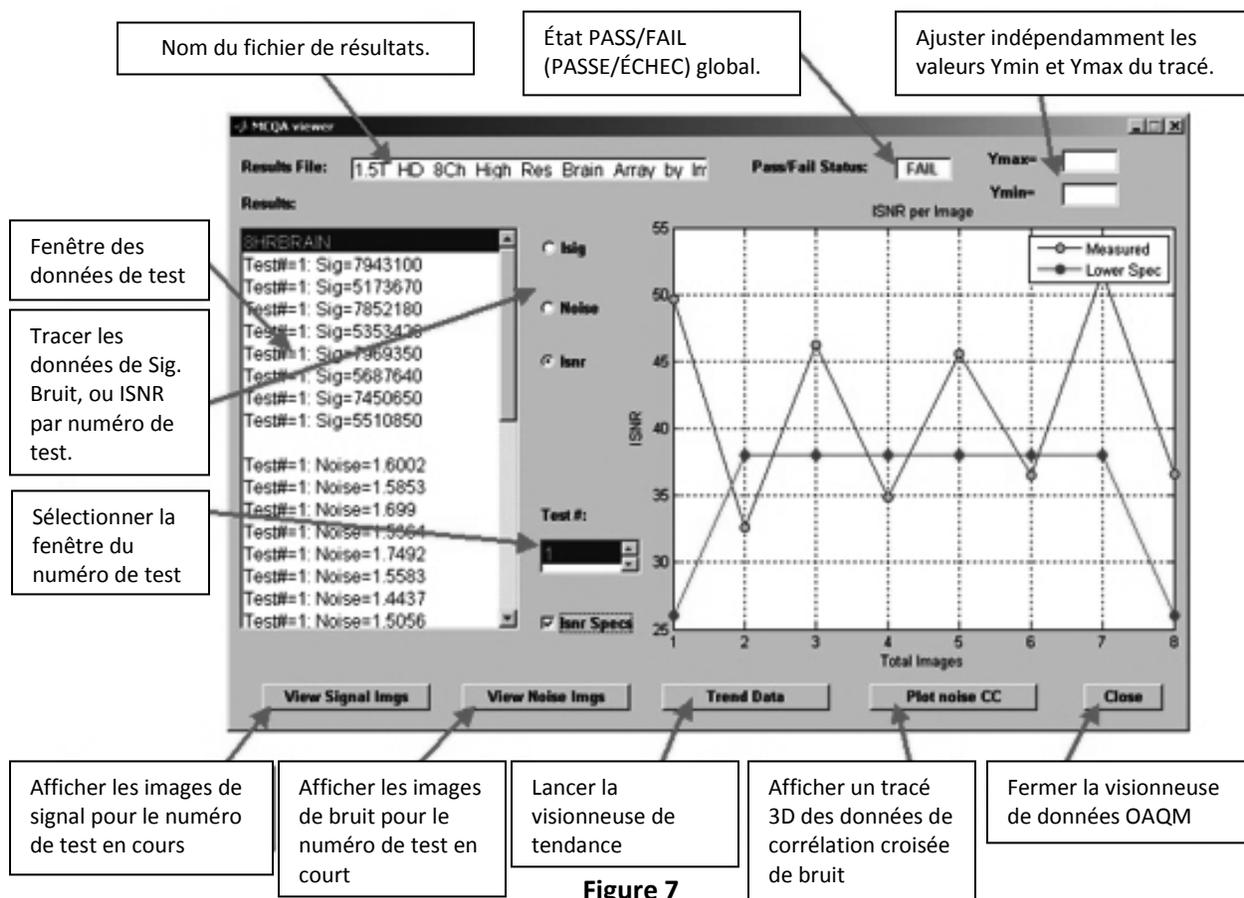

2. Sélectionnez l'option ISNR et cochez la case ISNR Specs (Spécifications ISNR) dans la partie médiane de la visionneuse de résultats pour afficher ces derniers.

Type de test	Description du paramètre	Résultat escompté
1	EPIWP dans les spécifications	PASS (PASSE)

Chapitre 5 – Installation et utilisation de l'antenne

Positionnement de l'antenne genou 18ch T/R sur la table d'examen


1. Retirez toute autre antenne de surface (le cas échéant) de la table d'examen.
2. Transportez l'antenne genou jusqu'à la table d'examen. Si vous transportez l'antenne à la main, veillez à la saisir à deux mains par la poignée du cadre.




3. Placez l'antenne sur la table d'examen. Notez que la flèche de direction du tunnel illustrée ci-dessous doit pointer **vers** le tunnel.



4. Raccordez le connecteur de l'antenne au port d'émission approprié du système. (Consultez le chapitre 3 – Emplacement du port E/R). Tournez l'extrémité du connecteur du port P de sorte que la position VERROUILLÉ soit visible, comme illustré sur l'image de droite.

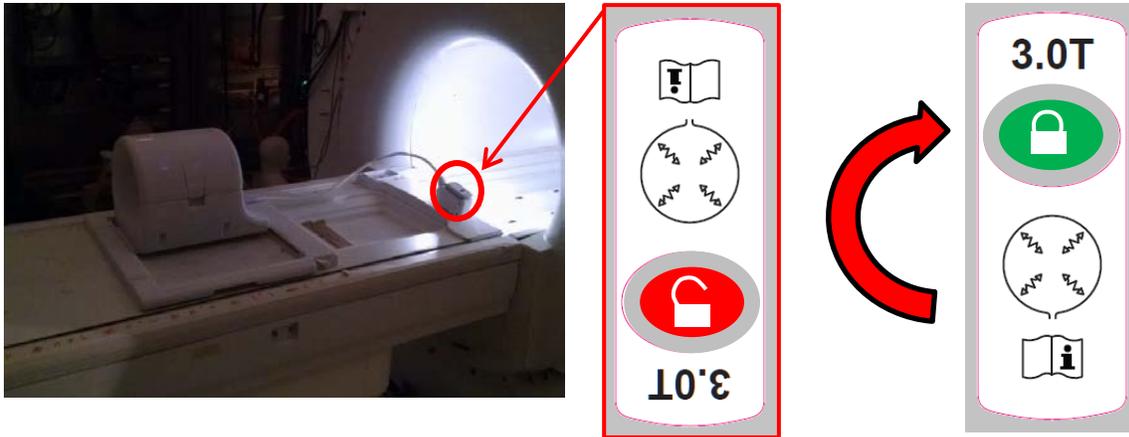


5. Ajustez l'antenne vers la gauche/droite pour améliorer le confort du patient. Si des réglages sont nécessaires, tournez la molette sur le cadre de l'antenne pour la déverrouiller et la faire glisser dans la position voulue.

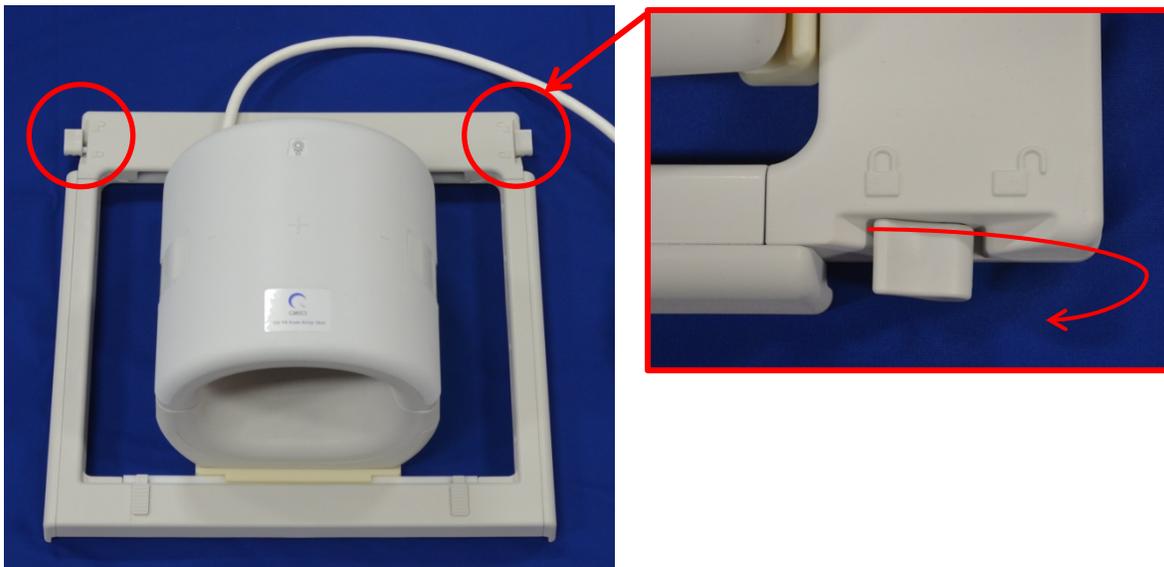


REMARQUE : Si vous souhaitez positionner l'antenne au-delà de 8 cm par rapport à l'iso-centre dans le sens latéral :

- a) Poussez l'antenne aussi loin que possible contre la butée.
- b) Rétractez la butée en tirant la poignée vers l'arrière.
- c) Poussez l'antenne au-delà de la butée, dans la position voulue.

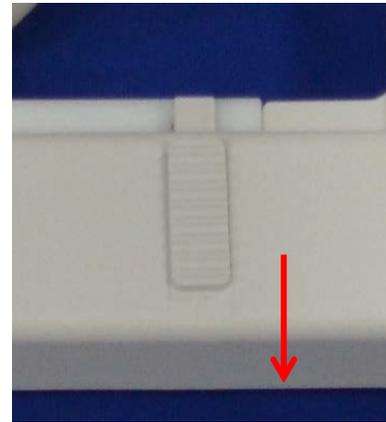

6. Une fois l'antenne positionnée correctement, tournez de nouveau la molette pour la verrouiller en place.

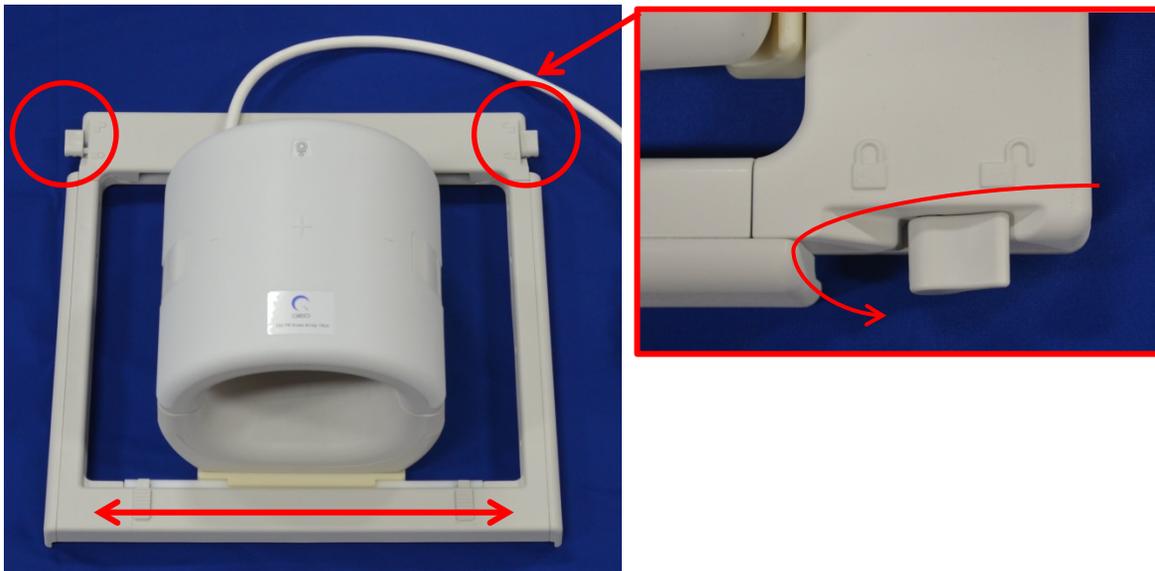


7. Séparez la moitié supérieure de l'antenne en tirant simultanément sur les deux languettes de fixation jusqu'à ce que les deux moitiés soient entièrement désengagées.



Configuration du support



Différents supports sont fournis avec l'antenne genou 18ch T/R pour réduire les artefacts de mouvement et assurer le confort du patient. En outre, certains supports forment une isolation entre le corps du patient et le câble pour mieux éviter tout risque potentiel dû au contact avec le câble et/ou risque de brûlures électriques.

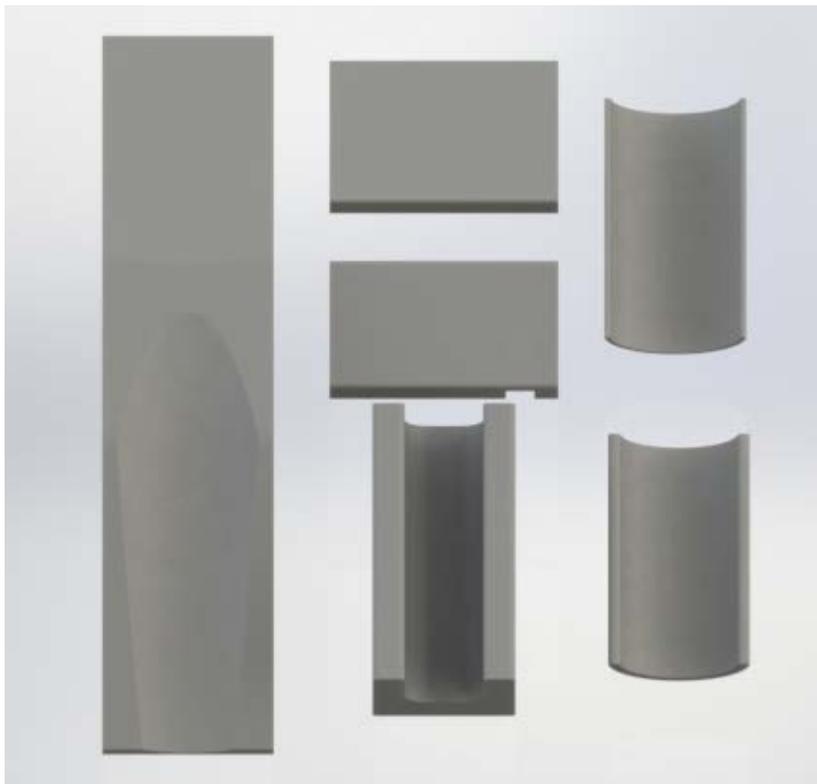

Positionnement du patient

L'antenne genou 18ch T/R est conçue pour l'imagerie du genou droit ou gauche, le patient étant allongé sur le dos, pieds en premier dans l'aimant.

8. Positionnez l'antenne et les supports avant de positionner le patient. L'antenne genou 18ch T/R est livrée avec différents supports pour améliorer le confort du patient. Un exemple de l'agencement recommandé est présenté ci-dessous :

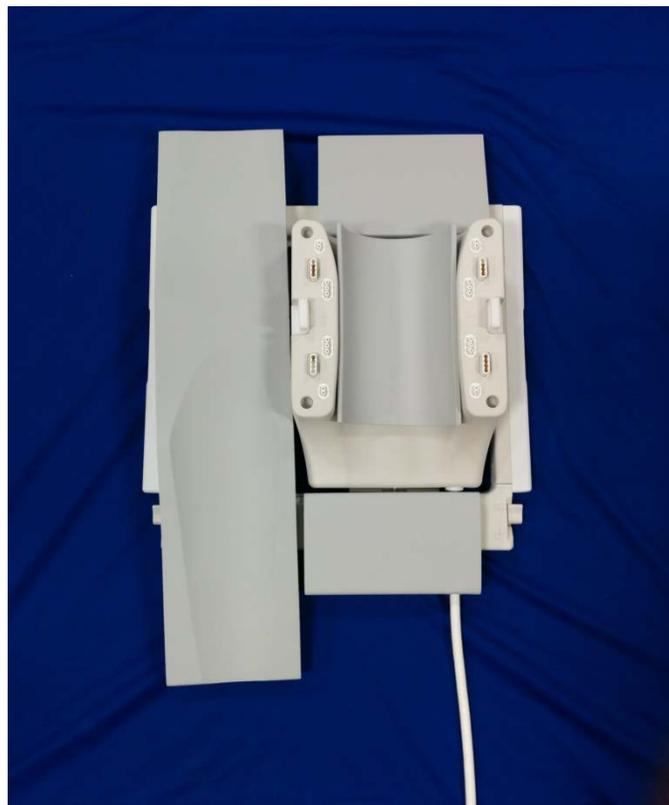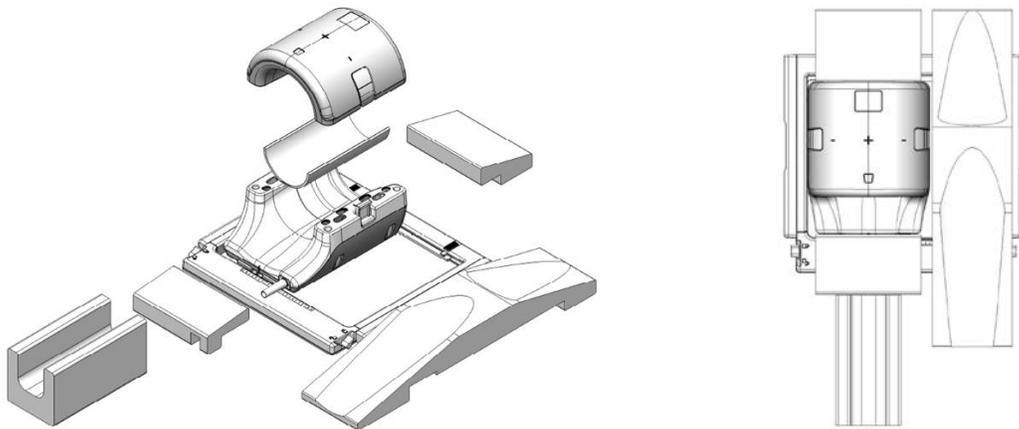

9. Positionnez le genou du patient dans la moitié inférieure de l'antenne. Utilisez les supports appropriés pour immobiliser correctement le genou du patient et assurer son confort.




Verrouillage de l'antenne

10. Fermez l'antenne en veillant à ne pas pincer le patient, sa chemise ou la literie entre les moitiés d'antenne. Sinon, la qualité d'image est médiocre et l'antenne peut être endommagée.

Les deux moitiés de l'antenne sont conçues de façon à ne se fermer que dans le sens correct.



11. Une fois la moitié supérieure complètement fermée, rabattez les languettes de fixation vers le bas des deux côtés, contre la surface de l'antenne, pour engager entièrement les fixations mécaniques. Si les fixations ne sont pas complètement engagées, l'antenne peut s'ouvrir pendant l'examen, occasionnant une perte totale de connexion entre les moitiés d'antenne. Le résultat se traduit par une qualité d'image médiocre ou une détérioration de l'antenne.

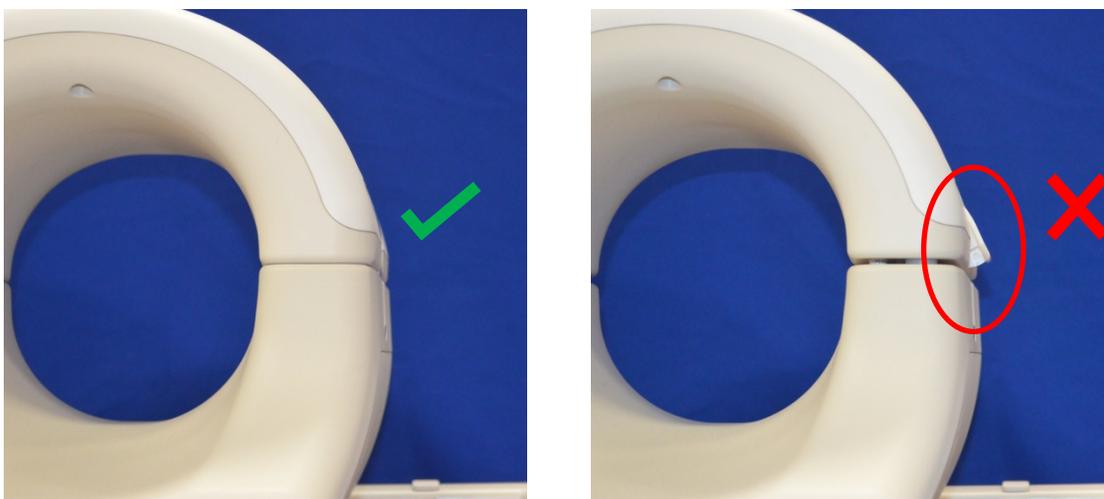

Attention : Prenez soin de ne pas placer vos doigts sous la fixation. Saisissez uniquement les languettes accessibles comme illustré ci-dessus.

Repérage de l'antenne

12. Faites avancer le patient dans l'aimant et repérez l'antenne à l'aide des repères de référence sur le dessus de l'antenne genou 18ch T/R.



Chapitre 6 – Nettoyage, entretien, réparation et mise au rebut

Nettoyage de l'antenne RF



Attention : Ne versez pas de solution de nettoyage directement sur l'antenne ou les accessoires.



Attention : Ne stérilisez pas l'antenne ni les accessoires.

L'antenne RF et les supports de confort du patient doivent être nettoyés après chaque usage, en procédant comme suit :

1. Débranchez l'antenne RF du système IRM avant de nettoyer l'antenne.
2. Éliminez toute impureté à la surface de l'antenne avec un linge sec. Si la saleté est difficile à éliminer, nettoyez selon les procédures décrites ci-dessous.
3. Essuyez avec un linge imbibé de solution à 10 % d'eau de javel et 90 % d'eau du robinet ou 70 % d'éthanol et 30 % d'eau du robinet.
4. Si l'antenne doit être renvoyée à GE Healthcare pour réparation, essuyez-la avec une solution à 10 % d'eau de javel (comme indiqué ci-dessus) pour réduire le risque d'exposition à des agents potentiellement infectieux.
5. Jetez les matériels utilisés pour nettoyer l'antenne et les supports conformément à toutes les réglementations fédérales, nationales et locales.

Désinfection

Si l'antenne RF ou les supports de confort du patient doivent être désinfectés, nettoyez-les comme indiqué ci-dessus puis procédez comme suit :

Étapes préalables à la désinfection :

1. Humidifiez toutes les surfaces avec du CaviCide (en utilisant un vaporisateur ou des lingettes pour certaines surfaces, celles proches des contacts électriques par exemple). Vérifiez que toutes les surfaces sont visiblement humidifiées et le demeurent pendant 30 secondes au moins.
2. Utilisez une brosse douce en nylon et/ou des lingettes désinfectantes supplémentaires pour déloger les débris durcis ou la charge microbienne difficiles à éliminer. Appliquez du produit nettoyant/désinfectant supplémentaire (en utilisant un vaporisateur ou des lingettes pour certaines surfaces, celles proches des contacts électriques par exemple) sur les zones préalablement brossées ou essuyées. Vérifiez que ces surfaces préalablement brossées ou

essuyées demeurent visiblement humidifiées par le produit nettoyant/désinfectant pendant 30 secondes au moins.

3. Essuyez les surfaces avec des serviettes en papier propres pour éliminer les débris.
4. Jetez les brosses, lingettes nettoyantes/désinfectantes et serviettes en papier usagées.
5. Répétez les étapes 1 à 4.
6. Si des débris demeurent sur les surfaces, recommencez les étapes préalables à la désinfection.

Étapes de désinfection :

7. Appliquez du CaviCide (en utilisant un vaporisateur ou des lingettes pour certaines surfaces, celles proches des contacts électriques par exemple) directement sur les surfaces préalablement nettoyées et veillez à ce que toutes les surfaces soient et demeurent humidifiées pendant 2 (deux) minutes au moins.
8. Essuyez avec des serviettes en papier propres pour éliminer le produit nettoyant/désinfectant résiduel.
9. Jetez les lingettes nettoyantes/désinfectantes et les serviettes en papier usagées.

Laissez l'antenne et les accessoires sécher avant utilisation.

Entretien

Aucun programme d'entretien régulier n'est requis pour l'antenne RF.

Réparation

Contactez votre représentant GE pour toute question relative à la réparation de l'antenne RF.

Mise au rebut

Contactez votre représentant GE pour toute question concernant le renvoi ou la mise au rebut de l'antenne RF.

CETTE PAGE EST LAISSÉE VIERGE INTENTIONNELLEMENT

Fabricant :

Quality Electrodynamics, LLC. (QED)
700 Beta Drive, Suite 100
Mayfield Village, OH 44143
États-Unis
www.qualityelectrodynamics.com

Distributeur :

GE Medical Systems, LLC

Coordonnées de l'importateur en Turquie :

GE Medical Systems Turkey Ltd.
Sti. Esentepe Mah. Harman Sok. No : 8
34394 Sisli – Istanbul, Turquie