


Användarhandbok



18ch T/R-knäspole för GE 3.0 T MR-system

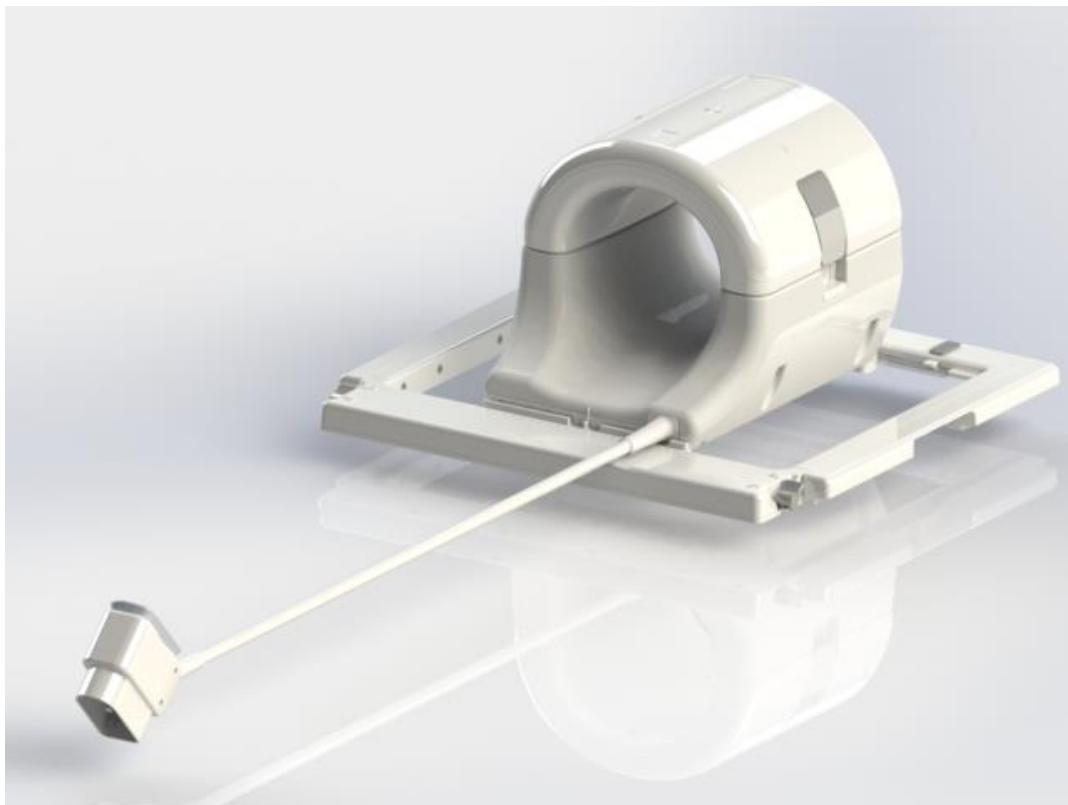

Modellnummer:

GE	QED
5561409-2	Q7000074

Garanti och ansvarsförbindelse

Ansvaret för underhåll och användning av produkten efter leverans åvilar den kund som har införskaffat produkten. Följande punkter omfattas inte av garantin, inte heller under garantiperioden:

- Skador eller förluster på grund av felaktig användning eller vanvård.
- Skador eller förluster orsakade av Force majeure, t.ex. brand, jordbävning, översvämning, blixtnedslag etc.
- Skador eller förluster orsakade av underlåtenhet att uppfylla de specifika krav som gäller för utrustningen, t.ex. otillräcklig strömförsörjning, felaktig installation eller otillåtna miljöförhållanden.
- Skador orsakade av ändringar eller modifieringar av produkten.

Under inga omständigheter ska QED hållas ansvarigt för följande:

- Skadeförluster eller problem orsakade av förflyttning, modifiering eller reparationer utförda av personal som inte uttryckligen auktoriserats av QED.
- Skador eller förluster på grund av slarv eller bristande efterlevnad av de försiktighetsåtgärder och användningsinstruktioner som ges i denna användarmanual.

Transport och förvaring

OBS! DENNA UTRUSTNING SKA TRANSPORTERAS OCH FÖRVARAS UNDER FÖLJANDE FÖRHÅLLANDEN:


1. Omgivande temperatur : -40 °C till +70 °C
2. Relativ luftfuktighet: 10 % till 100 %
3. Atmosfäriskt tryck: 50 kPa till 106 kPa

Direktivet om medicintekniska produkter

Denna produkt uppfyller kraven i rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter om den bär följande CE-märkning:



Auktoriserad representant i Europa:

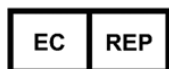

Medical Device Safety Service GmbH (MDSS)
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Tyskland

Ej tillåtna förändringar av produkten eller dess konfiguration ogiltiggör CE-märkningen. För övriga länder, vänligen kontakta lokal återförsäljare.

Federal lagstiftning i USA

Försiktighet: Enligt federal lag får försäljning, distribution och användning av denna produkt endast ske av eller på ordination av läkare. Enligt federal lagstiftning får denna produkt endast användas för provningsändamål för sådana indikationer som inte anges under rubriken Indikationer.

Utgåva: Februari 2015.

Inledning

Denna handbok innehåller detaljerad information om säkerhetsåtgärder, användning och skötsel av 18ch T/R-knäspolen. För säkerhet och noggrannhet vid användning av denna produkt ska såväl denna handbok och handboken till MR-systemet läsas noga innan produkten används. Denna handbok innehåller inga instruktioner som gäller utrustning från andra leverantörer än QED. Läs originaldokumenten från respektive leverantör för sådan information.

Kompatibilitet

18ch T/R-knäspolen är kompatibel med 3.0 T MR-system från GE.

Användarprofil

Användare – Röntgentekniker, röntgensjuksköterskor, läkare (observera dock att all tillämplig lagstiftning i landet i fråga måste följas).

Utbildning för användare – Det krävs ingen speciell utbildning för att använda denna spole (GE erbjuder dock en omfattande utbildning om MR-system för att instruera användarna om korrekt användning av sådana system).

Patientuppgifter

Ålder, hälsa, kondition – Inga speciella begränsningar


Vikt – 180 kg (400 lbs) eller mindre (se användarhandboken till MR-systemet. Om maximal patientvikt för systemet understiger den som här anges för knäspolen gäller viktgränsen för systemet).

Innehåll

Inledning	3
Kompatibilitet	3
Användarprofil	3
Patientuppgifter	3
Innehåll	4
Kapitel 1 – Komponenter till 18ch T/R-knäspolen	5
Kapitel 2 – Säkerhet	6
Symboler	6
Indikationer	7
Kontraindikationer	7
Försiktighetsåtgärder	7
Försiktighet – RF-spole	7
Försiktighet – MR-system	8
Nödåtgärder	9
Kapitel 3 – Lokalisering av SM-porten	10
Lokalisering av SM-porten	10
Kapitel 4 – Kvalitetssäkring	11
Verifiering av skannern	11
SNR-test.....	11
Verktyg för multi-coil kvalitetssäkring (MCQA)	16
Använda MCQA-visare	19
Kapitel 5 – Uppsättning och användning av spolen.....	20
Placering av 18ch T/R-knäspolen på britsen	20
Kuddar	23
Patientposition	24
Lås spolen.....	25
Inriktning av spolen.....	26
Kapitel 6 – Rengöring, underhåll, service och bortskaffning	27
Rengöring av RF-spolen.....	27
Desinfektion	27
Underhåll.....	28
Service	28
Bortskaffning.....	28

Kapitel 1 – Komponenter till 18ch T/R-knäspolen

18ch T/R-knäspolen levereras med de delar som visas nedan. Kontrollera vid mottagandet att leveransen är komplett.

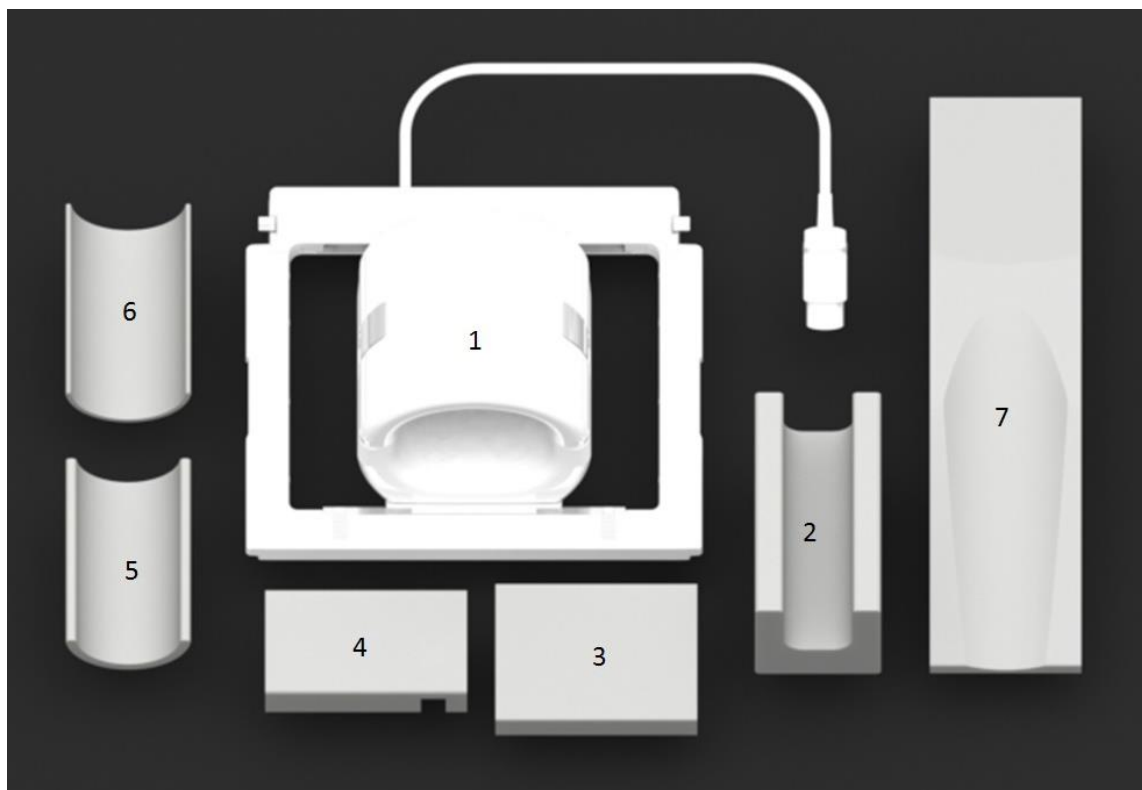

Del nr	Beskrivning	Antal	Ge art.nr	QED art.nr
1	18ch T/R-knäspole	1	5561409-2	Q7000074
2	18ch T/R-knäspole - Fotkudde	1	5561409-7	3003887
3	18ch T/R-knäspole - Lårkudde	1	5561409-10	3003863
4	18ch T/R-knäspole - Vadkudde	1	5561409-11	3003896
5	18ch T/R-knäspole - Knäkudde 1,27 cm (0,5")	1	5561409-8	3003885
6	18ch T/R-knäspole - Knäkudde 0,64 cm (0,25")	1	5561409-9	3003884
7	18ch T/R-knäspole - Kudde för ej avbildat knä	1	5561409-6	3003888

Total vikt: 6,8 kg (15,0 lb)

Kapitel 2 – Säkerhet

I detta avsnitt finns allmänna försiktighetsåtgärder och säkerhetsinformation som måste följas när knäspolen används.

Läs även försiktighetsåtgärderna i användarhandboken till MR-systemet, när det används.

Symboler

	Försiktighet
	Se bruksanvisningen
	Separat insamling för elektrisk och elektronisk utrustning
	Klass II-utrustning
	Applicerad del av typ BF
	Tillverkare
	Tillverkningsdatum i formatet åååå-mm
	Sändare/Mottagare
	Auktoriserad representant i EU
	Katalognummer
	Serienummer
	Intertek ETL-listad (Kanada & USA)
	Gräns för temperatur
	Gräns för luftfuktighet
	Gräns för atmosfäriskt tryck
	Brandrisk

Indikationer

18ch T/R-knäspolen är avsedd att användas i 3.0 T MR-system från GE, för att skapa diagnostiska bilder av knäet som sedan kan tolkas av utbildad läkare.

Kontraindikationer



Skanning av patienter med metallimplantat eller elektriskt, magnetiskt eller mekaniskt aktiva implantat (t.ex. pacemaker) är kontraindicerat. Skanning av patienter med MR-villkorliga implantat kan accepteras under förutsättning att användaren följer villkoren för det aktuella implantatet.



Skanning av patienter med intrakraniala aneurysmklämmor är kontraindicerat såvida inte läkaren kan garantera att klämman inte är magnetiskt aktiv.



Användning av 18ch T/R-knäspolen för skanning av nyfödda, spädbarn och barn är kontraindicerat.

Försiktighetsåtgärder



Patienter med högre risk för hjärtstopp än normalt



Patienter med större sannolikhet för krampanfall eller klaustrofobi



Patienter som är medvetslösa, tungt sederade eller befinner sig i ett förvirringstillstånd



Patienter som saknar förmåga att delta i en tillförlitlig kommunikation (t.ex. spädbarn och små barn)



Patienter med känselbortfall i någon del av kroppen



Patienter som är gravida eller kan vara gravida



Patienter som har svårt att reglera kroppstemperaturen eller är särskilt känsliga för ökad kroppstemperatur (t.ex. patienter med feber, hjärtsvikt eller nedsatt svettning förmåga)

Försiktighet – RF-spole




Placera inte några enheter som kopplats loss (RF-spolar, kablar etc.) i gantryt under skanningen.




Anslut endast härför särskilt avsedda RF-spolar till uttaget för RF-spolar.

- ⚠ Avlägsna alla metallföremål, även kläder med metalltrådar eller metalleder, klockor och mynt, och allt material som kan innehålla metallpulver, t.ex. kosmetika, tatueringar, omslag, förband och tejp, före skanningen.
- ⚠ Använd inte en RF-spole som är defekt, i synnerhet inte om ytterhöljet har skadats eller metalleder har exponerats.
- ⚠ Försök inte förändra eller modifiera spolen.
- ⚠ Låt inte kablarna korsa varandra eller bilda öglor.
- ⚠ Se till att patienten inte kommer i direkt kontakt med kablarna till spolen.
- ⚠ Se till att spolen inte kommer i direkt kontakt med vätskor, t.ex. vatten eller läkemedel.
- ⚠ Om en spole är defekt ska den omedelbart tas ur bruk. Kontakta din GE-representant.
- ⚠ Använd endast de tillbehör som beskrivs i denna manual tillsammans med spolen.

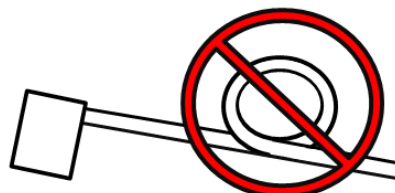

Försiktighet – MR-system

- ⚠ Låt inte patienten forma en ögla (krets) med någon kroppsdel. Använd kuddar för att hålla patientens händer och ben borta från spolen, MR-systemet, patientbränsen, eller andra kroppsdelar som kan bilda en ögla.

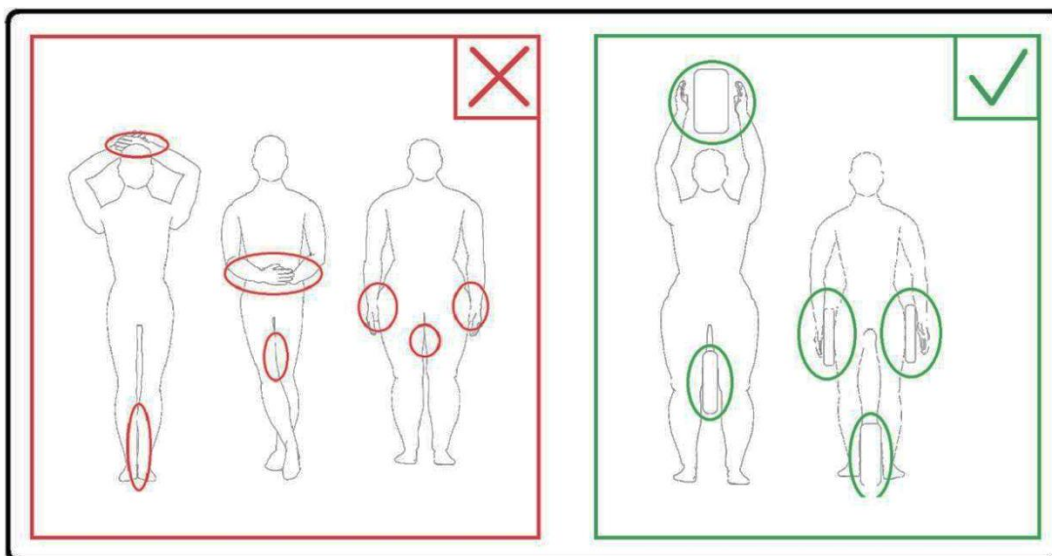

- ⚠ Låt inte patienten eller RF-spolen vidröra någon del av MR-systemet. Använd kuddar för att förhindra kontakt med tunnelväggarna, om så behövs.



Avbryt skanningen omedelbart om patienten klagar över värmekänsla, pirrande eller stickande känsla eller liknande. Kontakta läkare innan du fortsätter med skanningen.



Skanna inte patienter som har implantat av ferromagnetiskt material.



Låt inte personer med pacemaker eller andra implanterade elektroniska apparater träda in i magnetfältet. Kontakta tillverkaren av MR-systemet angående säkert avstånd.



Läkemedel i transdermala plåster kan orsaka brännskador på underliggande hud.



Patienter som arbetar i en miljö där det finns risk för att metallfragment bäddas in i kroppen ska screenas noga innan de genomgår MR-undersökning.

Nödåtgärder

Om en nödsituation uppstår under skanningen, avbryt omedelbart, ta ut patienten från rummet, och skaffa medicinsk hjälp om det behövs.

Kapitel 3 – Lokalisering av SM-porten

Lokalisering av SM-porten

18ch T/R-knäspolen är en spole som fungerar som sändare och mottagare. För att kunna använda spolen på korrekt sätt måste kontakten till systemet placeras i rätt uttag, som stöder både sändning och mottagning. Nedan anges de GE 3T MR-system som är kompatibla med spolen och vilken anslutningsport som ska användas för denna spole.

3T MR-system som stöds	S/M-anslutningsport
SIGNA Pioneer	P2

Kapitel 4 – Kvalitetssäkring

Verifiering av skannern

Gör en kontroll av signal/brusförhållandet för systemet. Se Service Methods CD; System Level Procedures; Functional Checks; Signal to Noise Check.

SNR-test

Hjälpmedel/fixturer som behövs


Beskrivning	GE art.nr	QED art.nr	Antal
Stor cylindrisk uniform fantom, SiOil	5342679-2	Ej tillämpl.	1
18ch T/R-knäspole - knäkudde 1,27 cm (0,5")	5561409-8	3003885	1

Uppsättning av spole och fantom samt förfarande

1. Notera serienumret på den/de spolar som används, samt programversion (från testrecord eller getver).
2. Avlägsna i förekommande fall andra ytspolar från patientbritsen.
3. Transportera knäspolen till patientbritsen. Om spolen bärs för hand måste man vara noga med att bära den i ramen med båda händerna.




4. Placera spolen på patientbritten. Observera att riktningspilen för tunneln som avbildas nedan ska peka **mot** tunneln.

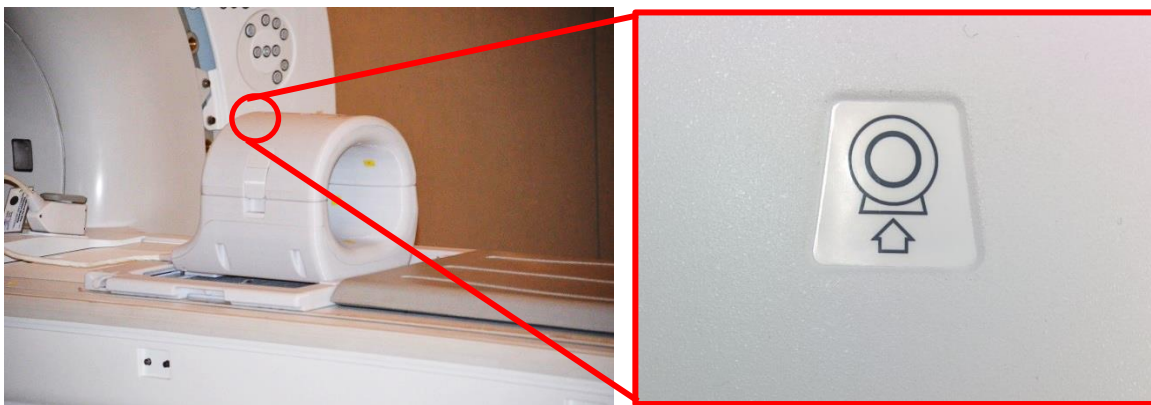


5. Anslut kontakten till spolen till korrekt sändaruttag på systemet. (Se Kapitel 3 – Lokalisering av SM-porten). Vrid änden av P-portsanslutningen runt så att den visar LÅST position, som på den högra bilden.



6. Kontrollera att spolen är placerad mitt i ramen i vänster-högerled. Om justering behövs, vrid på vredet på spolens ram för att lossa på spolen och för den till rätt position.

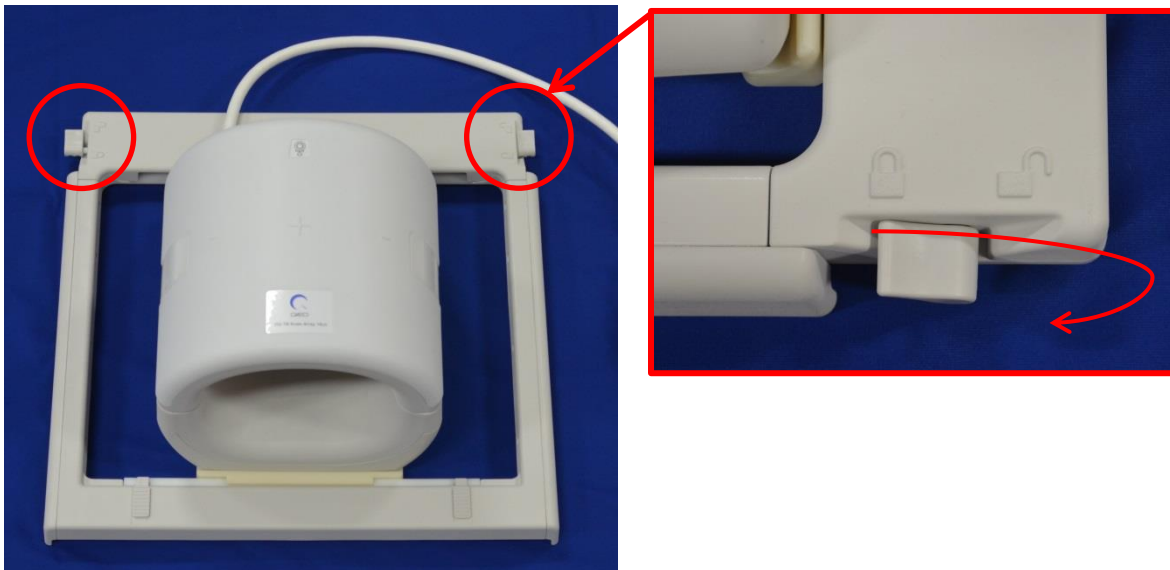

7. När spolen sitter på önskad plats, vrid tillbaka vredet så att spolen låses fast.

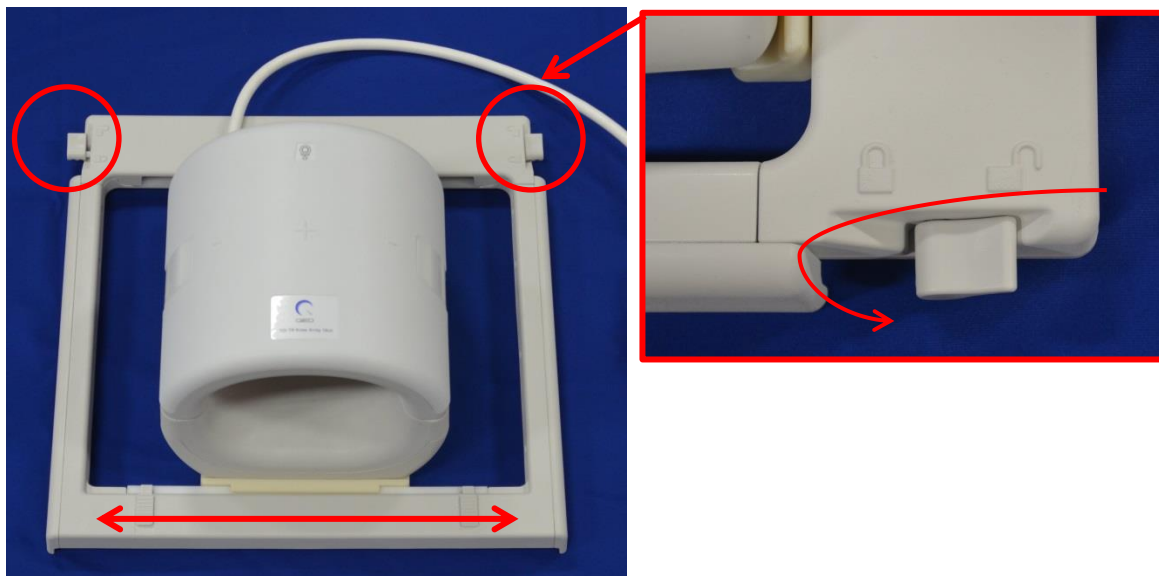



8. Ta bort den övre delen av spolen genom att samtidigt lyfta på de båda låstapparna tills de två halvorna är helt frigjorda från varandra.



9. Placera 18ch T/R-knäspolen -Knäkudde 1,27 cm (0,5") (5561409-8) och den stora cylindriska uniforma fantomen, SiOil (5342679-2) på spolen som bilden nedan visar.





10. Sätt tillbaka den övre halvan av spolen. **Se till att de två halvorna har förts ihop helt och att låstapparna är intryckta.**

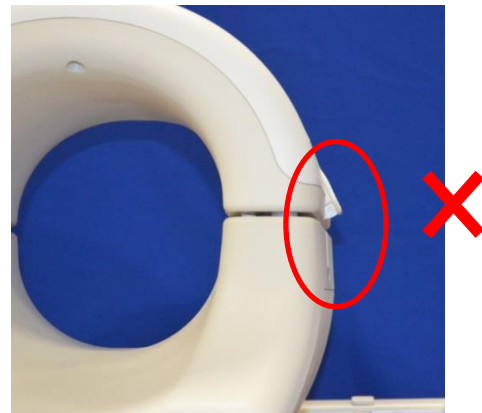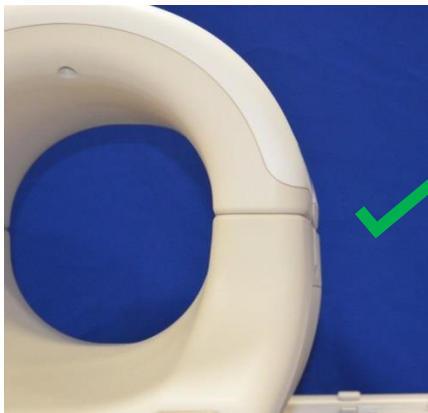

Försiktighet: Placera inte fingrarna under låstappen. Låstapparna får endast hållas som bilden ovan visar.

11. Rikta in spolen vid markeringarna som visas nedan och för in spolen i tunneln.

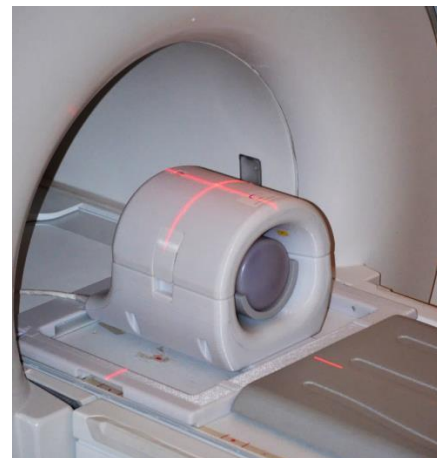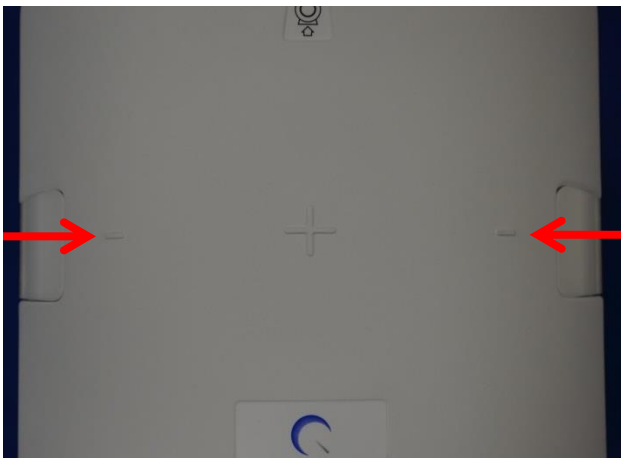


Verkt yg f r multi-coil kvalitetss kring (MCQA)

Alla tester som r r RF-spolar m ste k ras p  ett v l kalibrerat system. EPIWP (White Pixel from install in spec) ska vara godk nt.

Test-ID	Parameter	F�rväntat resultat
1	EPIWP in spec	PASS (GODK�NT)


F r att k ra MCQA:

- Fr n Common Service Desktop (CSD, Gemensam service), g  till Service Browser (S k service) och v lj [Image Quality] (Bildkvalitet) "Multi-Coil QA Tool" (Verkt yg f r multi-coil QA) och sedan "Click here to start this tool" (Klicka h r f r att starta verkt yet) som figur 1 visar.

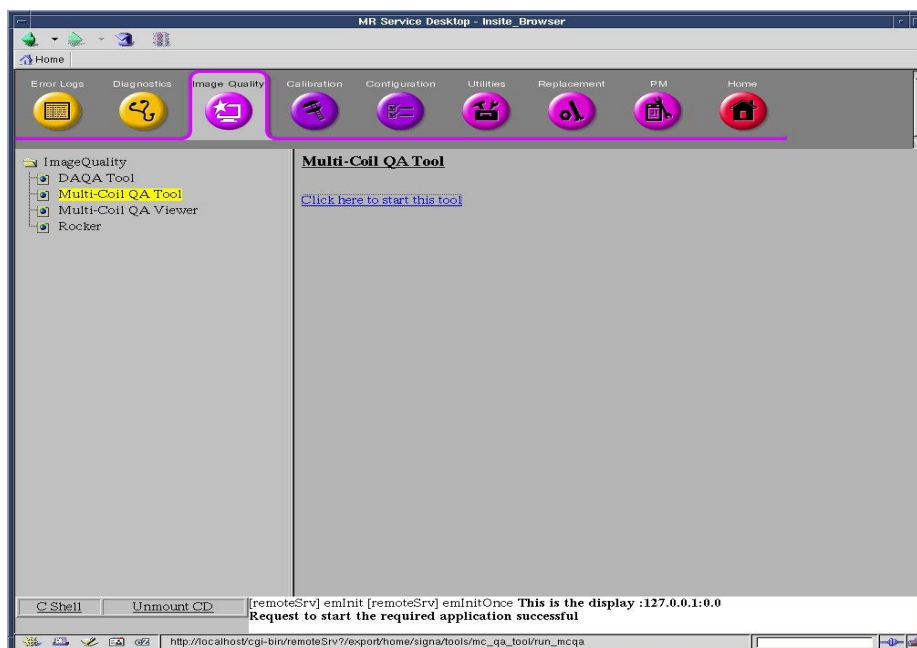

Figur 1


Obs! Om varningen "No valid MCR-V (or MCR2/3)" (Ingen giltig MCR-V (eller MCR2/3)) (se figur 2) visas, tryck p  [Yes] (Ja) och forts tt med testet. MCR-V-diagnostik m ste k ras innan systemet l mnas  ver till kunden.

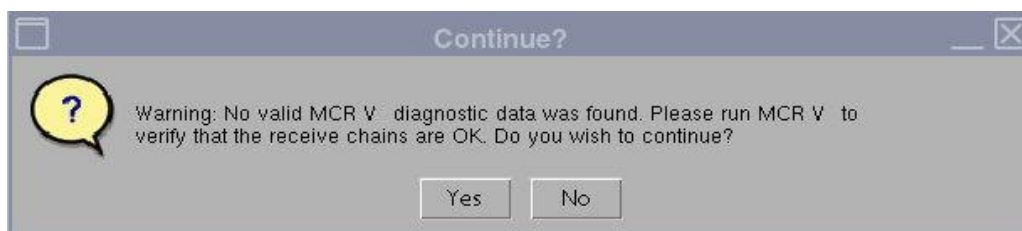

Figur 2


Fältet för aktuell spole fylls i automatiskt (figur 3) baserat på ID hos den spole som är ansluten till LPCA. Ange serienumret på den testade spolen i fältet Coil Serial # (Spolens serienummer).

13. Klicka på **[Start]** för att starta det automatiserade testet, se figur 3. Beroende på hur många platser som testas (spolens komplexitet) tar testet mellan 3 och 5 minuter.

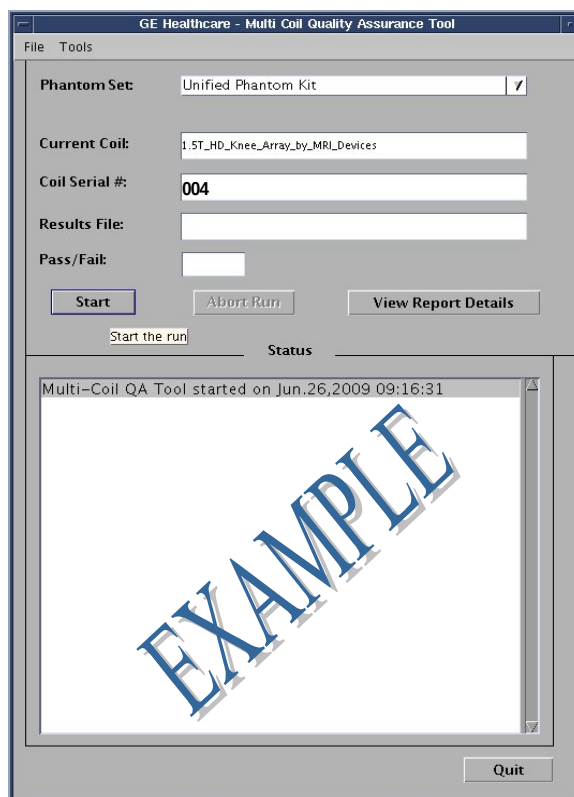


Figur 3

14. Vid starten visas meddelandet "Phantom placement and coil landmarking are critical for repeatable results" (Placering av fantomen och inriktning av spolens position är avgörande för repeterbara resultat). Om spolen är korrekt inriktad och det inte finns några luftbubblor i fantomen, klicka på **[Yes]** (Ja) för att fortsätta. (Figur 4).

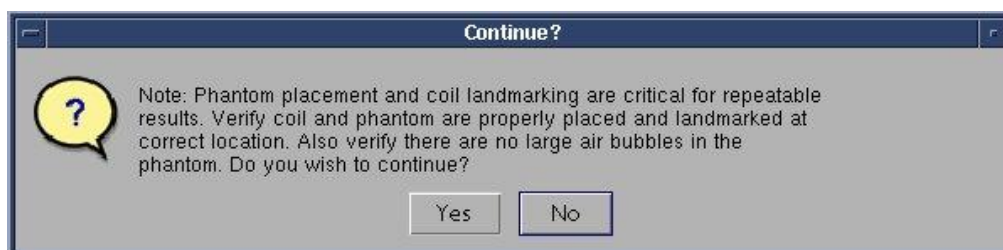

Figur 4

Obs! Statusfönstret i MCQA-verktyget uppdateras kontinuerligt i realtid med information om vad verktyget gör. En tidsstapel (figur 5) visas med ungefärlig total tid för testet, förfluten tid och %-andel av testet som utförts.

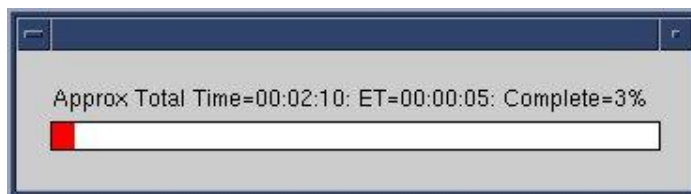


Figur 5

När testet är klart visas resultatet på skärmen (figur 6). Statusbedömningen PASS/FAIL (GODKÄNT/UNDERKÄNT) visar PASS (GODKÄNT) om alla delar av spolen fungerar oklanderligt. MCQA-verktyget visar "Fail" (Underkänt) av någon av följande orsaker, till exempel:

- Dåligt element i spolen
- Felaktig fantom använd för testet
- Felaktig positonering/placering av fantomen

Mer information om MCQA-test finns på DVD:n om MR-service eller webbplatsen via:
Troubleshooting -> System -> Multi-Coil Quality Assurance Tool (Felsökning -> System -> Verktøy för Multi-Coil kvalitetssäkring)

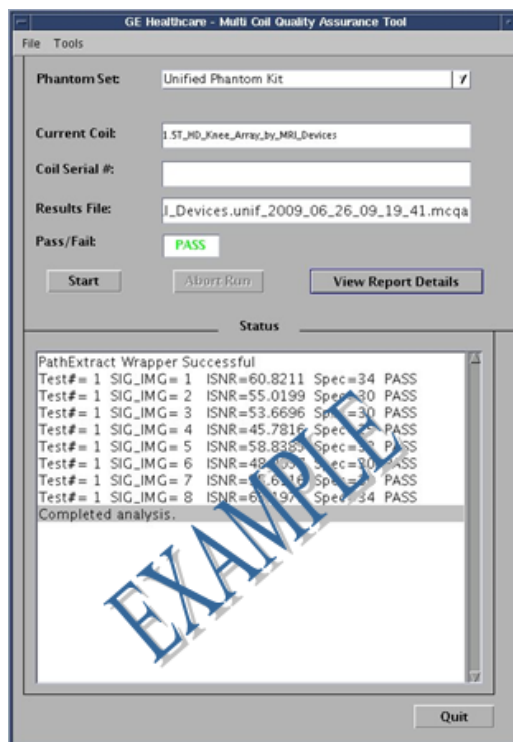

Figur 6


15. Klicka på **[Quit]** (Avsluta) för att avsluta MCQA-verktyget.

Använda MCQA-visare

Om resultatet ska visas senare, följ nedanstående steg:

1. I fönstret MCQA-verktyg väljer du File -> Open -> Results File (Fil -> Öppna -> Resultatfil) och väljer önskad resultatfil [View Report Details] (Visa rapportresultat) för att se resultatet.

Obs! Resultatvisaren öppnas, se figur 7. Resultatfilens namn och resultatet Pass/Fail (Godkänt/Underkänt) som visas i verktyget kommer även att anges högst upp i visaren.

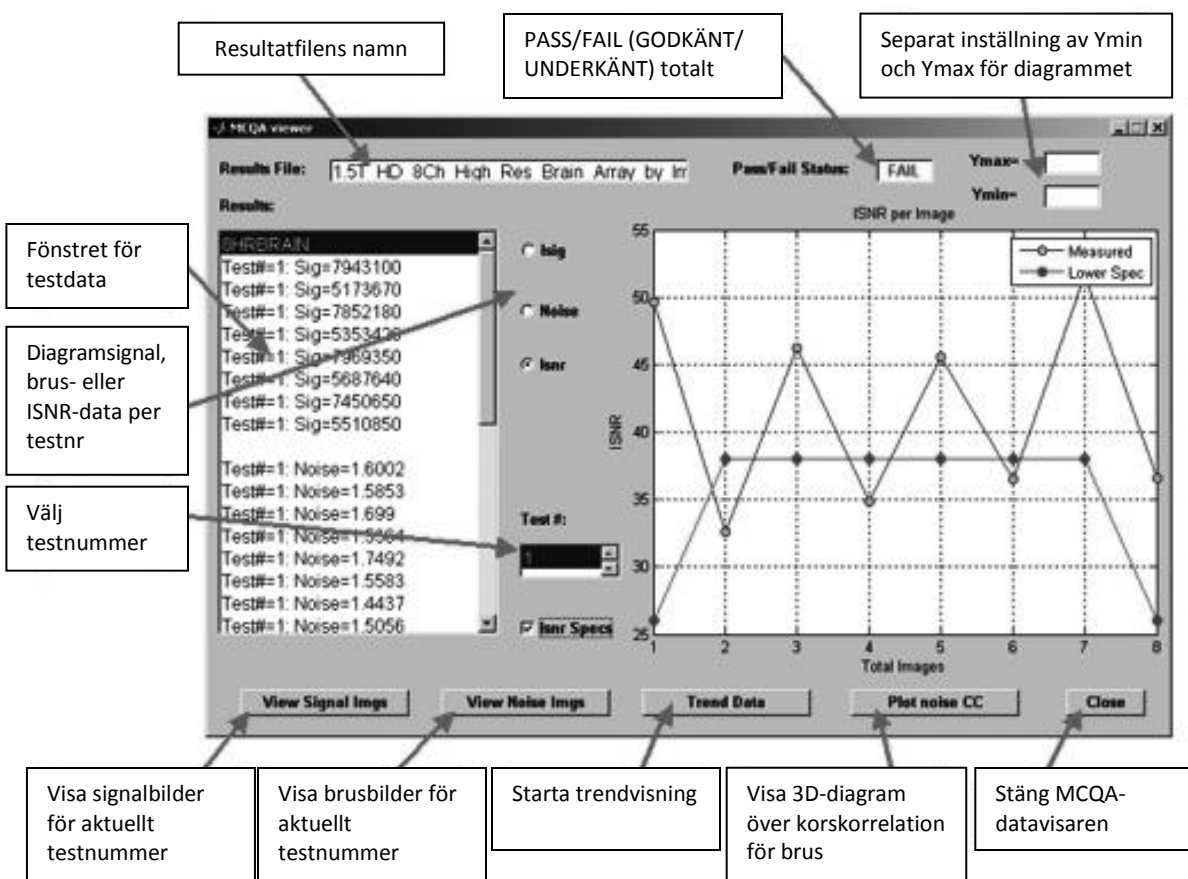

Figur 7

2. Markera ISNR-alternativet och ISNR-Specs-rutan i mittersta delen av resultatvisaren för att se resultaten.

Test-ID	Parameter	Förväntat resultat
1	EPIWP in spec	PASS (GODKÄNT)

Kapitel 5 – Uppsättning och användning av spolen

Placering av 18ch T/R-knäspolen på britsen


1. Avlägsna i förekommande fall andra ytspolar från patientbritsen.
2. Transportera knäspolen till patientbritsen. Om spolen bärs för hand måste man vara noga med att bära den i ramen med båda händerna.




3. Placera spolen på patientbritsen. Observera att riktningspilen för tunneln som avbildas nedan ska peka **mot** tunneln.



4. Anslut spolens kontakt till korrekt överföringsuttag på systemet. (Se Kapitel 3 – Lokalisering av SM-porten). Vrid änden av P-portsanslutningen runt så att den visar LÅST position, som på den högra bilden.

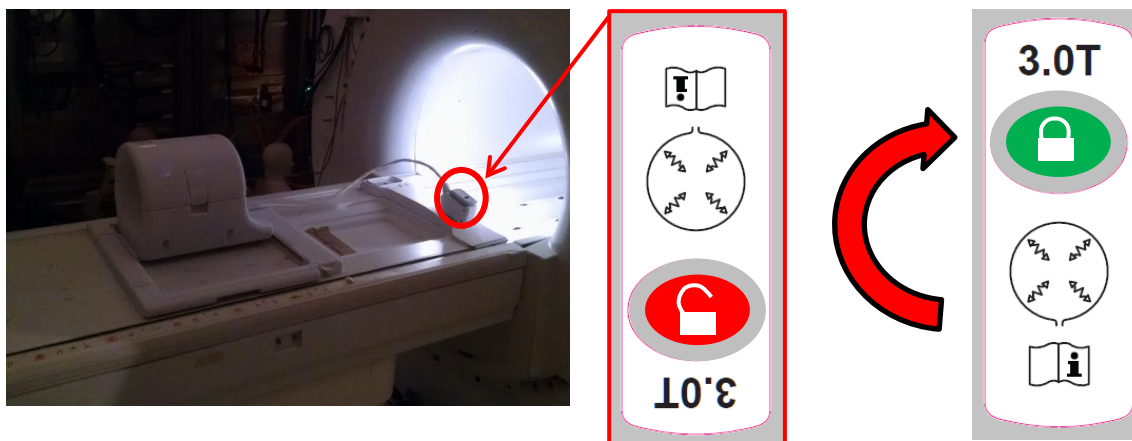


5. Justera in spolen i vänster/höger-led så att det känns bekvämt för patienten. Om justering behövs, vrid på vredet på spolens ram för att lossa på spolen och för den till rätt position.

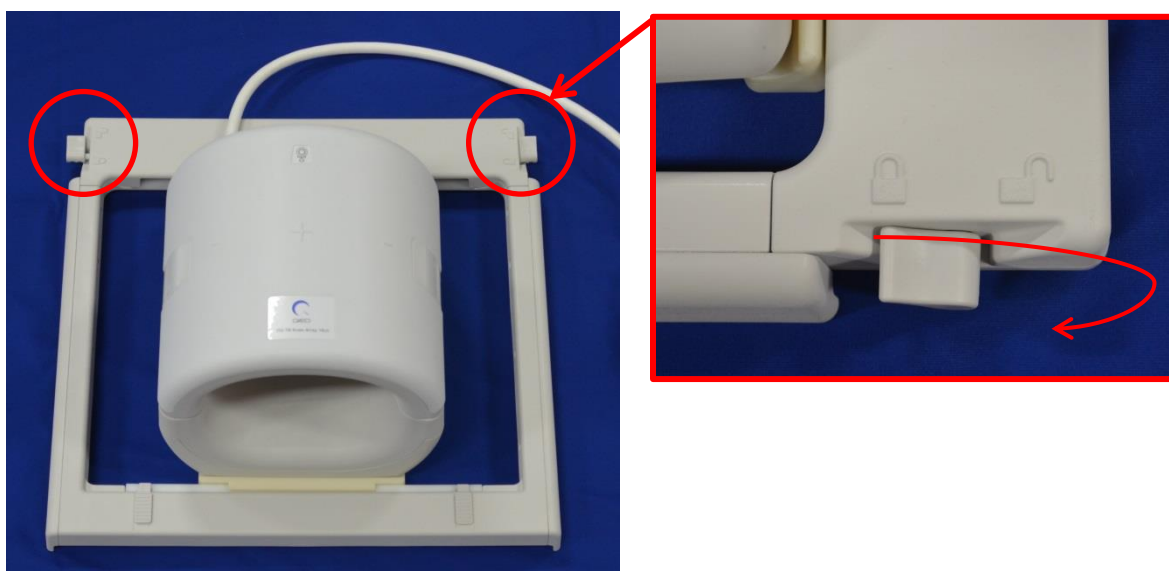


OBS! Om spolen måste placeras mer än 8 cm från isocentrum i lateral riktning:

- För spolen så långt det går mot stoppet
- Dra tillbaka stoppet genom att dra greppet bakåt
- För spolen förbi stoppet till önskad position

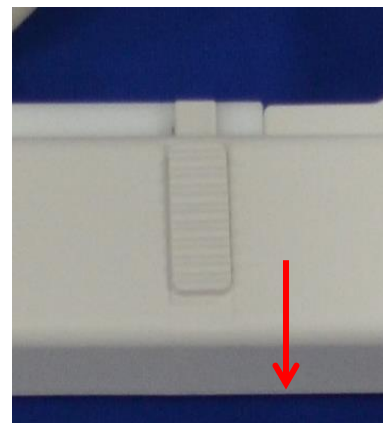

6. När spolen sitter på önskad plats, vrid tillbaka vredet så att spolen låses fast.

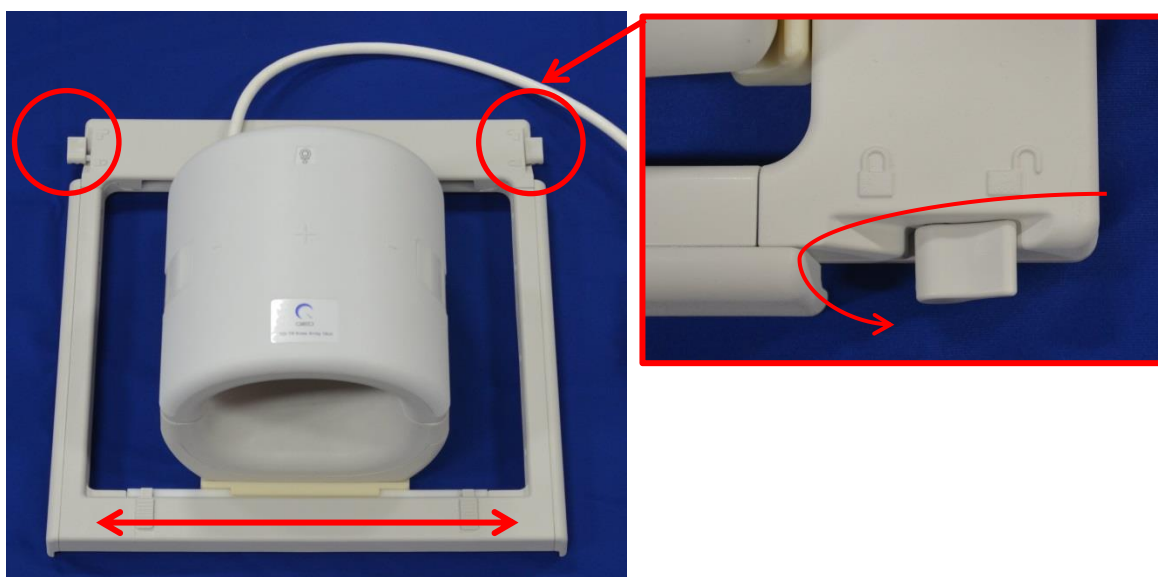


7. Ta bort den övre delen av spolen genom att samtidigt lyfta på de båda låstapparna tills de två halvorna är helt frigjorda från varandra.



Kuddar



Flera olika kuddar medföljer 18ch T/R-knäspolen för att minimera rörelseartefakter och göra det bekvämt för patienten. Vissa kuddar utgör även isolering mellan patientens kropp och kabeln för att minska riskerna med kabelkontakt och/eller elektriska brännskador.

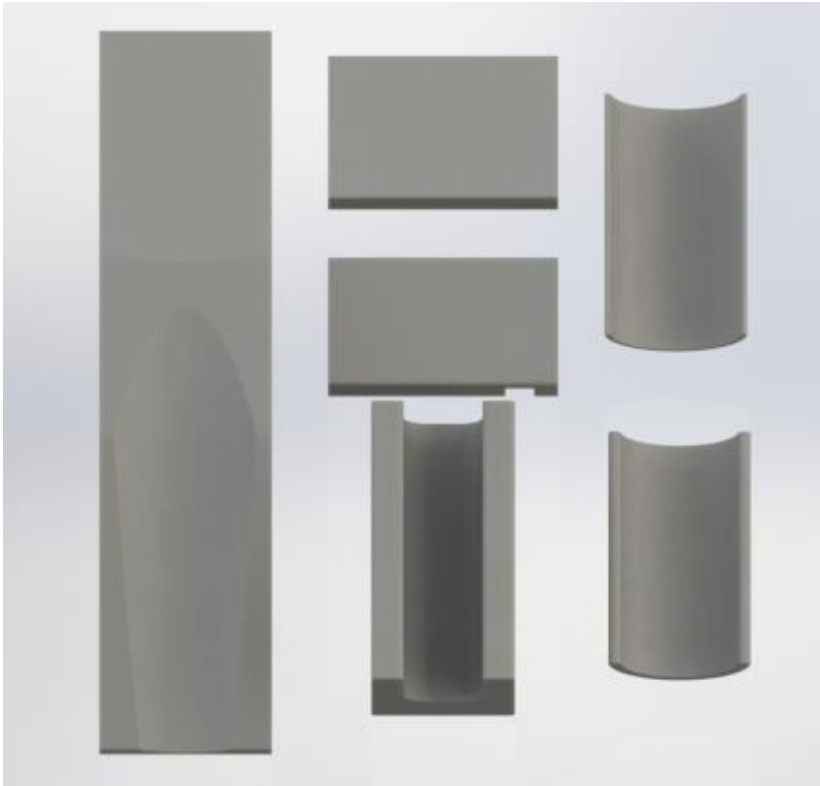

Patientposition

18ch T/R-knäspolen är avsedd för avbildning av vänster eller höger knä med patienten liggande på rygg och med fötterna riktade in mot magneten.

8. Placera först spolen och kuddarna. 18ch T/R-knäspolen levereras med olika kuddar för bästa patientkomfort. Nedan ges ett exempel på rekommenderad användning:

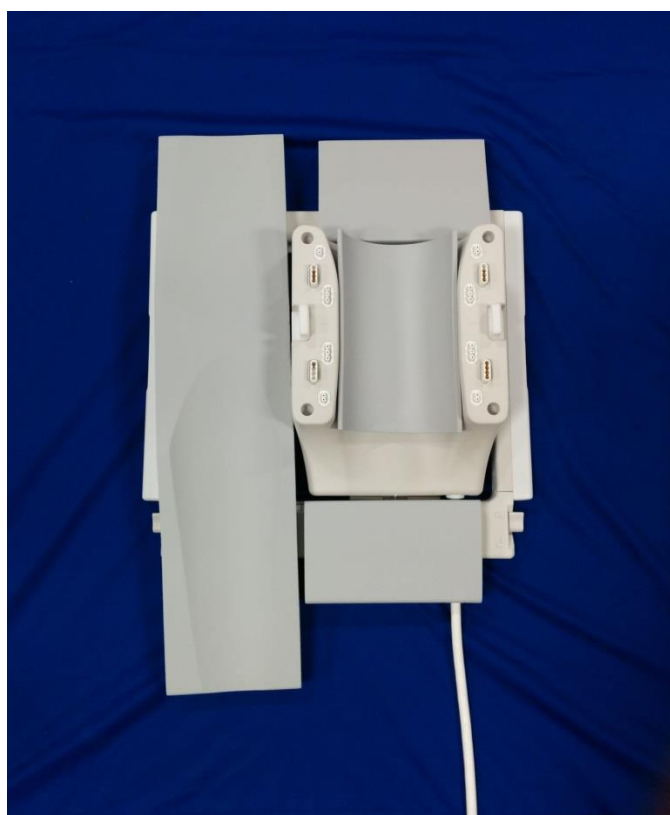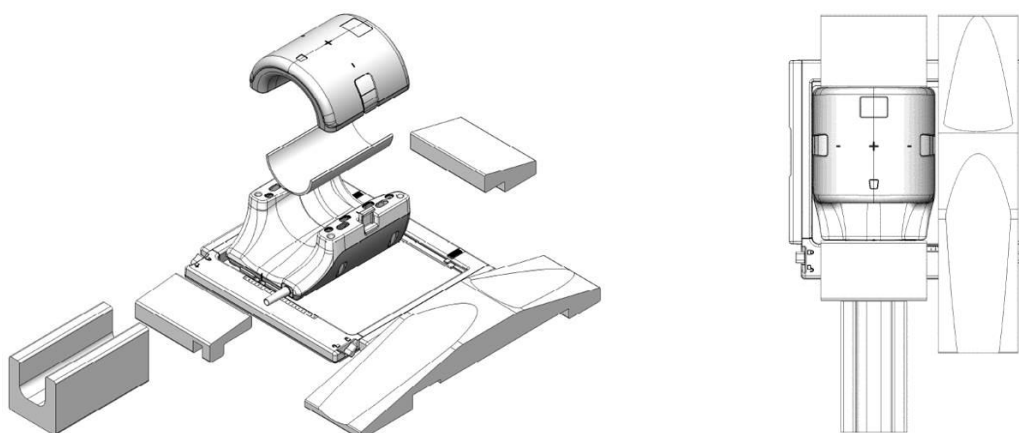

9. Placera patientens knä i den undre delen av spolen. Lämpliga kuddar ska användas för att immobilisera knäet och göra det bekvämt för patienten.





Lås spolen

10. Stäng spolen. Var försiktig så att du inte klämmer patienten, kläderna, eller sängkläderna mellan spolens båda halvor. Det kan leda till dålig bildkvalitet och eventuellt skada spolen.

Spolen kan endast stängas om de båda halvorna placeras på rätt håll.





11. När den övre halvan är helt stängd trycker du ner låstapparna på båda sidor mot spolens yttersida för att stänga de mekaniska låsen. Om låstapparna inte är helt stängda kan spolen lossna under skanningen och de båda halvorna kan helt eller delvis förlora kontakten med varandra. Detta leder till dålig bildkvalitet eller skador på spolen.

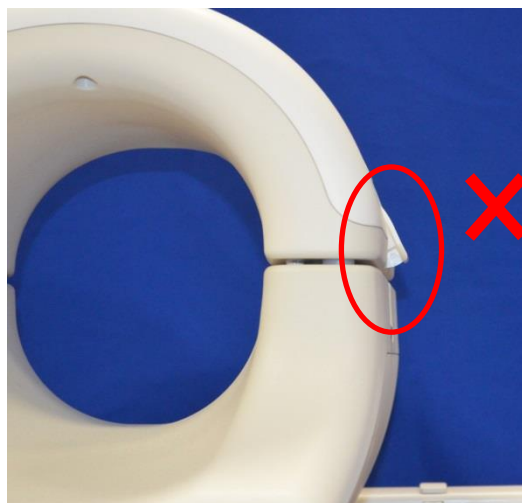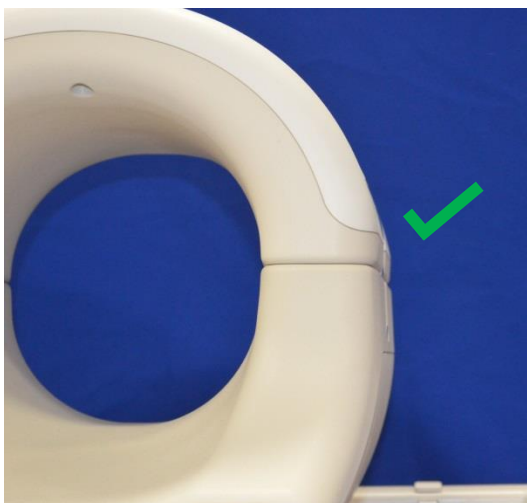

Försiktighet: Placera inte fingrarna under låstappen. Låstapparna får endast hållas som bilden ovan visar.

Inriktning av spolen

12. För in patienten i magneten och rikta in spolen med hjälp av referensmärkena på ovensidan av 18ch T/R-knäspolen.

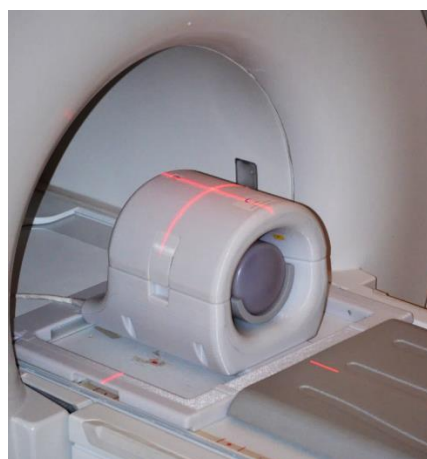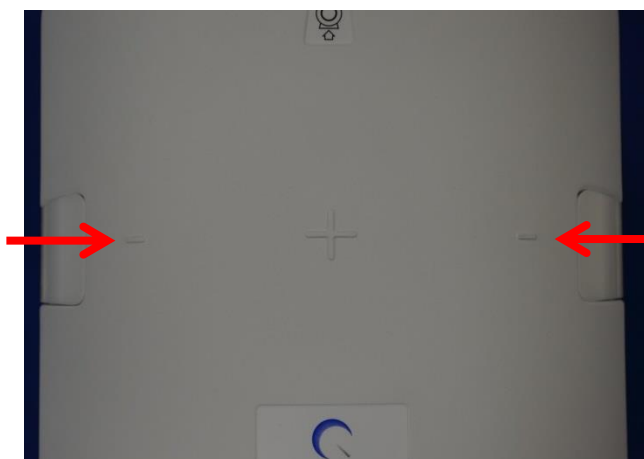

Kapitel 6 – Rengöring, underhåll, service och bortskaffning

Rengöring av RF-spolen



Försiktighet: Håll inte rengöringsvätska direkt på spolen eller tillbehören.



Försiktighet: Sterilisera inte spolen eller tillbehören.

RF-spolen och kuddarna måste efter varje användning rengöras på följande sätt:

1. Koppla bort RF-spolen från magnetkameran innan spolen rengörs.
2. Torka av orenheter på spolens yta med en torr trasa. Om det är svårt att få den ren, rengör med de procedurer som beskrivs nedan.
3. Torka av med en trasa som fuktats med en lösning av 10 % klorin och 90 % kranvatten, eller 70 % etanol och 30 % kranvatten.
4. Om spolen behöver återsändas till GE Healthcare för service ska den torkas av med 10-procentig klorinlösning (beskrivs ovan) för att minska risken för överföring av smittämnen.
5. Allt material som använts för att rengöra spolen och kuddarna ska kasseras i enlighet med alla federala, statliga och lokala bestämmelser.

Desinfektion

Om RF-spolen eller patientkuddarna måste desinficeras, ska de först rengöras som ovan varefter följande steg utförs:

Före desinfektion:

1. Vät alla ytor med CaviCide (använd sprayflaska eller våtservetter för vissa ytor, t.ex. nära elektriska kontakter). Alla ytor ska vara synligt våta under minst 30 sekunder.
2. Använd mjuk nylonborste och/eller fler våtservetter för rengöring/desinfektion för att lösgöra stelnat eller hårt fastsittande smuts eller biologiskt material. Använd mer rengörings-/desinfektionsmedel (sprayflaska eller våtservetter för vissa ytor, t.ex. nära elektriska kontakter) på ytor som tidigare borstats eller torkats av. Dessa tidigare borstade eller avtorkade ytor ska vara synligt våta av rengörings-/desinfektionsmedel i minst 30 sekunder.
3. Torka ytorna med rena pappershanddukar för att avlägsna smuts.
4. Kasta alla borstar, använd rengörings-/desinfektionsservetter och pappershanddukar.
5. Upprepa steg 1 till och med 4.
6. Om ytan fortfarande inte är ren upprepas stegen "Före desinfektion".

Desinfektion:

7. Applicera CaviCide (med sprayflaska eller våtservetter för vissa ytor, t.ex. nära elektriska kontakter) direkt på de förrengjorda ytorna. Se till att alla ytor våtes och förblir våta i minst två (2) minuter.
8. Torka med rena pappershanddukar för att få bort rester av rengörings-/desinfektionsmedel.
9. Kasta använda rengörings-/desinfektionsservetter och använda pappershanddukar.

Låt spolen och tillbehören torka före användning.

Underhåll

RF-spolen behöver inget regelbundet underhåll.

Service

Kontakta din GE-representant om du har frågor om service av RF-spolen.

Bortskaffning

Kontakta din GE-representant om du har frågor om retur eller bortskaffning av RF-spolen.

DENNA SIDA HAR AVSIKTLIGT LÄMNATS TOM

Tillverkare:

Quality Electrodynamics, LLC. (QED)
700 Beta Drive, Suite 100
Mayfield Village, OH 44143
U.S.A.
www.qualityelectrodynamics.com

Återförsäljare:

GE Medical Systems, LLC

Importör för Turkiet:

GE Medical Systems Turkey Ltd.
Sti. Esentepe Mah. Harman Sok. No: 8
34394 Sisli – Istanbul, Turkiet