

# 操作员手册



## 16ch T/R 手腕线圈

适用于 GE 1.5T 和 3.0T MRI 系统



**REF** 型号:

| GE                                    | QED                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 5768098-2 (1.5T)<br>/5561531-2 (3.0T) | Q7000180 (1.5T) /<br>Q7000152 (3.0T) |

## 保证和责任

产品交付后，维护和管理产品的责任由购买该产品的客户承担。即使在保修期内，保修也不涵盖以下几种情况：

- 因误用或滥用造成的损坏或损失。
- 火灾、地震、洪水、雷电等不可抗力造成的损坏或损失。
- 未能满足该设备指定条件造成的损坏或损失，例如电力供应不足、安装不当或环境条件不适宜。
- 因更改或修改产品造成的损坏。

在任何情况下，QED 对于以下情况都不承担任何责任：

- 由未获得 QED 明确授权的人员执行重新放置、修改或维修操作造成的损失或问题。
- 由于疏忽或无视本手册中所述警惕事项和操作说明造成的损坏或损失。


## 运输和存储条件

注意：该设备应在以下条件下运输和存储：

1. 环境温度范围在  $-40^{\circ}\text{C}$  到  $+70^{\circ}\text{C}$
2. 相对湿度范围在 10% 到 100%
3. 大气压力范围在 50 kPa 到 106 kPa



欧洲的授权代表：

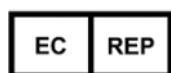

EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

## 美国联邦法律

**警告：**根据联邦法律的限制，该设备的销售、分发和使用需由医师进行或遵医嘱。根据联邦法律的限制，该设备仅限非“适应症声明”所含适应症之临床使用。

发布日期：2020-06

## 简介

本手册包含有关安全措施以及使用和护理 1.5T 16ch T/R 手腕线圈（5768098-2）和 3.0T 16ch T/R 手腕线圈（5561531-2）的详细信息。鉴于产品使用的安全性和准确性，请在操作产品之前仔细阅读本手册和 MRI 系统操作手册。本手册不含非 QED 提供设备的说明或安全信息。有关非 QED 设备的信息，请咨询原设备制造商。

## 兼容性

1.5T 16ch T/R 手腕线圈兼容 GE 1.5T MRI 系统，而 3.0T 16ch T/R 手腕线圈兼容 GE 3.0T MRI 系统。

## 用户简介

操作员 - 放射技师、实验室技师、医师（注意，并非相关国家/地区的所有适用法律都需遵循）。

用户培训 - 使用此线圈无需参加特殊培训（但是，GE 会提供 MRI 系统的综合性培训课程，以指导操作员正确使用 MRI 系统）。

## 患者信息

年龄、健康、状况 - 无特殊限制


体重 - 250 千克（550 磅）或以下（查询 MRI 系统的操作手册，如果该系统允许的最大患者体重低于线圈的体重限制，则必须以系统的最大体重为准）。

# 目录

|              |    |
|--------------|----|
| 1. 前言        | 1  |
| 2. 第一章 绪论    | 2  |
| 3. 第二章 基础理论  | 3  |
| 4. 第三章 实验方法  | 4  |
| 5. 第四章 结果与讨论 | 5  |
| 6. 第五章 结论    | 6  |
| 7. 参考文献      | 7  |
| 8. 附录        | 8  |
| 9. 索引        | 9  |
| 10. 致谢       | 10 |

## 第 1 章 - 16ch T/R 手腕线圈组件

16ch T/R 手腕线圈附有以下所示部件。收到产品后，请确保交付货物中包括所有的部件。

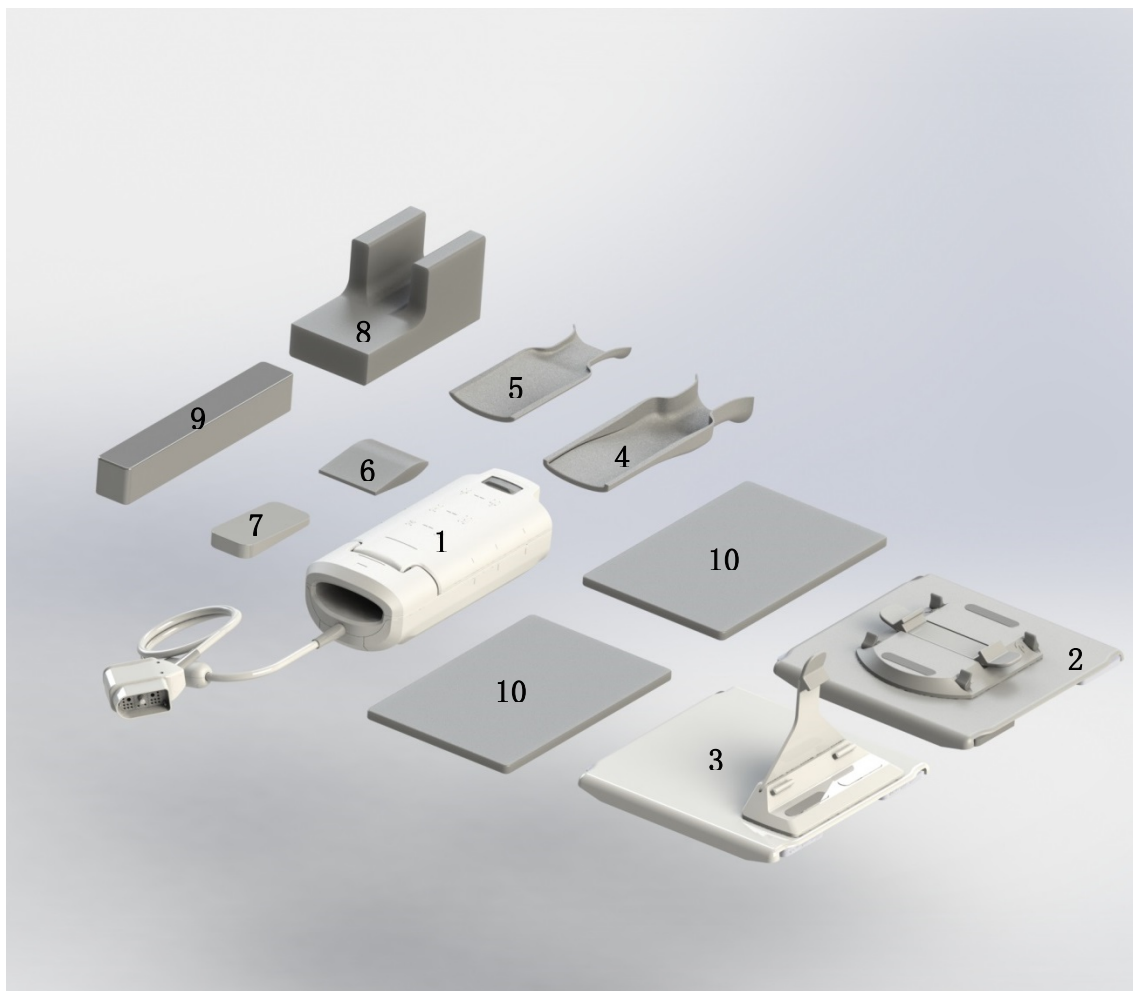

| 项目号 | 描述                          | 数量 | GE 部件号                                        | QED 部件号                                     |
|-----|-----------------------------|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1   | 16ch T/R 手腕线圈               | 1  | 5768098-2<br>(1.5T) / 5<br>561531-2<br>(3.0T) | Q7000180<br>(1.5T) / Q<br>7000152<br>(3.0T) |
| 2   | 16ch T/R 手腕线圈 - 水平基板        | 1  | 5561531-4                                     | 2001768                                     |
| 3   | 16ch T/R 手腕线圈 - 侧装基板        | 1  | 5561531-5                                     | 2001769                                     |
| 4   | 16ch T/R 手腕线圈 - 后部衬垫        | 1  | 5561531-6                                     | 3004567                                     |
| 5   | 16ch T/R 手腕线圈 - 前部衬片/模体放置衬垫 | 1  | 5561531-7                                     | 3004566                                     |
| 6   | 16ch T/R 手腕线圈 - 手掌衬垫        | 1  | 5561531-15                                    | 3004964                                     |
| 7   | 16ch T/R 手腕线圈 - 楔形衬垫        | 1  | 5561531-8                                     | 3004751                                     |
| 8   | 16ch T/R 手腕线圈 - 肘部/手臂衬垫     | 1  | 5561531-9                                     | 3004607                                     |
| 9   | 16ch T/R 手腕线圈 - 手腕线圈填充衬垫    | 1  | 5561531-10                                    | 3004716                                     |
| 10  | 16ch T/R 手腕线圈 - 侧装基垫        | 2  | 5561531-11                                    | 3004612                                     |

线圈重量：3.9 千克（8.5 磅）

## 第 2 章 - 安全

本节介绍了常规警惕事项和使用线圈时必须注意的安全信息。

 使用 MRI 系统时，还需参阅 MRI 系统操作手册中介绍的禁忌症、警惕事项及其他安全信息。

### 符号

| 符号                                                                                  | 编号      | 标准                         | 标题, 含义                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 0434A   | ISO 7000<br>IEC 60417      | 注意, 操作设备和/或处理需要操作员格外留心或采取措施的所述情形时, 需要特别注意, 以免产生不良后果                                                                     |
|    | 1641    | ISO 7000<br>IEC 60417      | 操作员手册, 查询操作说明, 然后再操作设备                                                                                                  |
|    | 5. 4. 3 | ISO 15223-1                | 操作员手册, 查询电子操作说明, 然后再操作设备                                                                                                |
|    | 5172    | ISO 7000<br>IEC 60417      | II 类设备                                                                                                                  |
|    | 5333    | ISO 7000<br>IEC 60417      | BF 型应用部分                                                                                                                |
|    | 3082    | ISO 7000<br>IEC 60417      | 制造商                                                                                                                     |
|    | 2497    | ISO 7000<br>IEC 60417      | 制造日期                                                                                                                    |
|    | 6192    | ISO 7000<br>IEC 60417      | 射频线圈, 发射和接收                                                                                                             |
|   | 5. 1. 2 | ISO 15223-1                | 欧盟授权代表                                                                                                                  |
|  | 2493    | ISO 7000<br>IEC 60417      | 目录号                                                                                                                     |
|  | 2498    | ISO 7000<br>IEC 60417      | 序列号                                                                                                                     |
|  | 不适用     | 不适用                        | ETL 已列入 (加拿大和美国)                                                                                                        |
|  | 0632    | ISO 7000<br>IEC 60417      | 温度限制                                                                                                                    |
|  | 2620    | ISO 7000<br>IEC 60417      | 湿度限制                                                                                                                    |
|  | 2621    | ISO 7000<br>IEC 60417      | 气压限制                                                                                                                    |
|  | W017    | ISO 24409-2<br>ISO 8528-13 | 警告; 表面高温                                                                                                                |
|  | 不适用     | EN50419<br>EU2012/18/EU    | 使用此符号表示本产品不应作为家庭垃圾进行处理。<br>确保正确处理本产品, 有助于避免对环境和人类健康造成潜在的不良后果, 因本产品废料处理不当也可能造成此结果。<br>如需有关退还和回收本产品的更多详细信息, 请咨询您购买产品的供应商。 |



## 适应症

1.5T 16ch T/R 手腕线圈旨在与 GE 1.5T MR 系统结合使用，而 3.0T 16ch T/R 手腕线圈旨在与 GE 3.0T MR 系统结合使用，生成可以让受过培训的医师解读的手部或手腕诊断图像。

## 禁忌症



无。

## 警惕

-  癫痫或幽闭恐惧症发病可能性较高的患者
-  失去意识、深度昏迷或处于精神混乱状态的患者
-  无法进行可靠交流的患者（例如婴儿或幼儿）
-  任何身体部位丧失感觉的患者
-  难以调节体温或对于体温升高特别敏感的患者（例如发烧、心力衰竭或排汗功能受损的患者）

## 警告 - 射频线圈

- ⚠ 切勿在扫描期间将任何断开连接的设备（射频线圈、线缆等）放入扫描架中。
- ⚠ 只能将指定的射频线圈连接到射频线圈链接端口。
- ⚠ 切勿使用有缺陷的射频线圈，尤其是外壳已有损坏或金属部件外露的线圈。
- ⚠ 切勿尝试更改或修改线圈。
- ⚠ 切勿使线圈线缆交叉或循环。
- ⚠ 确保患者不会直接接触线圈线缆。
- ⚠ 切勿让患者的任何身体部位形成循环。使用衬垫确保患者的手和腿不会接触线圈、MRI 系统、患者床或其他可能形成循环的身体部位。

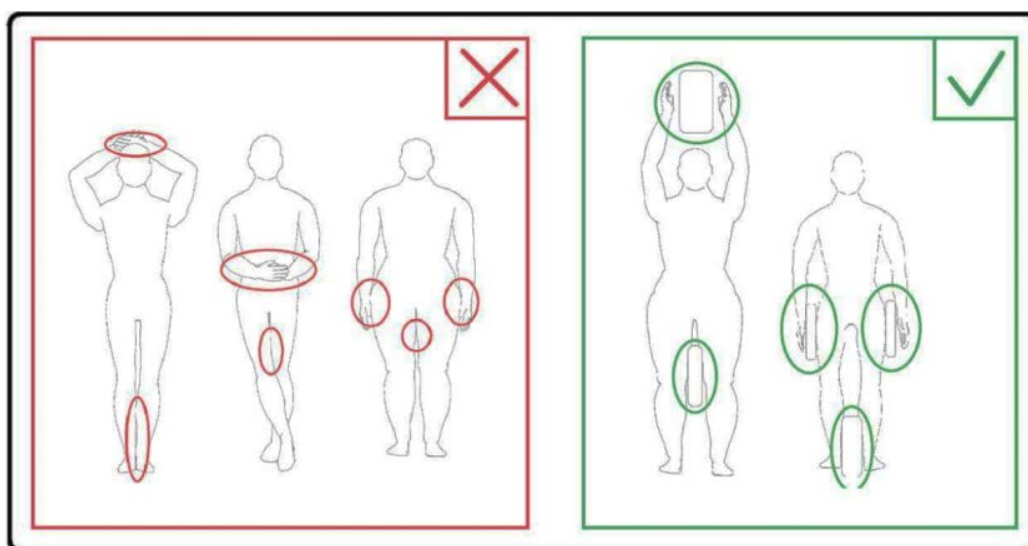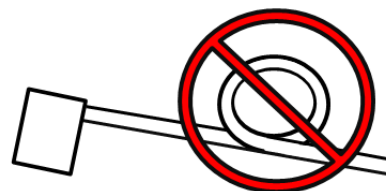

- ⚠ 切勿让患者或射频线圈接触 MRI 系统的任何部件。如有需要，使用衬垫分离患者和空腔。
- ⚠ 如果患者主诉有发热、发麻、刺痛或类似感觉，应立即停止扫描。先联系医师，然后再继续扫描。
- ⚠ 确保线圈不会接触液体，例如水或药剂。
- ⚠ 如果发现线圈存在缺陷，请立即停止使用线圈并联系 GE 代表。
- ⚠ 只有本手册中介绍的配件可以与线圈结合使用。

## 应急程序

扫描期间如果出现紧急情况，应立即停止扫描，将患者移出房间并根据需要寻求医疗救助。

如果发生严重事件，应将其报告给制造商以及此用户设施所在成员国的主管当局。

## 第 3 章 - TR 端口位置

### TR 端口位置

16ch T/R 手腕线圈是发射和接收线圈。要正常使用线圈，应确保系统界面连接器连接到系统上的 P 端口。查看系统用户手册，找到支持发射和接收的端口（P1 位于 60 cm/70 cm 曲面台或可拆卸台上，P2 位于 70 cm 固定台系统上）。

## 第 4 章 - 质量保证

### 扫描仪认证

执行系统级信噪比（SNR）测试。参阅服务方法 CD；系统级程序；功能性检查；信噪比（SNR）测试。

### 信噪比（SNR）测试

#### 需要工具/夹具

| 描述                          | GE 部件号    | QED 部件号 | 数量 |
|-----------------------------|-----------|---------|----|
| 1.5T 统一立方模体                 | 5342681   | 不适用     | 1  |
| 16ch T/R 手腕线圈 - 水平基板        | 5561531-4 | 2001768 | 1  |
| 16ch T/R 手腕线圈 - 前部衬片/模体放置衬垫 | 5561531-7 | 3004566 | 1  |

#### 线圈和模体的设置

1. 记录所使用线圈的序列号以及软件内部版本（来自 testrecord 或 getver）。
2. 移除支架中的其他表面线圈（如果存在）。



3. 将线圈转移到患者支架上。确保用两只手抓住基座上的把手来运送线圈。



4. 将线圈放在患者支架上。请注意，下图绘制的空腔方向箭头应**指向空腔**。



5. 如需避免循环，使用系统线缆随附的线缆布线夹排布多余的线缆，如下所示。

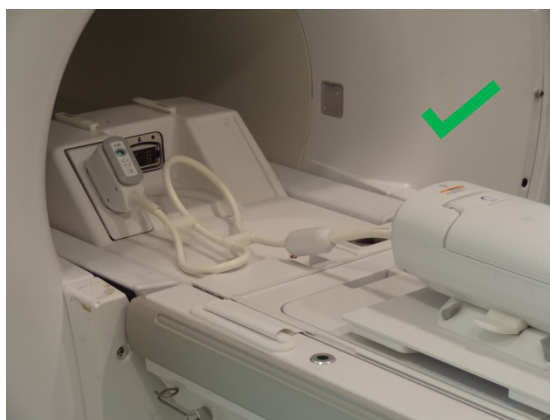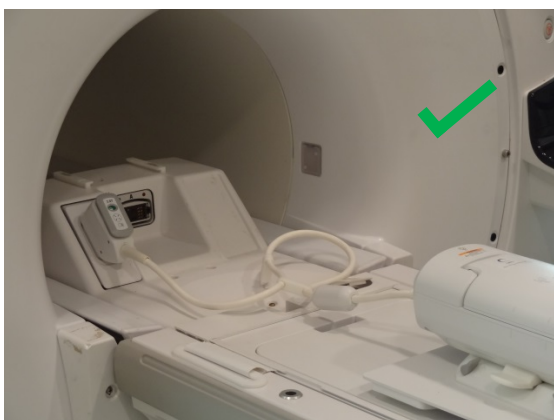


切勿使线圈线缆交叉或循环。



确保患者不会直接接触线圈线缆。

- 将线圈连接器链接到系统相应的发射端口（P1 位于 60 cm/70 cm 曲面台或可拆卸台上，P2 位于 70 cm 固定台系统上）。转动 P-端口连接器的末端，使其呈现出“锁定”位置，参见右侧图片。

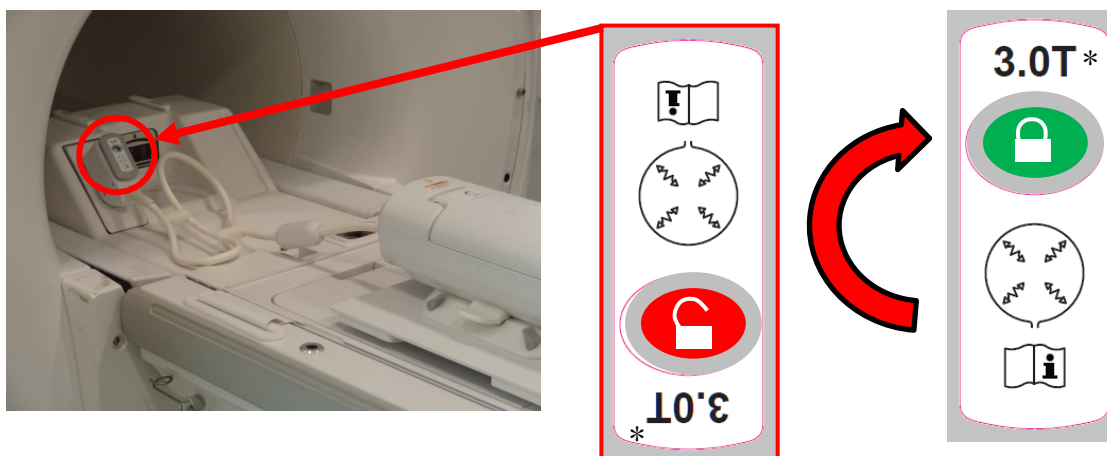


\*: 仅供参考，可同时适用于 1.5T 和 3.0T。

- 将线圈标记对准以下所示的中心标记（手/腕模式）处。如果需要调整线圈，应旋转旋钮以进入解锁位置（如下所示），然后实现所需的对齐。再次旋转旋钮以进入锁定位置，在线圈到达所需位置后将线圈固定。







## 解锁

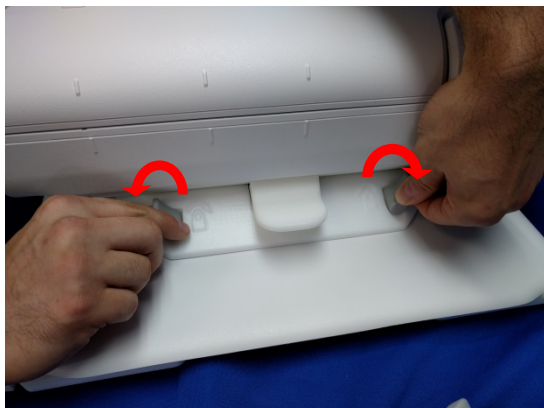

## 锁定

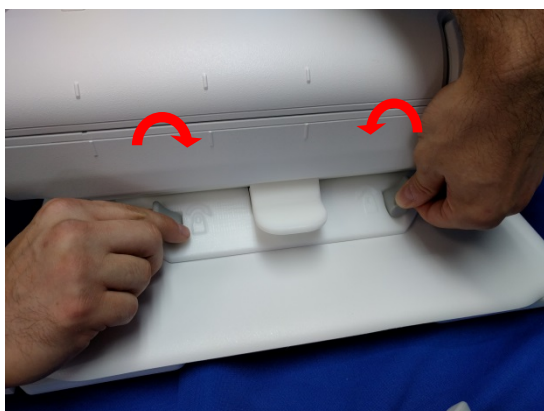

8. 通过向前滑动门锁并从前部拔出，打开线圈。

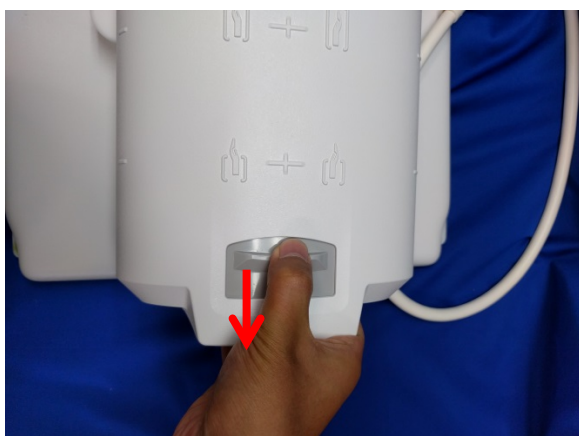

9. 将前部衬垫（3004566）放在线圈前部上。





10. 将统一立方模体（5342681）放入线圈中，如下所示。确保模体的底边与线圈上的 F0V 标记对齐。







11. 关闭线圈，确保前部门锁释放卡入到位。

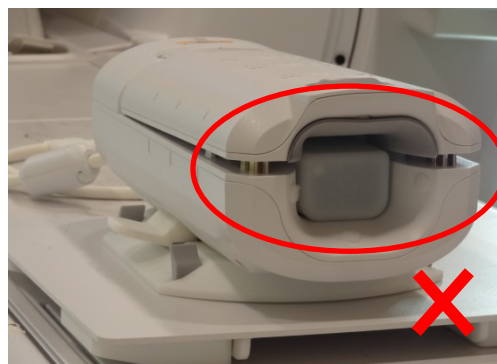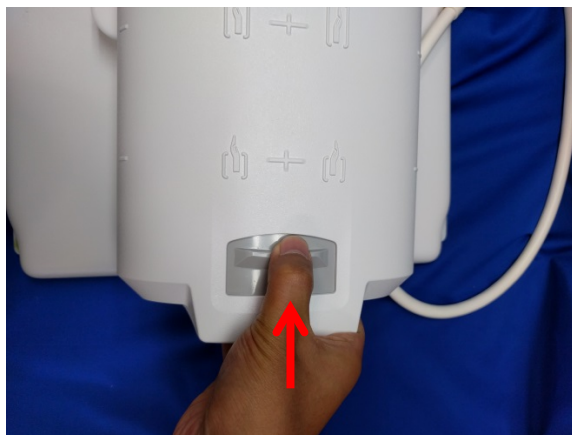

12. 再次确认线圈标记对准以下所示的正中央的标记处，然后将线圈移动到等中心。

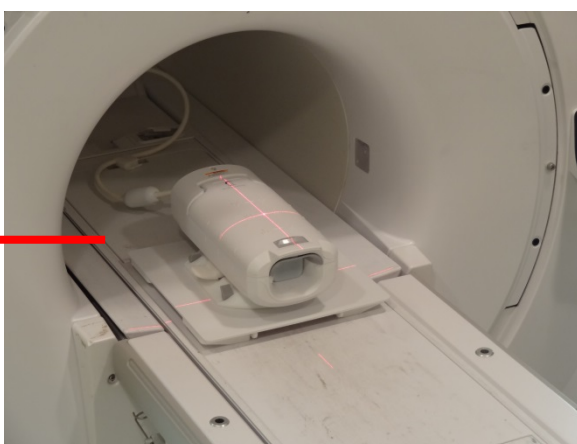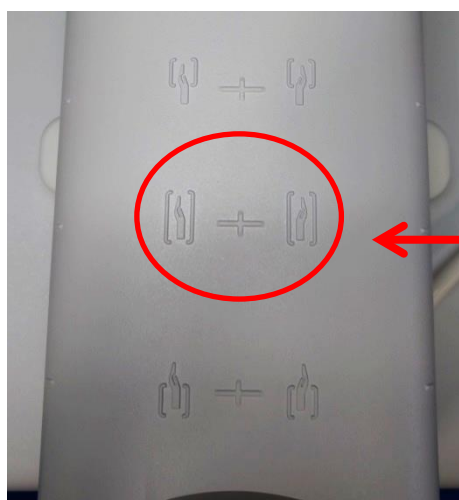

## 多线圈质量保证 (MCQA) 工具

射频线圈的所有相关测试都必须在准确校准的系统上运行。应满足 EPIWP（按规格安装的白色像素）。

| 测试 ID | 参数说明          | 预期结果     |
|-------|---------------|----------|
| 1     | EPIWP in spec | PASS（通过） |

要启动 MCQA：

1. 在 Common Service Desktop (CSD)（通用服务桌面 (CSD)）中，转到 Service Browser（服务浏览器）并选择 [Image Quality]（图像质量）、"Multi-Coil QA Tool"（多

线圈 QA 工具)，然后 "Click here to start this tool"（单击此处开始使用此工具），如图 1 所示。

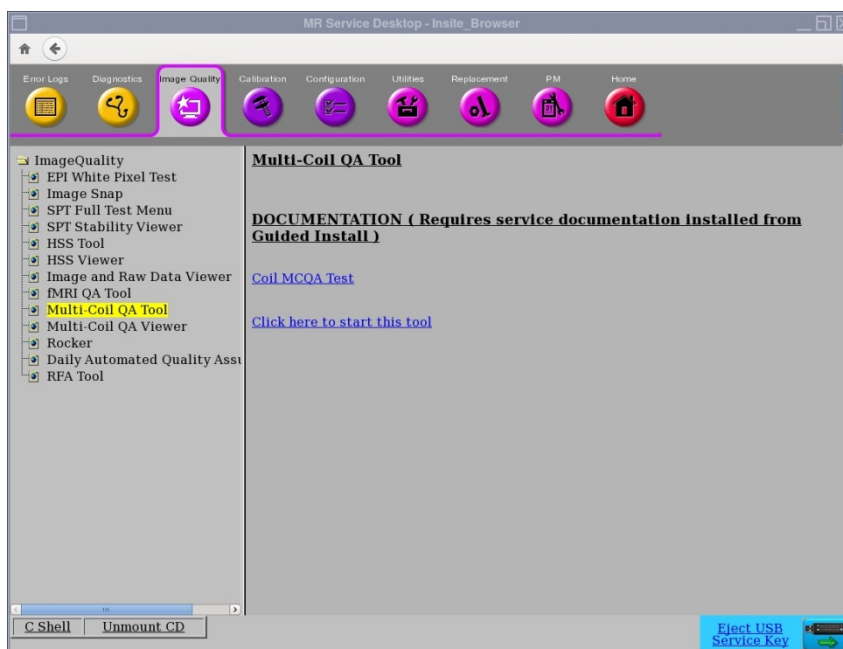


图 1

**注意：**如果弹出 "No valid MCR-V (or MCR2/3)"（无有效的 MCR-V（或 MCR2/3））警告消息（图 2），选择 [Yes]（是）并继续测试。将系统交给客户之前，必须运行 MCR-V 诊断。

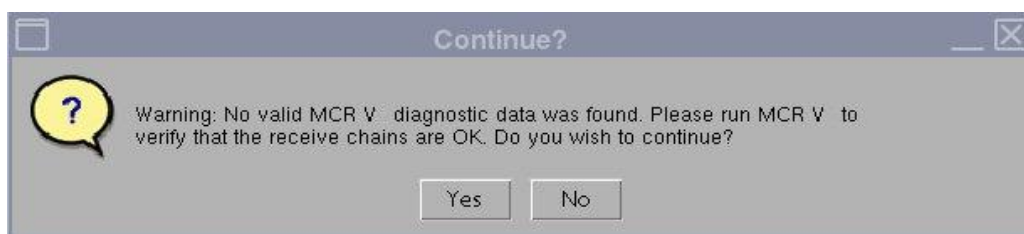


图 2

当前线圈字段将会自动填写（图 3），基于连接 LPCA 的线圈的线圈 ID。在 [Coil Serial #]（线圈序列号）字段中输入正在测试的线圈的序列号。

2. 单击 **[Start]**（开始）以开始自动测试，如图 3 所示。根据测试位置的数量（线圈的复杂性），该测试可能需要 3 到 5 分钟。

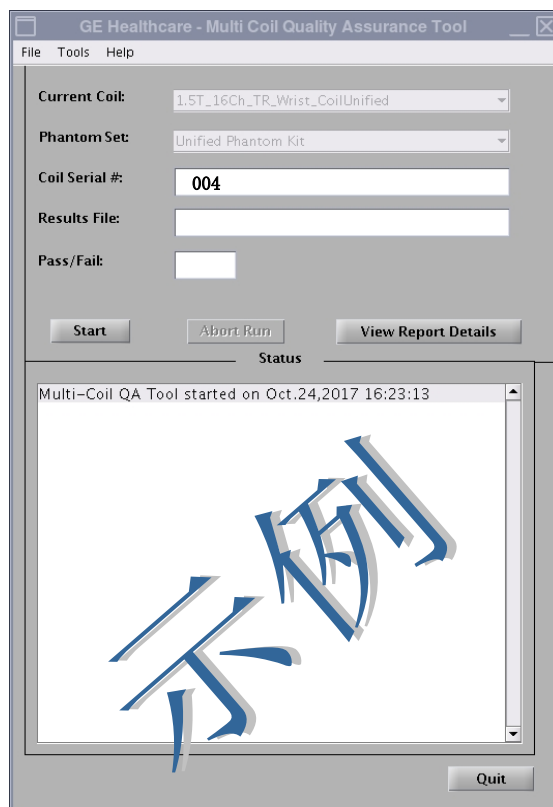


图 3

3. 启动之后，将会出现写着 "Phantom placement and coil landmarking are critical for repeatable results"（模体更换和线圈标记对准对于可重复结果非常重要）的注释。如果已正确设立标记并且模体中没有气泡，单击 [Yes]（是）以继续。（图 4）。

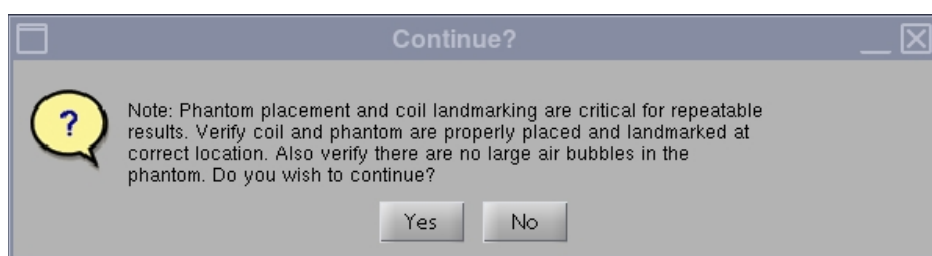


图 4

**注意：**MCQA 工具 GUI 的状态窗口会持续更新，以显示不同时间点工具执行状况的信息。将会出现时间条（图 5），显示大致的总测试时间、已用时间和完成百分比。

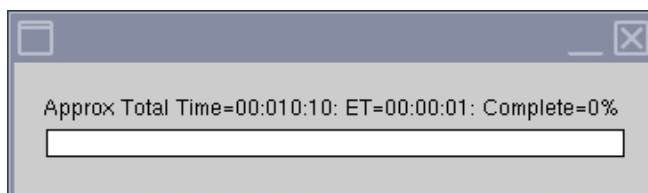


图 5

测试完成时，测试结果会显示在屏幕上（图 6）。如果所有线圈元件都可以正常工作，则 PASS/FAIL（通过/失败）状态会显示 PASS（通过）。出于以下可能原因（但不限于此），MCQA 工具 GUI 会显示 "Fail"（失败）：

- 线圈元件不佳
- 测试的模体不正确（应使用统一立方模体 5342681）
- 模体定位/放置不正确

有关 MCQA 测试的更多信息，可以在 MR 服务方法 DVD 或以下路径的网站中找到：Troubleshooting -> System -> Multi-Coil Quality Assurance Tool（疑难解答 -> 系统 -> 多线圈质量保证工具）

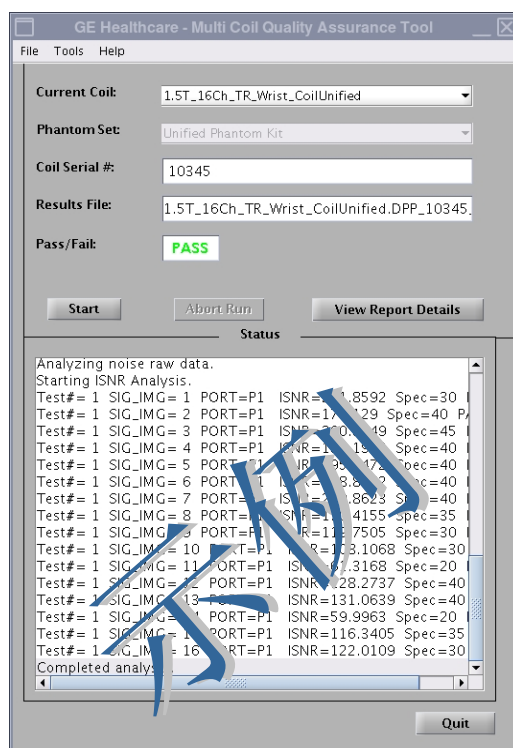


图 6

4. 单击 [Quit]（退出）按钮退出 MCQA 工具。

## 使用 MCQA 查看器

为了便于以后查看结果，请按照以下步骤操作：

1. 在 MCQA 工具窗口中，选择 File > Open > Results File（文件 > 打开 > 结果文件）并选择所需的线圈结果文件，然后选择 [View Report Details]（查看报告详情）检查结果。

**注意：**此时将打开结果查看器，如图 7 所示。工具 GUI 中显示的结果文件名称和 Pass/Fail（通过/失败）结果在查看器顶部也会列出。

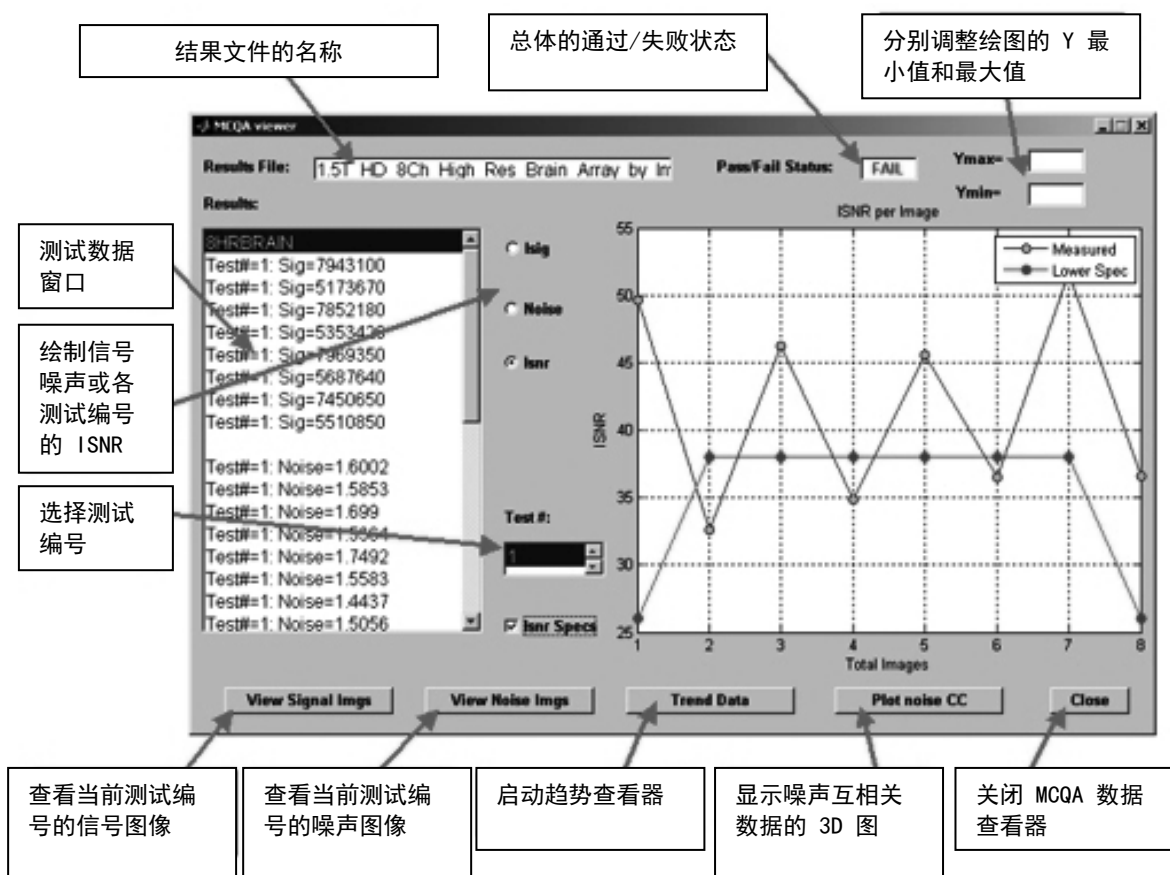


图 7

2. 在结果查看器中间部分，选中 ISNR 选项和 ISNR Specs（ISNR 规格）复选框以查看结果。

| 测试 ID | 参数说明          | 预期结果     |
|-------|---------------|----------|
| 1     | EPIWP in spec | PASS（通过） |

## 第 5 章 - 线圈的设置和使用

### 确定扫描位置

16ch T/R 手腕线圈配有两个底座，旨在从患者侧面（垂直底座）或患者头部上方（水平底座）对患者进行成像。基于患者体型、舒适性和扫描偏好，确定最佳扫描位置。

#### 水平底座



#### 垂直底座





如需切换底座，握住线圈同时稳稳地推动线圈释放杆，如下方相应的底座所示：




**注意：**患者位于线圈中时切勿切换底座。

### 水平底座



### 垂直底座

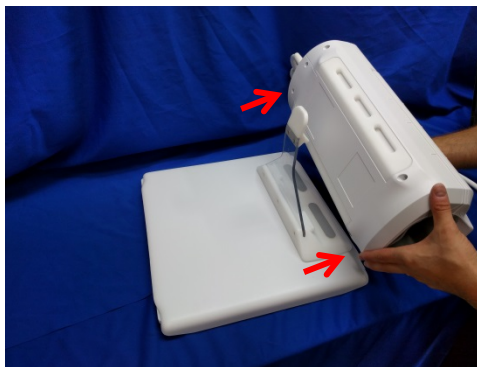




随后，通过对齐线圈并将其锁定到底座中来安装所需的底座，如下所示。

### 水平底座



### 垂直底座

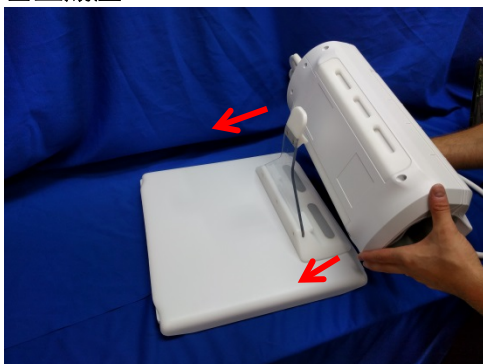


## 放置 16ch T/R 手腕线圈：水平底座

1. 移除患者支架中的其他表面线圈（如果存在）。
2. 将线圈转移到患者支架上。确保用两只手抓住基座上的把手来运送线圈。




3. 将线圈放在患者支架上。请注意，下图绘制的空腔方向箭头应指向空腔。

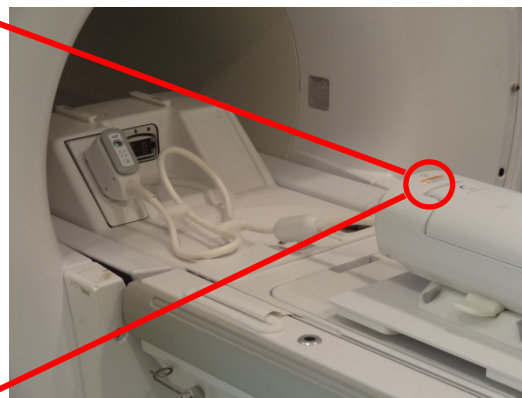

4. 如需避免环路和患者接触，使用系统线缆随附的线缆布线夹排布多余的线缆，如下所示。



5. 将线圈连接器连接到系统相应的发射端口。（参阅系统用户手册了解 TR 端口位置）转动 P 端口连接器的末端，使其呈现出“锁定”位置，参见右侧图片。

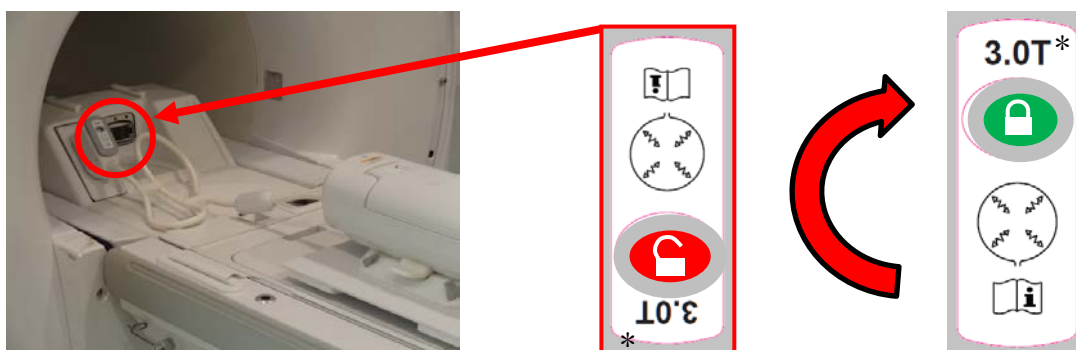


\*: 仅供参考，可同时适用于 1.5T 和 3.0T。

## 放置 16ch T/R 手腕线圈：垂直底座




16ch T/R 手腕线圈支持多个系统的跨平台兼容性。如需提供最佳的线圈和患者位置，必须相应地设置垂直底座。


1. 根据系统使用所需的位置，设置垂直底座的支脚。支脚上的标记表明了哪面应向外朝向相应的患者床。如需更改设置，稳稳地抓住以下所示的支脚，然后旋转到所需的位置。

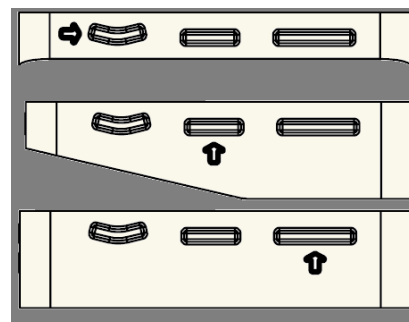

曲面台 - 60 厘米空腔


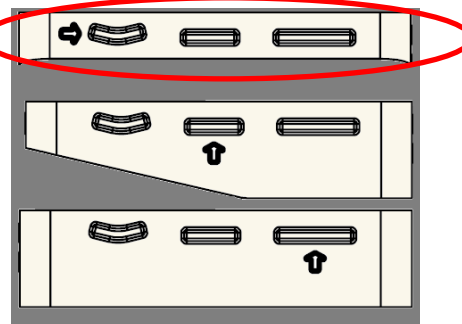


标准平面台 - 70 厘米空腔，含可拆卸台面

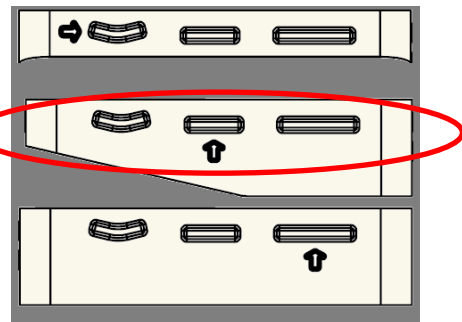




# 延伸平台 - 70 厘米空腔，含固定台面

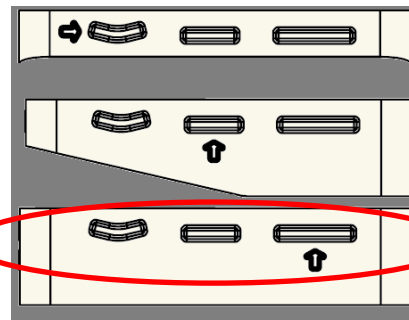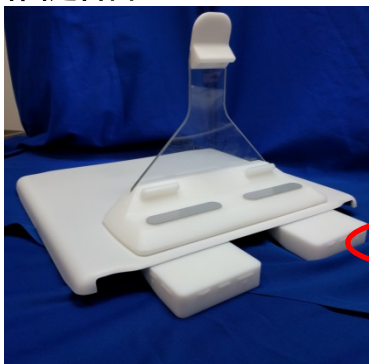


**注意：**系统底座设置有误可能会导致成像质量较差。确保垂直底座根据相应的系统进行正确设置。


2. 移除患者支架中的其他表面线圈（如果存在）。
3. 将线圈转移到患者支架上。确保用两只手抓住基座上的把手来运送线圈。

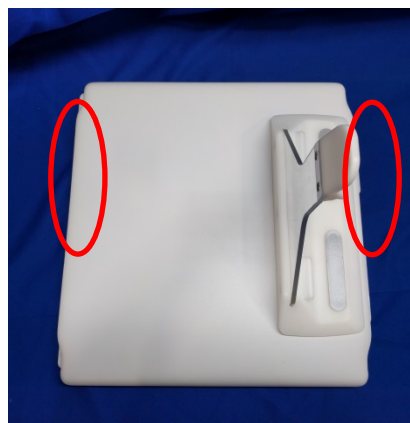

4. 将线圈放在患者支架上。请注意，下图绘制的空腔方向箭头应**指向空腔**。


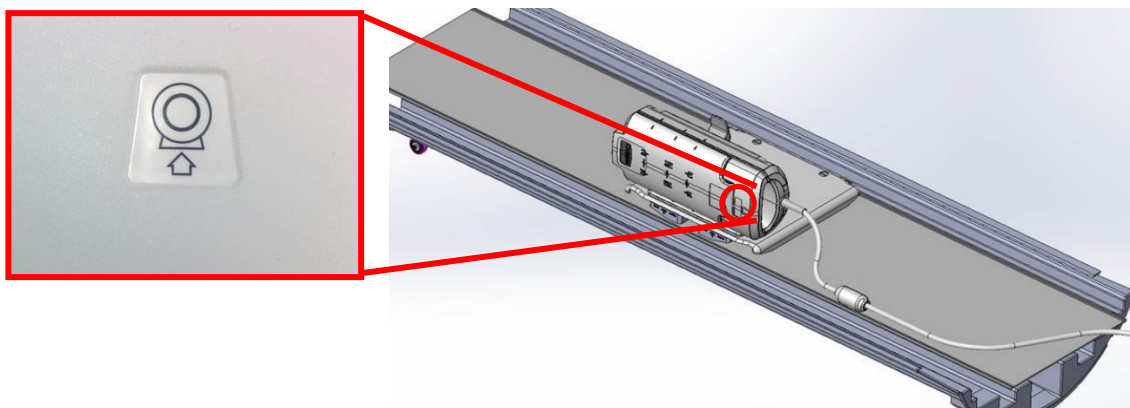


5. 将线圈连接器连接到系统相应的发射端口。（参阅系统用户手册了解 TR 端口位置）  
转动 P 端口连接器的末端，使其呈现出“锁定”位置，参见右侧图片。

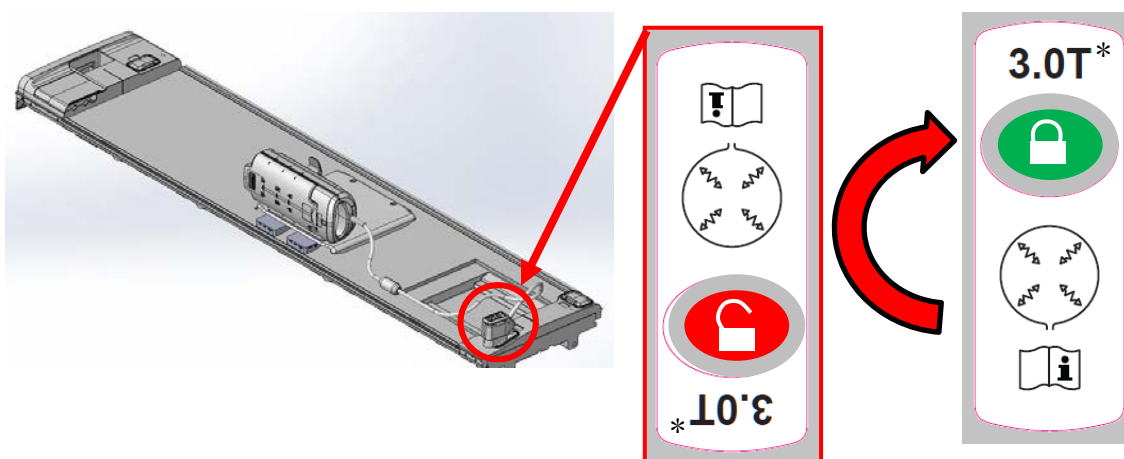

\*: 仅供参考，可同时适用于 1.5T 和 3.0T。

6. 如需避免环路和患者接触，使用系统线缆随附的线缆布线夹排布多余的线缆，如下所示。

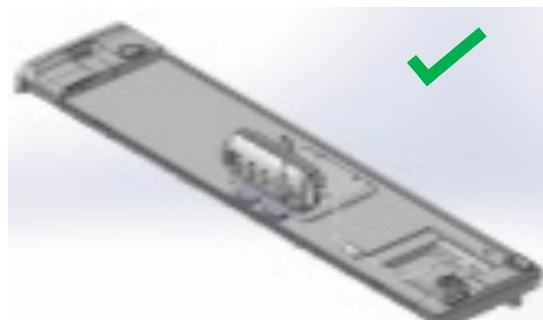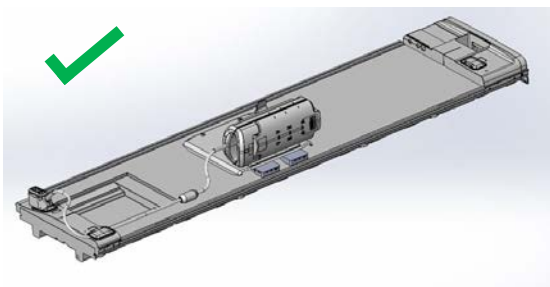




|                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | 切勿使线圈线缆交叉或循环。   |
|  | 确保患者不会直接接触线圈线缆。 |

## 衬垫配置

1. 16ch T/R 手腕线圈提供多种衬垫，以最大程度地减小运动伪影并让患者感到舒适。

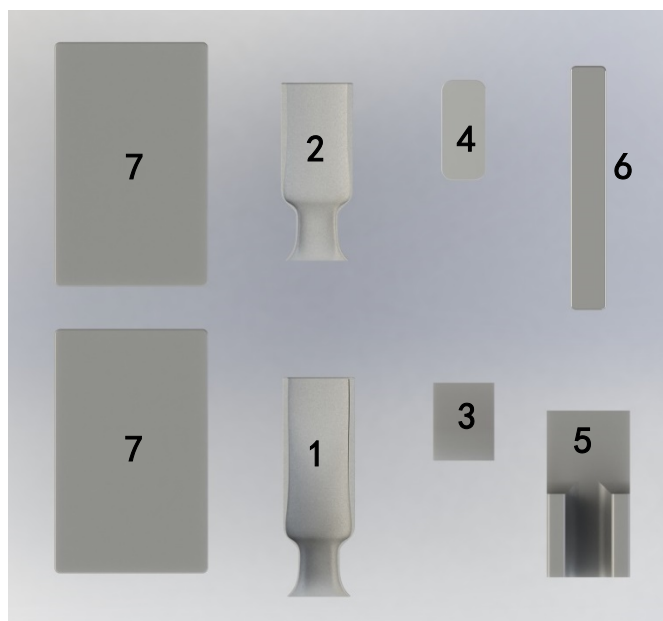





| 编号 | 说明                          | 数量 | GE 部件号     | QED 部件号 |
|----|-----------------------------|----|------------|---------|
| 1  | 16ch T/R 手腕线圈 - 后部衬垫        | 1  | 5561531-6  | 3004567 |
| 2  | 16ch T/R 手腕线圈 - 前部衬片/模体放置衬垫 | 1  | 5561531-7  | 3004566 |
| 3  | 16ch T/R 手腕线圈 - 手掌衬垫        | 1  | 5561531-15 | 3004964 |
| 4  | 16ch T/R 手腕线圈 - 楔形衬垫        | 1  | 5561531-8  | 3004751 |
| 5  | 16ch T/R 手腕线圈 - 肘部/手臂衬垫     | 1  | 5561531-9  | 3004607 |
| 6  | 16ch T/R 手腕线圈 - 手腕线圈填充衬垫    | 1  | 5561531-10 | 3004716 |
| 7  | 16ch T/R 手腕线圈 - 侧装基垫        | 2  | 5561531-11 | 3004612 |

## 放置患者：水平底座

1. 16ch T/R 手腕线圈配有多种衬垫，以便让患者感到舒适。以下是水平方向的建议布局的示例：




2. 将患者手部放于线圈中。利用线圈标记辅助放置，如下所示。如有需要，使用楔形和/或手掌衬垫固定患者的手部/手腕并确保患者舒适。

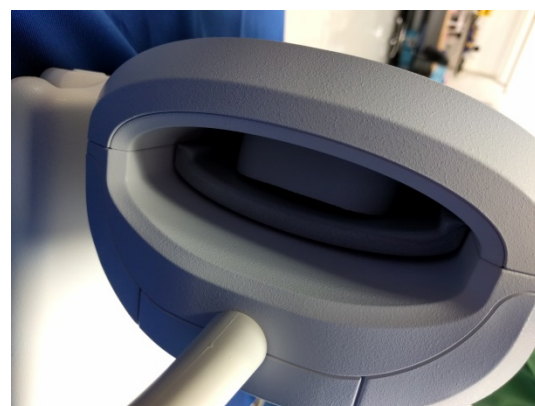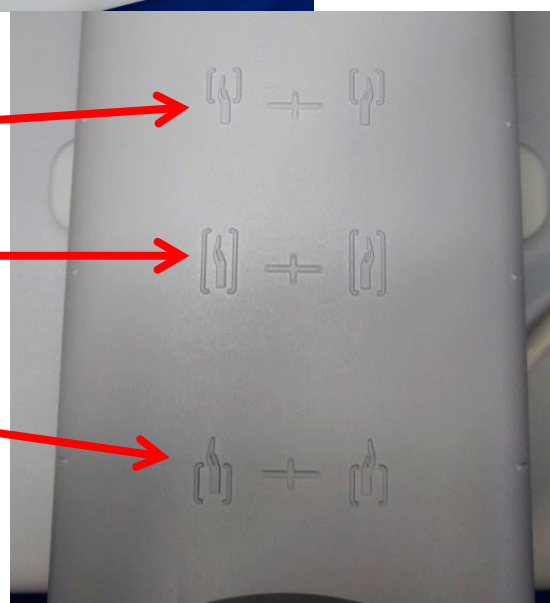


## 放置患者：垂直底座

1. 16ch T/R 手腕线圈配有多种衬垫，以便让患者感到舒适。以下是垂直方向的建议布局的示例：

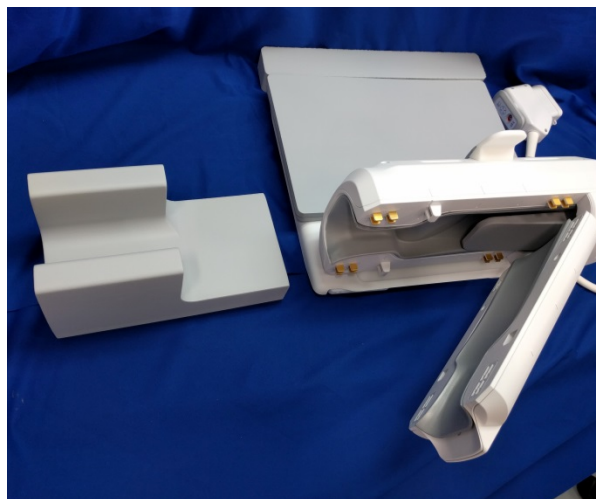

2. 将患者手部放于线圈中。利用线圈标记辅助将患者放于线圈中，如下所示。如有需要，使用楔形和/或手掌衬垫固定患者的手部/手腕并确保患者舒适。





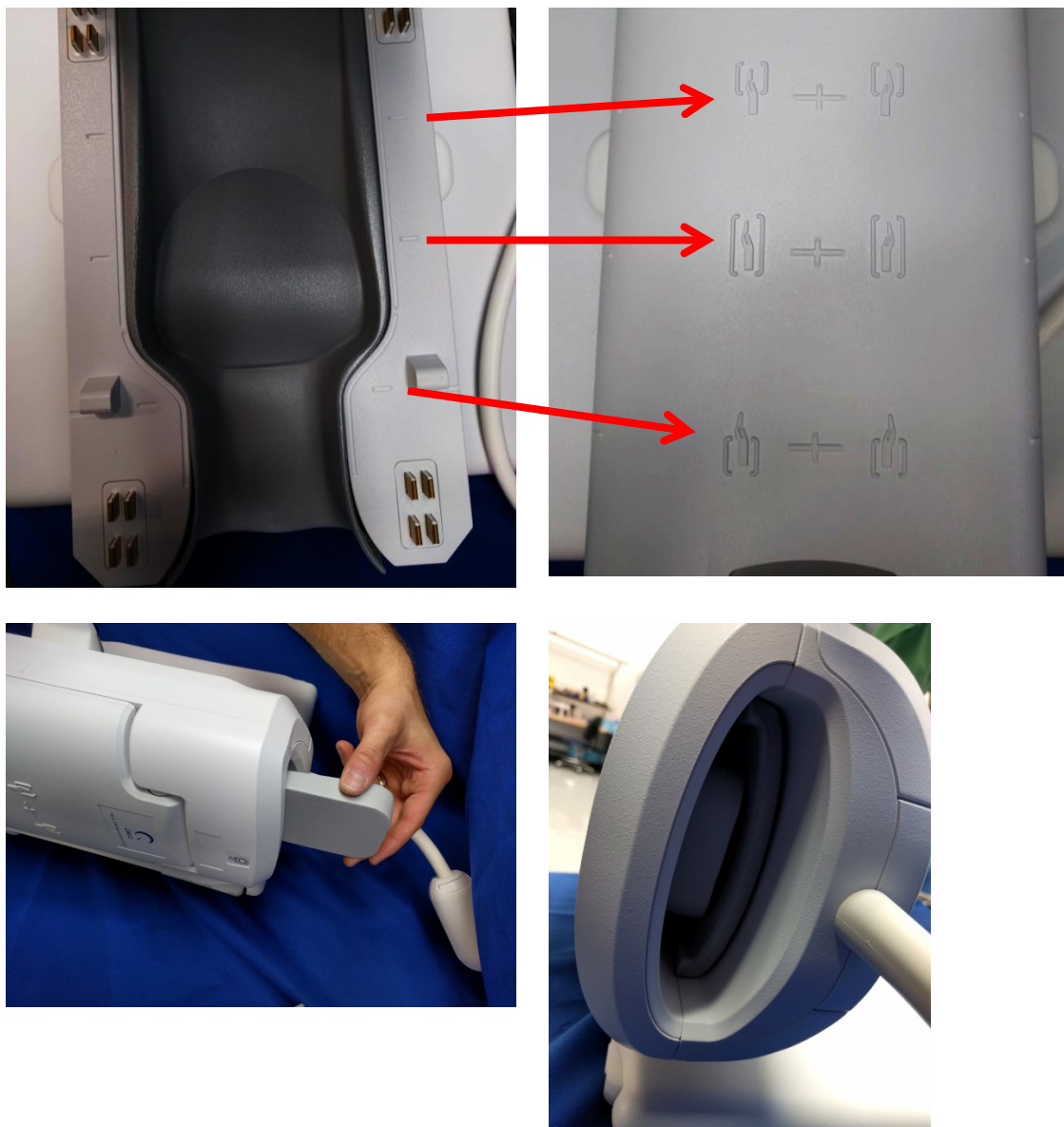



## 锁定线圈

1. 关闭线圈，确保两个半节线圈不会夹挤到患者或者夹入外衣或垫底材料。否则会导致患者受伤、成像质量较差，并有可能损坏线圈。向下推动线圈的前半节，直到“卡入”到位。

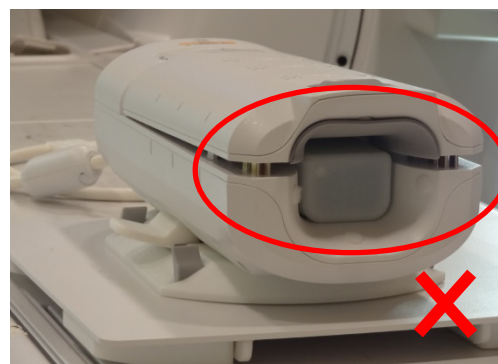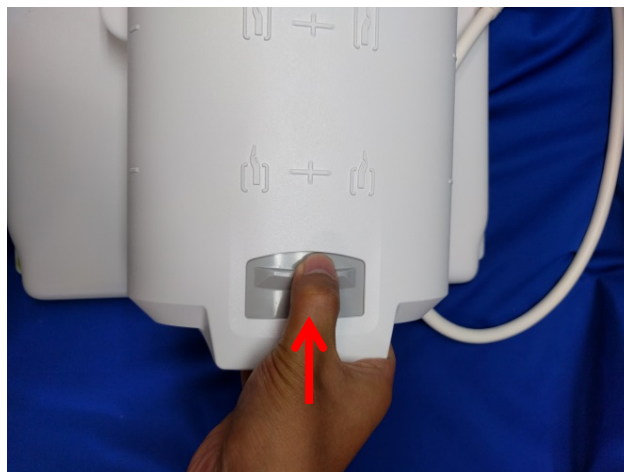

## 标记

1. 16ch T/R 手腕线圈有以下 3 处标记。这些对应着三种不同的线圈模式：仅限手部（8 通道模式）、手部/手腕（16 通道模式）以及仅限手腕（8 通道模式）。根据所需的目標身体部位，选择标记。




仅限手部模式



手部/手腕模式




仅限手腕模式

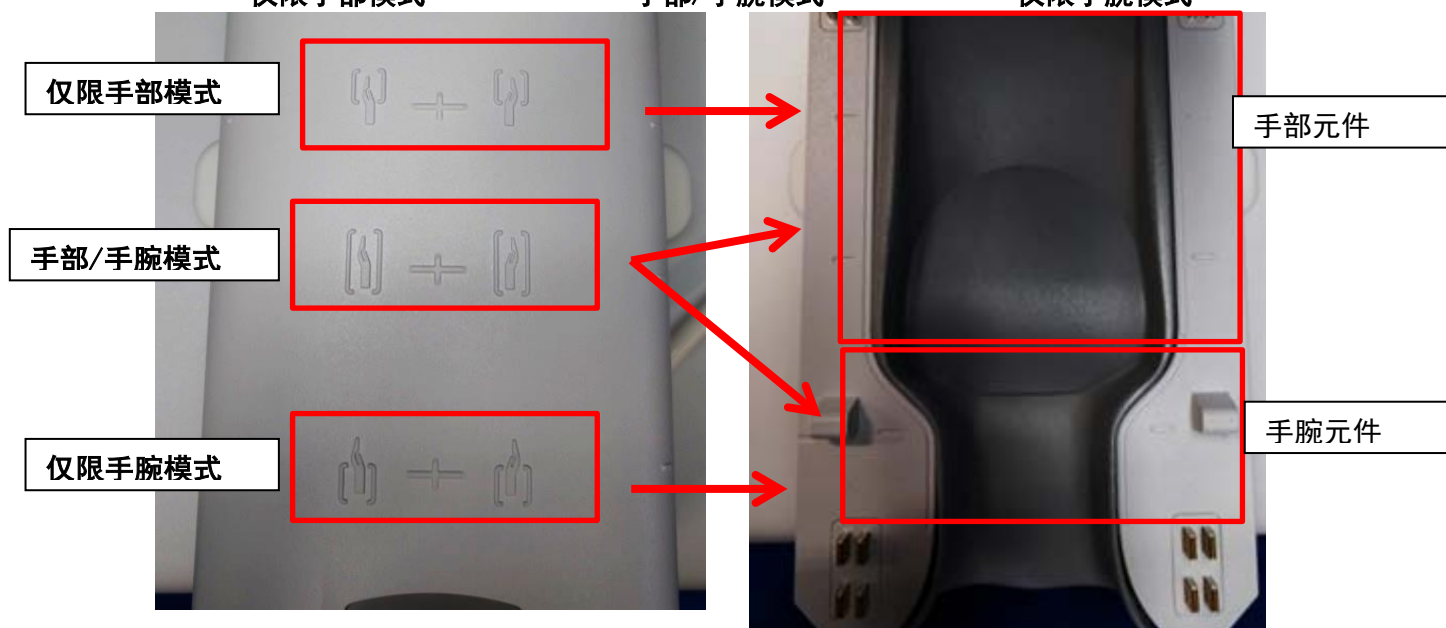



2. 如果需要根据水平底座配置调整线圈，应旋转旋钮以进入解锁位置（如下所示），然后实现所需的对齐。再次旋转旋钮以进入锁定位置，在线圈到达所需位置后将线圈固定。

### 解锁

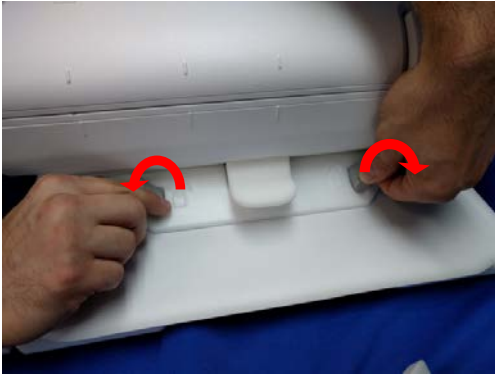

### 锁定



**注意：**标记设置期间，确保水平底座在调整之后已经锁定。扫描期间线圈可能会移位，进而导致成像质量较差。

3. 将患者推入磁体，然后使用所需成像模式的 16ch T/R 手腕线圈顶部的参照标记对准线圈标记。



## 第 6 章 - 清洁、维护、保养和丢弃

### 清洁射频线圈



警告：切勿将洗涤液直接倾倒在线圈或配件上。



警告：切勿对线圈或配件进行消毒。



警告：切勿将洗涤液涂抹在电触点上。

每次使用射频线圈和患者舒适衬垫后，都应按照以下流程进行清洁：

1. 清洁线圈前，先断开射频线圈和 MRI 扫描仪的连接。
2. 用干布擦去线圈表面的污物。如果污物难以去除，根据下述流程进行清理。
3. 用浸润过由 10% 漂白剂、70–99% 异丙醇或 70% 乙醇制成的溶液的布进行擦拭。
4. 根据所有联邦、州和当地规定，要妥善处理用于清洁线圈和衬垫的所有材料。
5. 常用的清洁剂也可用于清洁线圈表面。请参阅清洁剂制造商的清洁剂使用说明，并遵循医院的常规程序。

### 详细的清洁步骤

#### 预清洁步骤：

1. 用 CaviCide 湿润所有表面（靠近电触点的某些表面应使用喷雾器或小毛巾；切勿将洗涤液涂抹在电触点上）。确保所有表面都能明显看出湿气，并且湿润状态至少能持续 30 秒钟。
2. 使用柔软的尼龙鬃刷和/或其他清洁剂小毛巾软化已经硬化或难以去除的碎屑或生菌。在之前刷过或擦过的区域上再次涂抹清洁剂（靠近电触点的某些表面应使用喷雾器或小毛巾）。确保之前刷过或擦过的区域始终能明显看出清洁剂的湿气，并且湿润状态至少能持续 30 秒钟。
3. 用洁净的纸巾擦拭表面以去除碎屑。
4. 丢弃用过的刷子、用过的清洁剂小毛巾和用过的纸巾。
5. 重复步骤 1 到 4。
6. 如果表面上仍有碎屑，应重复预清洁步骤。

#### 清洁步骤：

1. 在预清洁过的表面上直接涂抹 CaviCide（靠近电触点的某些表面应使用喷雾器或小毛巾），确保所有表面都保持湿润，并且湿润状态至少能持续两（2）分钟。切勿将洗涤剂涂抹在电触点上。
2. 用洁净的纸巾擦拭以去除残余的清洁剂。
3. 丢弃用过的清洁剂小毛巾和用过的纸巾。

等线圈和配件干了之后再使用。

## 维护

射频线圈无需定期安排维护。

## 保养

有关射频线圈保养的问题，请联系您的 GE 代表。

## 处理

请遵守当地有关电气设备处置的规定。请勿将射频线圈丢弃在未分类的垃圾箱中。有关退还或处理射频线圈的问题，请联系您的 GE 代表。

此页特意留白







制造商:

Quality Electrodynamics, LLC.  
6655 Beta Drive, Suite 100  
Mayfield Village, OH 44143  
U. S. A.  
[www.qualityelectrodynamics.com](http://www.qualityelectrodynamics.com)

分销商:

GE Medical Systems, LLC

土耳其进口商详情:

GE Medical Systems Turkey Ltd.  
Sti.Esentepe Mah.Harman Sok.No: 8  
34394 Sisli - Istanbul Turkey