




Priručnik za uporabu

16ch T/R zavojnica za koljeno

za GE MR sustave 1,5 T

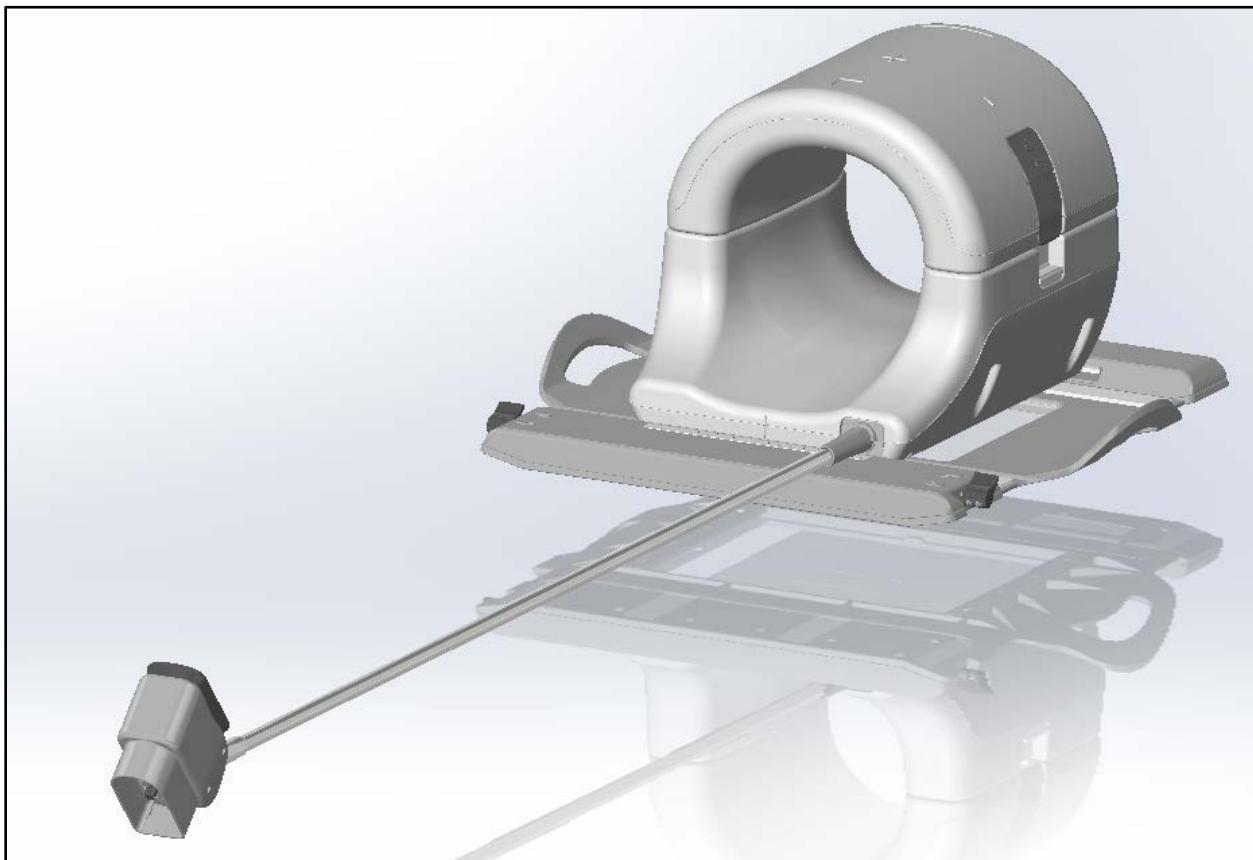

REF Broj modela:

GE	QED
5718233-2	Q7000075

Jamstvo i odgovornost

Odgovornost za održavanje i upravljanje proizvodom nakon isporuke snosi kupac koji je kupio proizvod. Jamstvo ne pokriva sljedeće stavke, čak ni u jamstvenom razdoblju:

- Oštećenja ili gubitke uzrokovane nepravilnom uporabom ili zloporabom.
- Oštećenja ili gubitke uzrokovane višom silom, kao što su požari, potresi, poplave, grmljavine, itd.
- Oštećenja ili gubitke uzrokovane neispunjavanjem specificiranih uvjeta za ovu opremu, kao što su neodgovarajuće napajanje, nepravilno postavljanje ili neprihvatljivi uvjeti okoline.
- Oštećenja nastala zbog promjena ili preinaka na uređaju.

QED ni u kojem slučaju ne snosi odgovornost za sljedeće stavke:

- Oštećenja, gubitke ili probleme uzrokovane premještanjem, preinakama ili popravcima koje je provelo osoblje koje nije ovlastio QED.
- Oštećenja ili gubitke uzrokovane nemarom ili zanemarivanjem mjera opreza i uputa za rad sadržanih u ovom priručniku za uporabu.

Uvjeti prijevoza i čuvanja

NAPOMENA: OVA SE OPREMA SMIJE PREVOZITI I ČUVATI SAMO U SLJEDEĆIM UVJETIMA:

1. Raspon temperature okoline između -40 °C i +70 °C
2. Raspon relativne vlažnosti između 10% i 100%
3. Raspon atmosferskog tlaka između 50 kPa i 106 kPa



Ovlašteni predstavnik u Europi:



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP Hag
Nizozemska

Savezni zakon Sjedinjenih Američkih Država

Oprez: savezni zakon SAD-a ograničava prodaju, distribuciju i uporabu ovog uređaja samo prema uputi ili nalogu liječnika. Savezni zakon SAD-a ograničava uporabu ovog uređaja u ispitivanju za indikacije koje nisu navedene u izjavi o indikacijama.

Datum izdanja: 2020-06

Uvod

Ovaj priručnik sadržava detaljne informacije o sigurnosnim mjerama opreza, uporabi i održavanju 16ch T/R zavojnice za koljeno. Prije upravljanja ovim uređajem, pažljivo pročitajte ovaj priručnik, kao i priručnik za uporabu MR sustava, radi sigurnosti i preciznosti prilikom uporabe uređaja. Ovaj priručnik ne sadržava upute niti sigurnosne informacije za opremu koju nije proizveo QED. Informacije o opremi koju nije proizveo QED potražite u originalnim uputama proizvođača te opreme.

Kompatibilnost

16ch T/R zavojnica za koljeno kompatibilna je s GE MR sustavima 1,5 T.

Korisnički profil

Operater – radiološki tehničari, laboratorijski tehničari, liječnici (napomena: svi primjenjivi zakoni odnosne zemlje moraju se poštivati).

Korisnička obuka – posebna obuka za uporabu ove zavojnice nije potrebna (međutim, GE pruža sveobuhvatni tečaj obuke za MR sustave kako bi se operateri upoznali s pravilnom uporabom MR sustava).

Informacije o pacijentu

Dob, zdravlje, stanje – nema posebnih ograničenja.


Težina – 250 kg ili manje (pročitajte priručnik za uporabu MR sustava; ako je maksimalno dopuštena težina pacijenta za sustav manja od težine za ovu zavojnicu, potrebno je primijeniti maksimalnu težinu specificiranu za sustav).

Sadržaj

Uvod	3
Kompatibilnost	3
Korisnički profil	3
Informacije o pacijentu	3
Sadržaj	4
Poglavlje 1 – Dijelovi 16ch T/R zavojnice za koljeno	5
Poglavlje 2 – Sigurnost	6
Simboli	6
Indikacije	8
Kontraindikacije	8
Mjere opreza	8
Mjere opreza – RF zavojnica	9
Postupci u hitnom slučaju	10
Poglavlje 3 – Lokacija predajno prijemnog priključka	10
Lokacija predajno prijemnog priključka	10
Poglavlje 4 – Osiguranje kvalitete	10
Provjera skenera	10
Signal to Noise Ratio (SNR) Test (Ispitivanje omjera signala i šuma)	10
Alat za osiguranje kvalitete više zavojnica (MCQA)	15
Uporaba preglednika MCQA	19
Poglavlje 5 – Postavljanje i uporaba zavojnice	20
Postavljanje 16ch T/R zavojnice na stol sustava	20
Konfiguracija podloška	22
<i>Postavljanje pacijenta</i>	24
<i>Zaključavanje zavojnice</i>	25
<i>Označavanje</i>	26
Poglavlje 6 – Čišćenje, održavanje, servisiranje i odlaganje	27
Čišćenje RF zavojnice	27
Održavanje	28
Servisiranje	28
Odlaganje	28

Poglavlje 1 – Dijelovi 16ch T/R zavojnice za koljeno

16ch T/R zavojnica za koljeno isporučena je s dijelovima prikazanim u nastavku. Nakon zaprimanja, provjerite jesu li u pošiljku uključeni svi dijelovi.

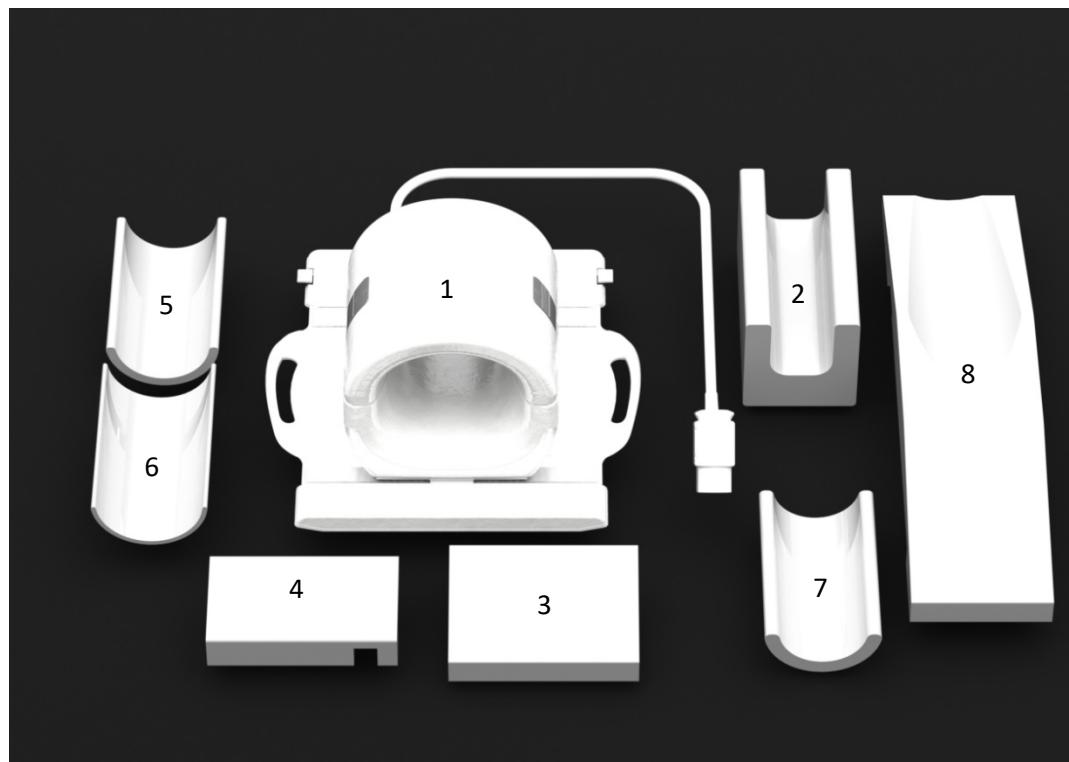

Br. stavke	Opis	Količina	GE br. dijela	QED br. dijela
1	16ch T/R zavojnica za koljeno	1	5718233-2	Q7000075
2	T/R zavojnica za koljeno - podložak za stopalo	1	5561409-7	3003887
3	T/R zavojnica za koljeno - podložak za natkoljenicu	1	5561409-10	3003863
4	T/R zavojnica za koljeno - podložak za potkoljenicu	1	5561409-11	3003896
5	T/R zavojnica za koljeno - donji podložak, 0,5"	1	5561409-8	3003885
6	T/R zavojnica za koljeno - donji podložak, 0,25"	1	5561409-9	3003884
7	T/R zavojnica za koljeno - donji podložak, 0,75"	1	5561409-16	3004779
8	T/R zavojnica za koljeno - podložak za koljeno koje se ne snima	1	5561409-6	3003888

Ukupna težina proizvoda: 7,5 kg

Poglavlje 2 – Sigurnost

U ovom su dijelu opisane opće mjere opreza i sigurnosne informacije koje morate slijediti prilikom uporabe zavojnice.

Kod uporabe MR sustava, pročitajte i mjere opreza opisane u priručniku za uporabu MR sustava.

Simboli

Simbol	Broj	Norma	Naziv, značenje
	0434A	ISO 7000 IEC 60417	Oprez - oprez je potreban prilikom upravljanja uređajem i/ili je za opisanu situaciju potrebna velika pozornost ili radnja operatera kako bi se izbjegle neželjene posljedice
	1641	ISO 7000 IEC 60417	Priručnik za uporabu - pročitajte upute za uporabu prije upravljanja uređajem
	5172	ISO 7000 IEC 60417	Oprema II. klase
	5333	ISO 7000 IEC 60417	Dio tipa BF
	3082	ISO 7000 IEC 60417	Proizvođač
	2497	ISO 7000 IEC 60417	Datum proizvodnje
	6192	ISO 7000 IEC 60417	RF zavojnica, predajna i prijemna
	5.1.2	ISO 15223-1	Ovlašteni predstavnik za Europsku uniju
	2493	ISO 7000 IEC 60417	Kataloški broj
	2498	ISO 7000 IEC 60417	Serijski broj
	N.D	N.D	Oznaka ETL (Kanada i SAD)
	0632	ISO 7000 IEC 60417	Ograničenje temperature
	2620	ISO 7000 IEC 60417	Ograničenje vlažnosti
	2621	ISO 7000 IEC 60417	Ograničenje atmosferskog tlaka
	W017	ISO 24409-2 ISO 8528-13	Upozorenje; vruće površine
	N.D	N.D	Medicinski uređaj

Simbol	Broj	Norma	Naziv, značenje
	N.D	EN50419 EU2012/18/EU	Ovaj simbol označava da se ovaj uređaj ne smije tretirati kao kućni otpad. Pravilnim odlaganjem ovog uređaja sprječavate moguće negativne posljedice za okoliš i zdravlje ljudi, do kojih bi moglo doći u slučaju njegovog neprikladnog odlaganja u otpad. Detaljnije informacije o vraćanju i recikliranju ovog uređaja možete dobiti od dobavljača od kojeg ste ga kupili.

Indikacije

16ch T/R zavojnica za koljeno namijenjena je uporabi s GE MR sustavima 1,5 T za proizvodnju dijagnostičkih slika koljena koje tumači osposobljeni liječnik.

Kontraindikacije



Nema.

Mjere opreza

-  Pacijenti kod kojih je povećana mogućnost pojave napadaja ili klaustrofobije
-  Pacijenti koji su bez svijesti, pod teškim sedativima ili u stanju mentalne zbumjenosti
-  Pacijenti koji nemaju sposobnost održavati pouzdanu komunikaciju (npr. dojenčad ili mala djeca)
-  Pacijenti s gubitkom osjećaja u bilo kojem dijelu tijela
-  Pacijenti s otežanom regulacijom tjelesne temperature ili s posebnom osjetljivošću na rast tjelesne temperature (npr. pacijenti s povиšenom temperaturom, srčanim zatajenjem ili poremećajem znojenja)

Mjere opreza – RF zavojnica

- !** Nepovezani uređaji (RF zavojnice, kabeli, itd.) ne smiju se nalaziti u kućištu tijekom skeniranja.
- !** S poveznim priključkom RF zavojnice smijete povezati samo namjensku RF zavojnicu.
- !** Nemojte rabiti neispravnu RF zavojnicu, osobito onu čiji je vanjski pokrov oštećen ili metalni dijelovi izloženi.
- !** Ne pokušavajte promijeniti ili preinaciti zavojnicu.
- !** Nemojte vezati ili zapetljavati kabele zavojnice.
- !** Pazite da pacijent ne dođe u izravan dodir s kabelima zavojnice.
- !** Pazite da pacijent ne prebaci neke dijelove tijela preko drugih. Pomoću podložaka osigurajte da šake i noge pacijenta ne dodiruju zavojnicu, MR sustav, stol za pacijenta ili neki drugi dio tijela koji bi mogao stvoriti petlju.

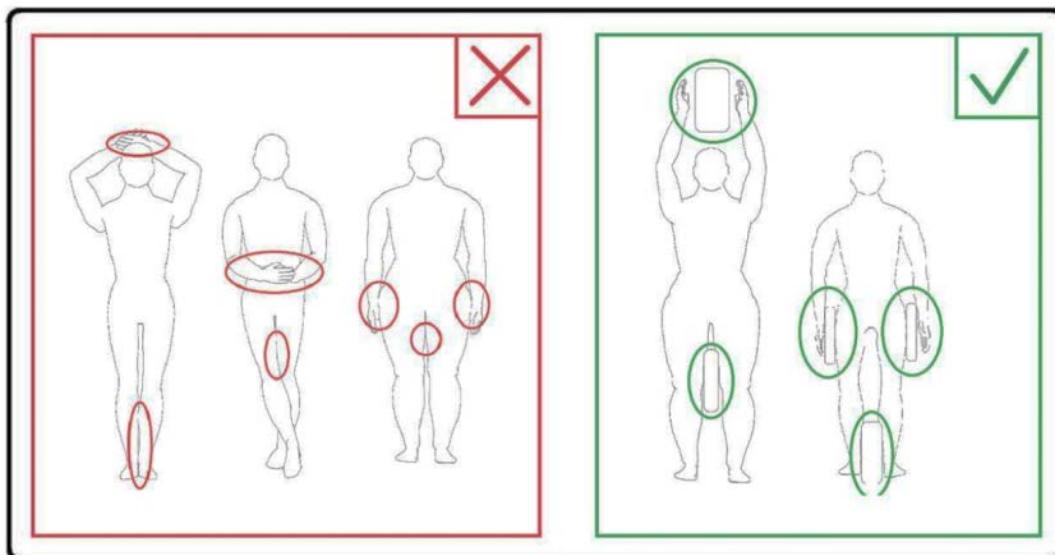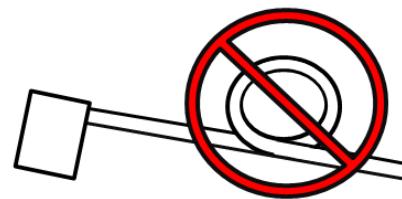

- !** Pazite da pacijent i RF zavojnica ne dodiruju nijedan dio MR sustava. Ako je potrebno, pacijenta odvojite od tunela pomoću podložaka.
- !** Odmah zaustavite skeniranje ako pacijent prijavljuje zagrijavanje, trnce, žarenje ili slične osjećaje. Obratite se liječniku prije nastavka skeniranja.

-  Pazite da zavojnica ne dođe u dodir s tekućinama, kao što su voda ili lijekovi.
-  Ako je zavojnica neispravna, odmah je prestanite rabiti i obratite se predstavniku tvrtke GE.
-  Sa zavojnicom smijete rabiti samo dodatnu opremu koja je opisana u ovom priručniku.

Postupci u hitnom slučaju

U hitnom slučaju tijekom skeniranja, odmah zaustavite skeniranje, izvedite pacijenta iz prostorije i zatražite liječničku pomoć, ako je potrebno.

Ako dođe do ozbiljnog štetnog događaja, prijavite ga proizvođaču i nadležnom tijelu zemlje članice u kojoj se nalazi ustanova korisnika.

Poglavlje 3 – Lokacija predajno prijemnog priključka

Lokacija predajno prijemnog priključka

16ch T/R zavojnica za koljeno je i predajna i prijemna zavojnica. Kako bi se zavojnica pravilno koristila, provjerite je li poveznik sučelja sustava povezan s odgovarajućim priključkom. U korisničkom priručniku za sustav možete pronaći lokaciju priključka koji podržava i predajnu i prijemnu zavojnicu.

Poglavlje 4 – Osiguranje kvalitete

Provjera skenera

Na razini sustava provedite provjeru omjera signala i šuma (SNR). Upute možete pronaći na CD-u Service Methods (Metode servisiranja), te dijelovima System Level Procedures (Postupci na razini sustava); Functional Checks (Provjere funkcija); Signal to Noise (SNR) Check (Provjera omjera signala i šuma).

Signal to Noise Ratio (SNR) Test (Ispitivanje omjera signala i šuma)

Potrebni alati/rješenja

Opis	GE br. dijela	QED br. dijela	Količina
Veliki cilindrični unificirani fantom	5342679	N.D	1
T/R zavojnica za koljeno – donji podložak, 0,25" ILI T/R zavojnica za koljeno - donji podložak, 0,5" ILI	5561409-9 ILI 5561409-8 ILI 5561409-16	3003884 ILI 3003885 ILI 3004779	1

Postavljanje zavojnice i fantoma


1. Zabilježite serijski broj zavojnice(a) u uporabi, kao i inačicu softverske nadogradnje (iz datoteke testrecord ili getver).
2. S ležišta uklonite sve površinske zavojnice (ako postoje).
3. Zavojnicu za koljeno prenesite na ležište za pacijenta. Objema rukama uhvatite zavojnicu za ručice na okviru zavojnice.




4. Zavojnicu stavite na ležište za pacijenta. Imajte na umu da strelica sa smjerom tunela, prikazana na slici u nastavku, treba biti okrenuta **prema** tunelu.




5. Poveznik zavojnice povežite s odgovarajućim predajnim priključkom sustava. (Lokaciju predajno prijemnog priključka možete pronaći u korisničkom priručniku za sustav.) Kraj poveznika na P-priklučku okrenite u ZAKLJUČANI položaj, pogledajte sliku na desnoj strani.

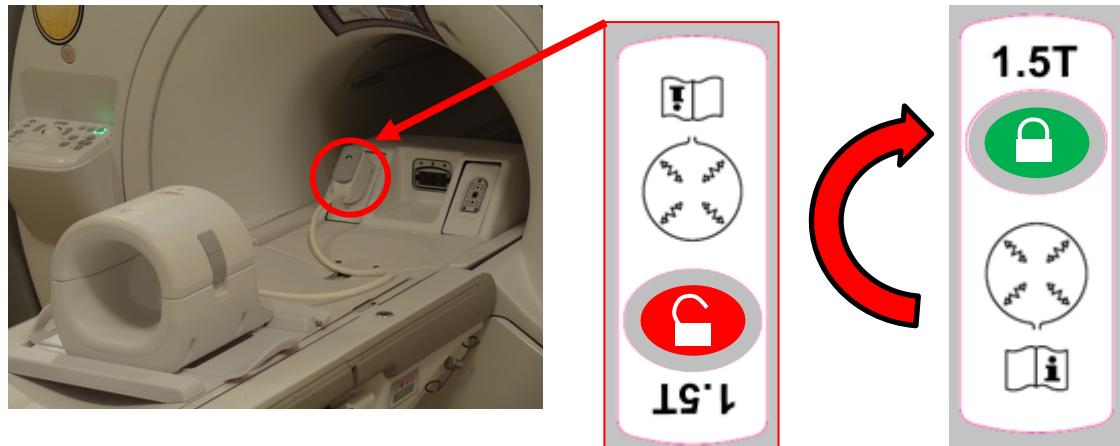


6. Pazite da lijevi i desni položaj zavojnice bude na sredini okvira. Ako trebate podešiti, okrenite zasun na okviru zavojnice kako biste je otključali te gurnuli u željeni položaj.

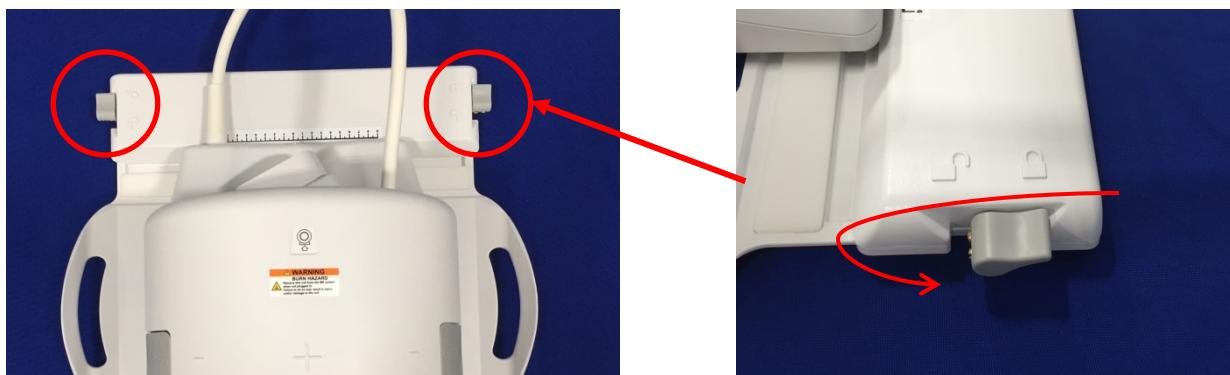

7. Kada zavojnici postavite u željeni položaj, okrenite zasun u zaključani položaj kako se zavojnica ne bi pomaknula.

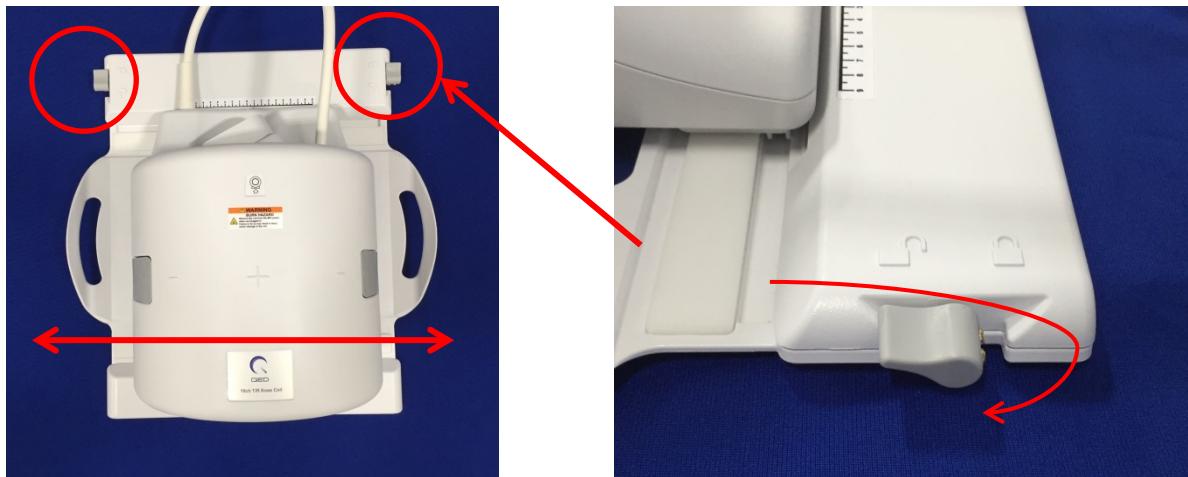

8. Prednju zavojnicu odvojite istovremenim povlačenjem oba zasunska prijeklopa tako da se polovice potpuno rastave.

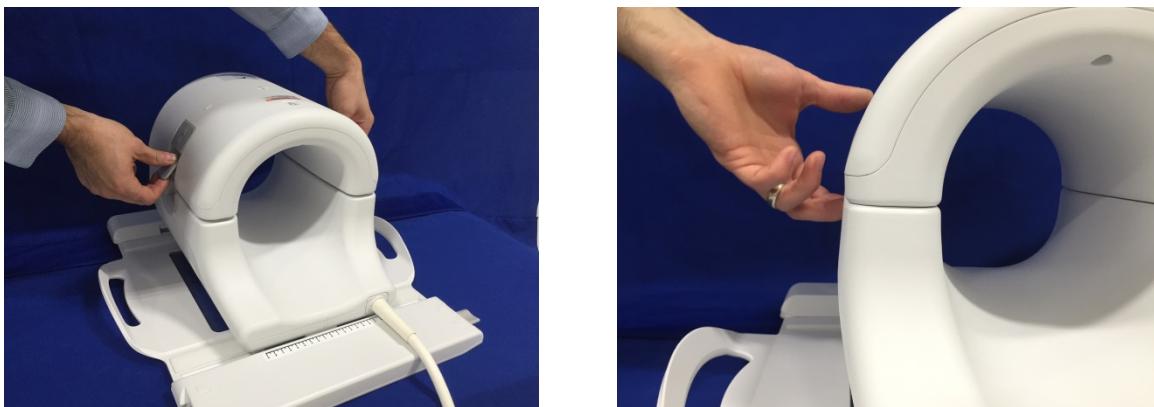

9. Na zavojnici postavite T/R zavojnicu za koljeno - donji podložak, 0,25" (5561409-9) ili T/R zavojnicu za koljeno - donji podložak, 0,5" (5561409-8) ili T/R zavojnicu za koljeno - donji podložak, 0,75" (5561409-16) i veliki cilindrični unificirani fantom (5342679), kako je prikazano u nastavku.



10. Ponovno spojite prednju polovicu zavojnice. **Provjerite jesu li dvije polovice i zasunski prijeklopi gurnuti do kraja unutra.**



Oprez: pazite da prste ne stavite ispod zasuna. Držite samo pristupačne dijelove prijeklopa kako je prikazano na slici iznad.

11. Označite zavojnicu prema oznakama prikazanim u nastavku te gurnite zavojnicu u tunel.




Alat za osiguranje kvalitete više zavojnica (MCQA)

Sva testiranja povezana s RF zavojnicom moraju se provesti na sustavu koji je dobro kalibriran. Test EPIWP (White Pixel iz instalacije u specifikaciji) bit će uspješan.

Ident. broj testa	Opis parametra	Očekivani rezultat
1	EPIWP u specifikacijama	PASS (Uspjeh)


Za pokretanje alata MCQA:

1. U programu Common Service Desktop (CSD) (Radna površina uobičajenih usluga) idite na Service Browser (Preglednik usluga) te na kartici [Image Quality] (Kvaliteta slike) odaberite „Multi-Coil QA Tool“ (Alat za osiguranje kvalitete više zavojnica), a zatim kliknite „Click here to start this tool“ (Kliknite ovdje za pokretanje ovog alata), kako je prikazano na slici 1.

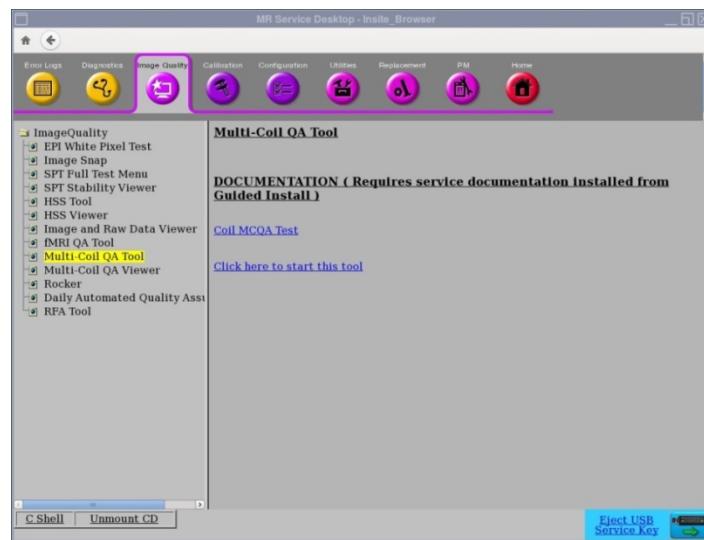

Slika 1


Napomena: ako se pojavi upozorenje „No valid MCR-V (or MCR2/3)“ [Nema valjanog MCR-V-a (ili MCR2/3)] (slika 2), odaberite [Yes] (Da) i nastavite s testiranjem. Dijagnostiku MCR-V-a morate pokrenuti prije predaje sustava korisniku.

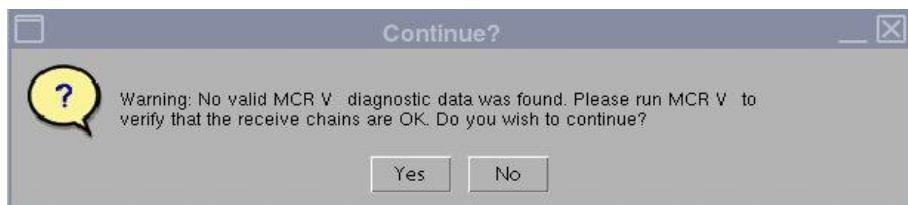

Slika 2


Polje Current Coil (Trenutačna zavojnica) automatski će se popuniti (slika 3) identifikacijom zavojnice koja je povezana s LPCA-om. U polje Coil Serial # (Serijski br. zavojnice) unesite serijski broj zavojnice koju testirate.

2. Kliknite [**Start**] (Pokretanje) kako biste započeli automatski test, kako je prikazano na slici 3. Test može trajati 3 do 5 minuta, ovisno o broju lokacija testiranja (složenosti zavojnice).

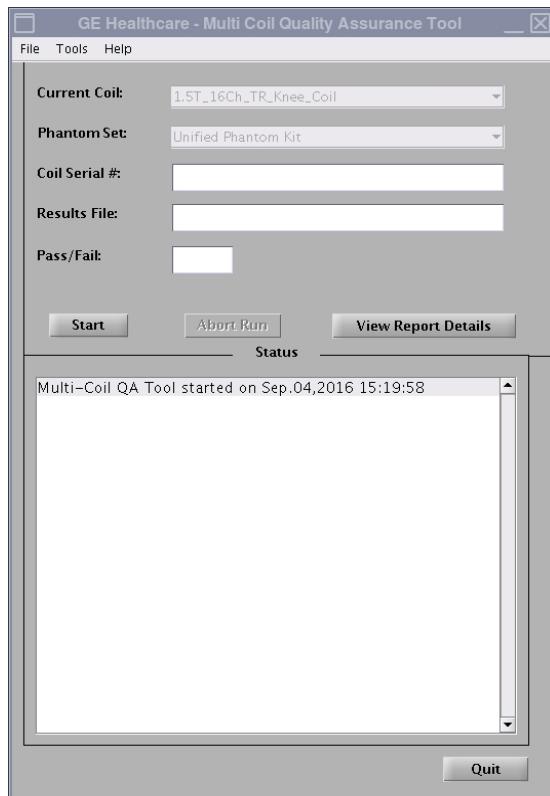


Slika 3

3. Nakon pokretanja pojavit će se poruka „Phantom placement and coil landmarking are critical for repeatable results“ (Postavljanje fantoma i označavanje zavojnice ključni su za ponovljive rezultate). Ako je oznaka točno postavljena i fantom ne sadržava mjehuriće zraka, kliknite [Yes] (Da) kako biste nastavili. (Slika 4).

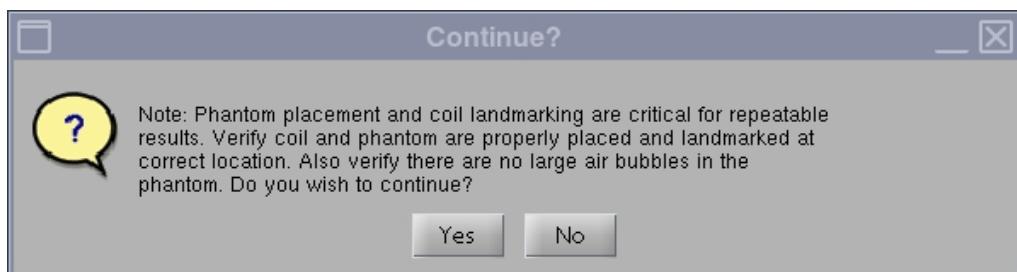

Slika 4

Napomena: prozor statusa grafičkog korisničkog sučelja alata MCQA neprekidno će se ažurirati kako biste dobili informacije o tome što alat provodi u svakom trenutku. Pojavit će se vremenska traka (slika 5) koja pokazuje ukupno približno vrijeme testa, proteklo vrijeme i postotak dovršenosti.

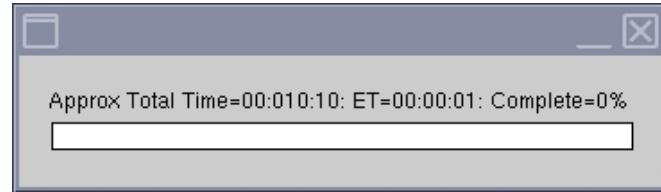


Slika 5

Kada se testiranje dovrši, rezultati testa prikazat će se na zaslonu (slika 6). Status PASS/FAIL (Uspjeh/neuspjeh) prikazuje PASS (Uspjeh) ako svi dijelovi zavojnice rade ispravno. Grafičko korisničko sučelje alata MCQA prikazuje „Fail“ (Neuspjeh) iz jednog od sljedećih mogućih razloga, bez ograničenja:

- Loš element zavojnice
- Za testiranje nije korištena odgovarajuća vrsta fantoma
- Nepravilno postavljanje/smještanje fantoma

Više informacija o testiranju MCQA možete pronaći na DVD-u MR Service Methods ili na web-mjestu na sljedećem putu: Troubleshooting -> System -> Multi-Coil Quality Assurance Tool (Rješavanje problema -> Sustav -> Alat za osiguranje kvalitete više zavojnica)

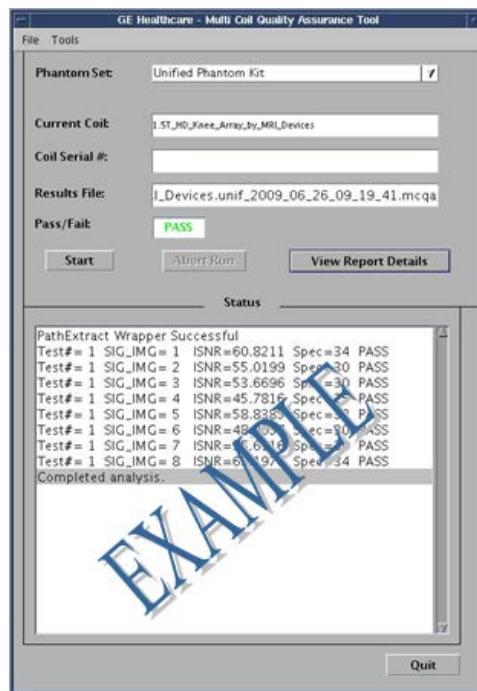

Slika 6


4. Kliknite gumb [Quit] (Prekini) kako biste izašli iz alata MCQA.

Uporaba preglednika MCQA

Trebate li kasnije pregledati rezultate, slijedite korake navedene u nastavku:

- U prozoru alata MCQA odaberite File -> Open -> Results File (Datoteka -> Otvari -> Datoteka rezultata) te odaberite željenu datoteku rezultata zavojnice, a zatim [View Report Details] (Prikaz pojedinosti izvješća) kako biste pregledali rezultate.

Napomena: preglednik rezultata otvorit će se prema prikazanom na slici 7. U gornjem dijelu preglednika prikazat će se i naziv datoteke rezultata i status Pass/Fail (Uspjeh/neuspjeh) rezultata koji se prikazuju na grafičkom korisničkom sučelju alata.

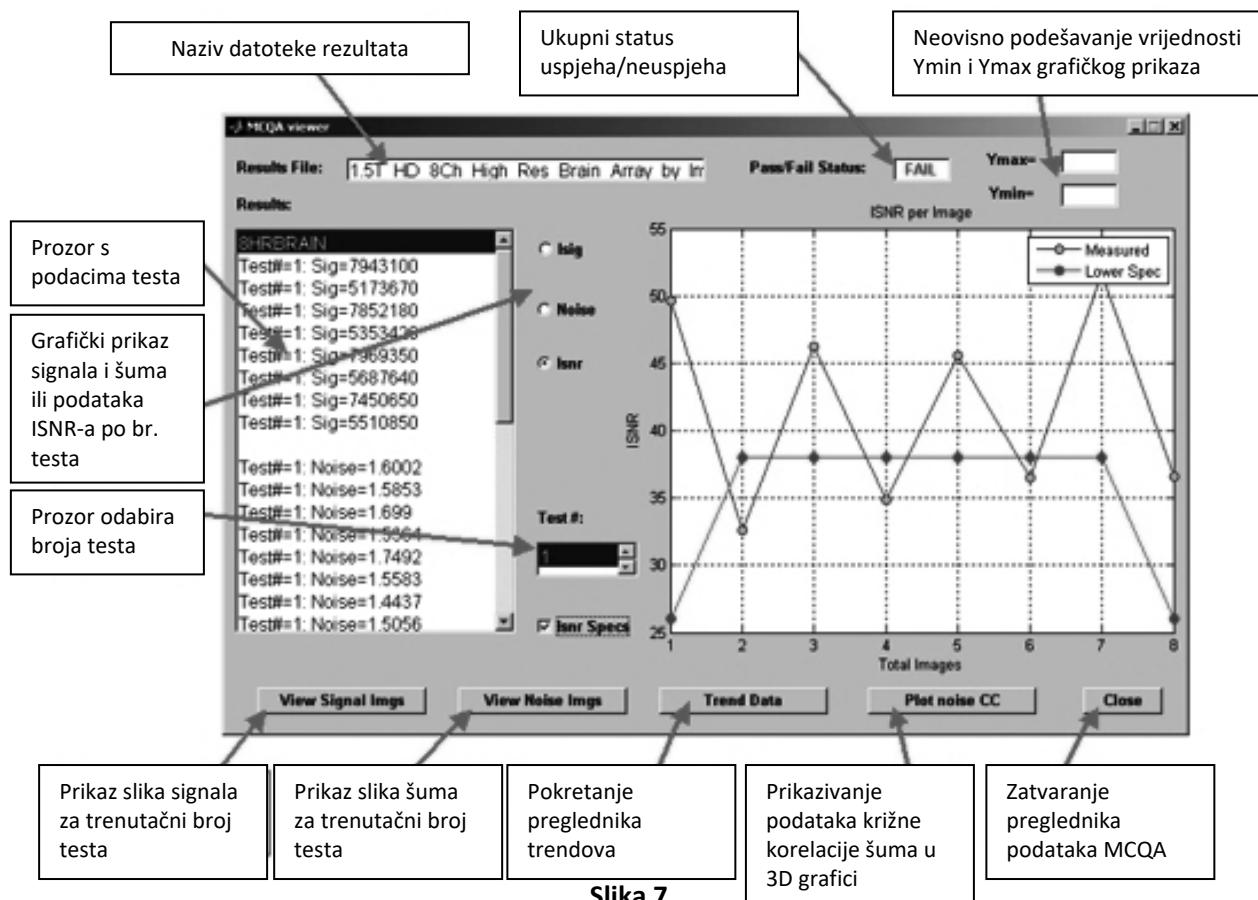


- Kako biste prikazali rezultate, odaberite mogućnost ISNR i potvrđni okvir ISNR Specs (Specifikacije ISNR-a) na sredini preglednika rezultata.

Ident. broj testa	Opis parametra	Očekivani rezultat
1	EPIWP u specifikacijama	PASS (Uspjeh)

Poglavlje 5 – Postavljanje i uporaba zavojnice

Postavljanje 16ch T/R zavojnice na stol sustava


1. S ležišta za pacijenta uklonite sve površinske zavojnice (ako postoje).
2. Zavojnicu za koljeno prenesite na ležište za pacijenta. Objema rukama uhvatite zavojnicu za ručice na okviru zavojnice.

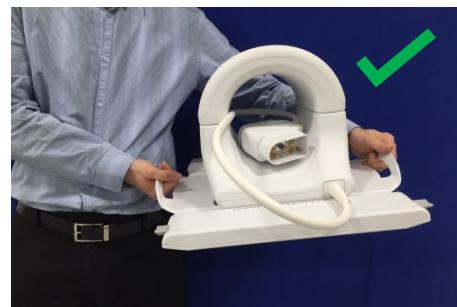


3. Zavojnicu stavite na ležište za pacijenta. Imajte na umu da strelica sa smjerom tunela, prikazana na slici u nastavku, treba biti okrenuta **prema** tunelu.




4. Poveznik zavojnice povežite s odgovarajućim predajnim priključkom sustava. (Lokaciju predajno prijemnog priključka možete pronaći u korisničkom priručniku za sustav.) Kraj poveznika na P-priklučku okrenite u ZAKLJUČANI položaj, pogledajte sliku na desnoj strani.

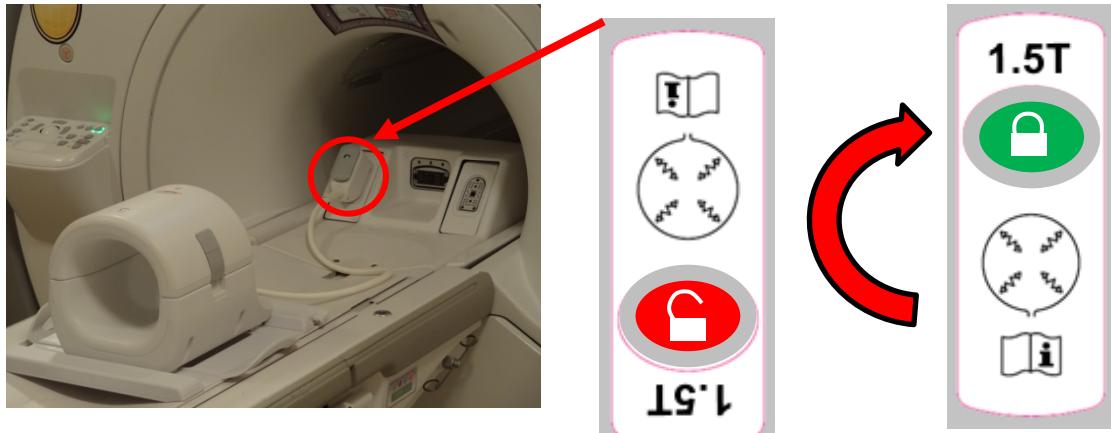


5. Pazite da lijevi i desni položaj zavojnice bude na sredini okvira. Ako trebate podešiti, okrenite zasun na okviru zavojnice kako biste je otključali te gurnuli u željeni položaj.

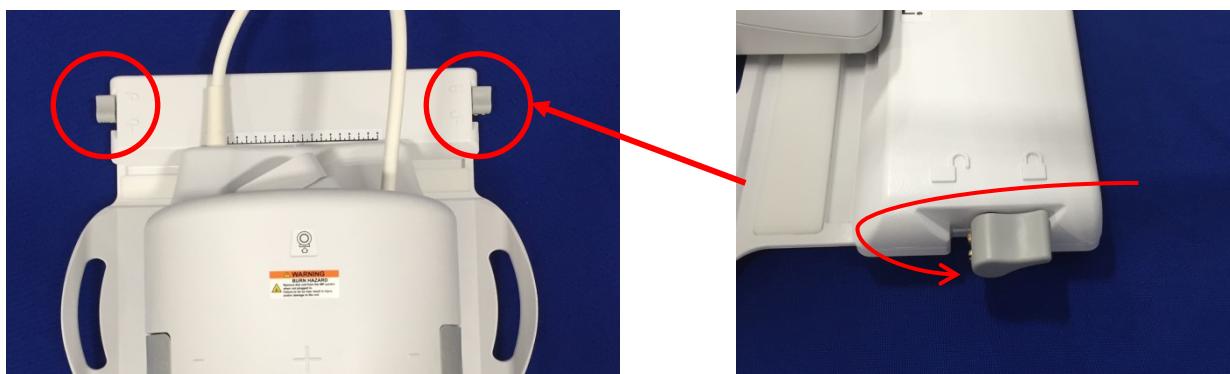

6. Kada zavojnici postavite u željeni položaj, okrenite zasun u zaključani položaj kako se zavojnica ne bi pomaknula.

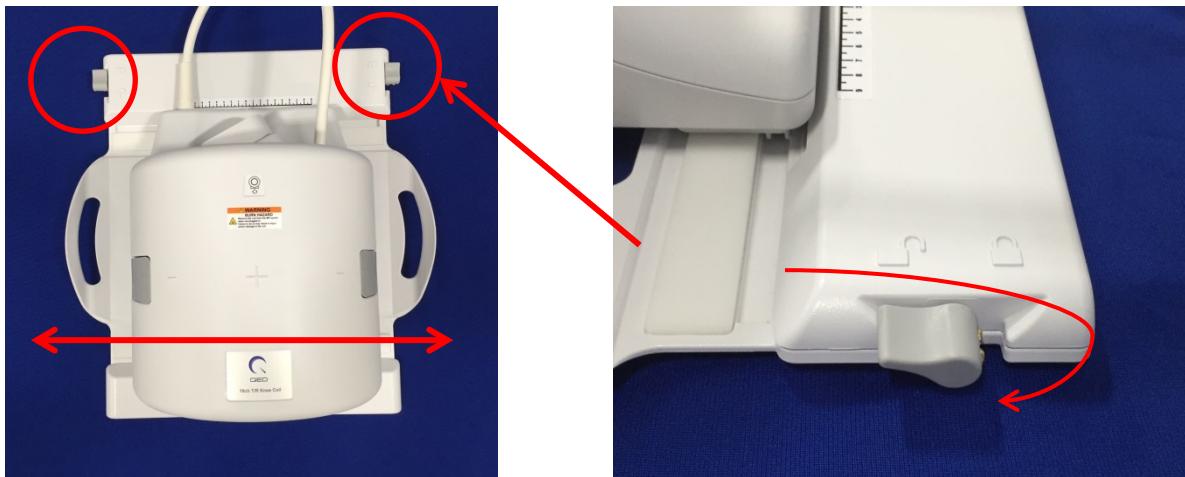


7. Prednju zavojnici odvojite istovremenim povlačenjem oba zasunska prijeklopa tako da se polovice potpuno rastave.

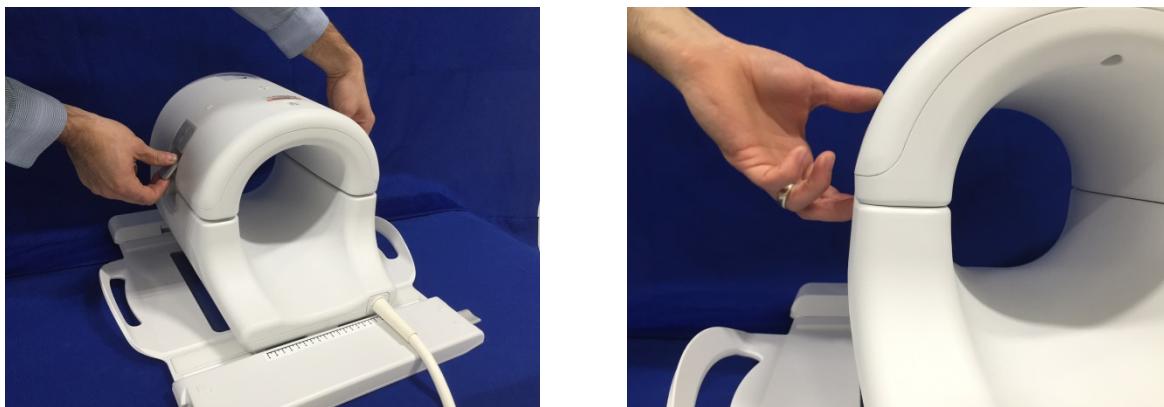

Konfiguracija podloška

Razni podlošci isporučeni su uz 16ch T/R zavojnici za koljeno kako bi se minimalizirali artefakti uzrokovani pomicanjem te pacijentu omogućila udobnost. Osim toga, neki podlošci pružaju


izolaciju između tijela pacijenta i kabela kako bi se spriječile moguće opasnosti od dodira s kabelom i/ili električnih opeklina.

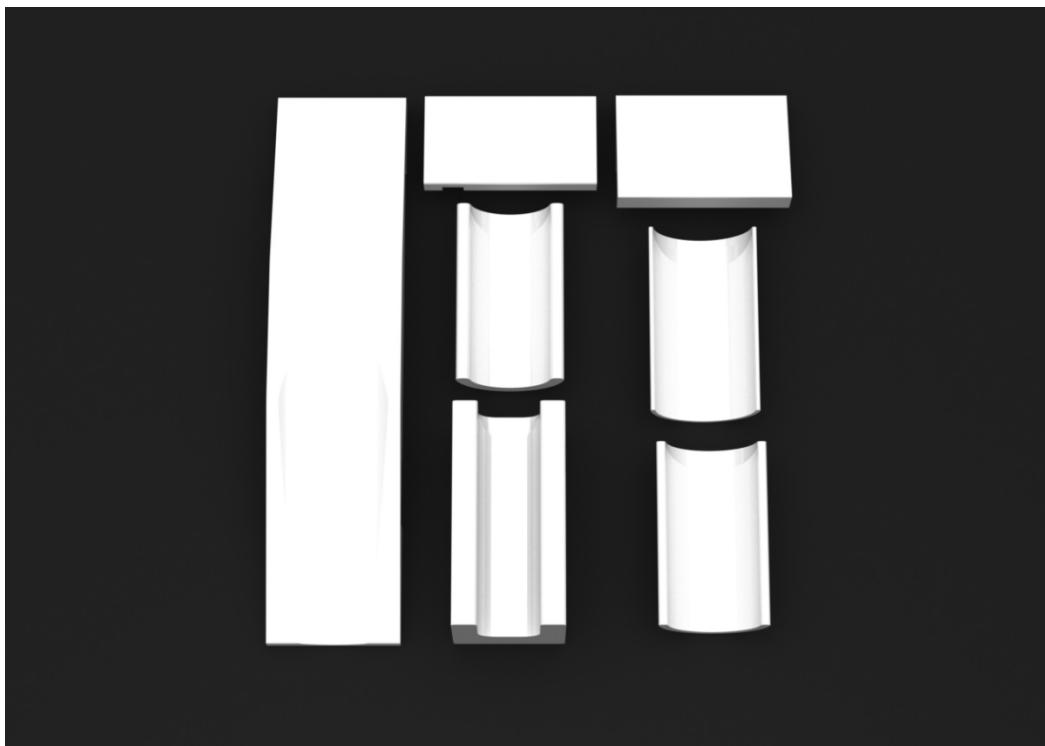

Postavljanje pacijenta

16ch T/R zavojnica za koljeno namijenjena je snimanju lijevog ili desnog koljena pri čemu pacijent leži na leđima, a noge ulaze prve u magnet.

1. Zavojnicu i podloške postavite prije postavljanja pacijenta. 16ch T/R zavojnica za koljeno isporučuje se s raznim podlošcima koji pacijentu omogućavaju udobnost. Primjer preporučenog rasporeda naveden je u nastavku:

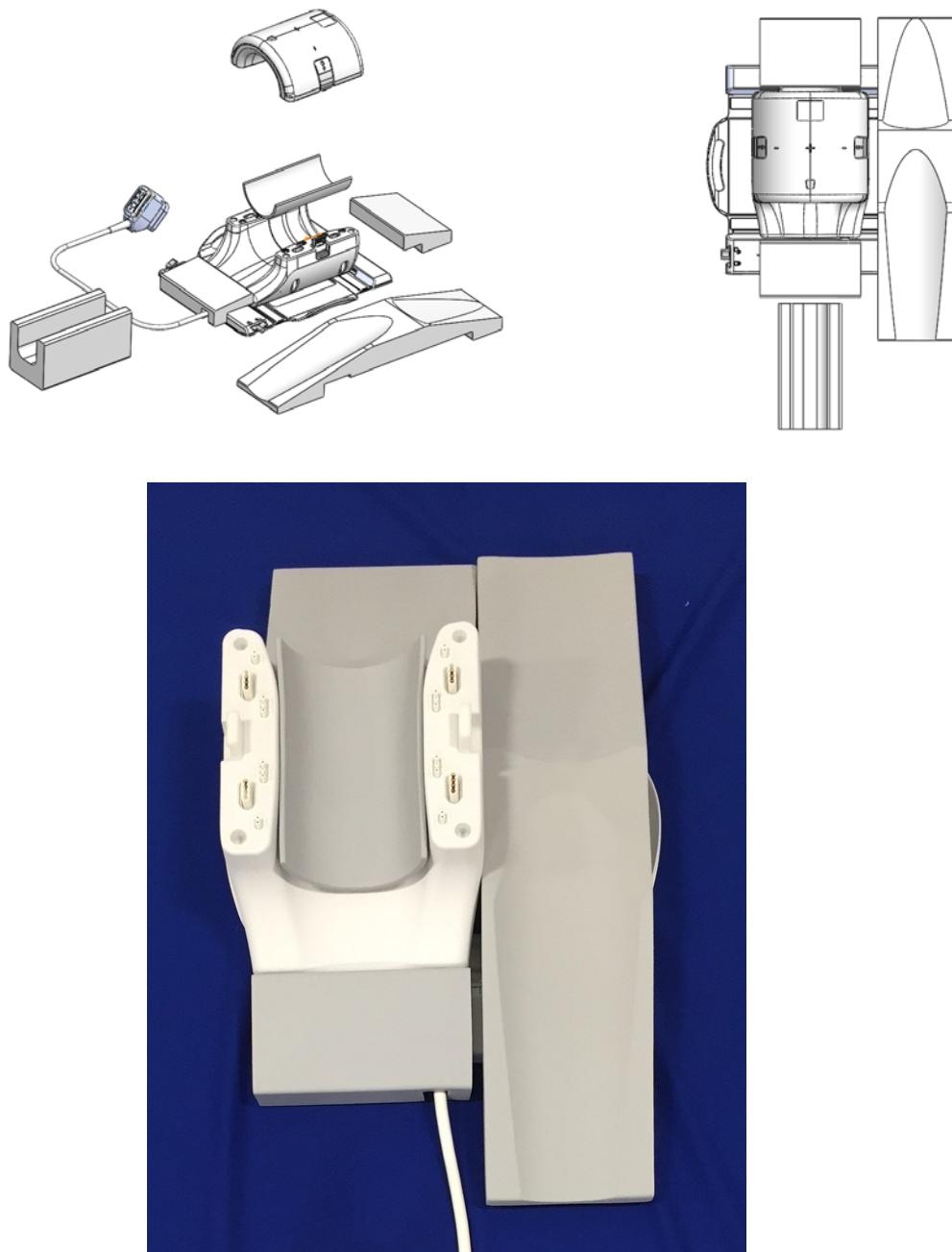

2. Koljeno pacijenta postavite u stražnju polovicu zavojnice. Potrebno je postaviti odgovarajuće podloške kako bi se pravilno imobiliziralo koljeno pacijenta i pacijentu omogućila udobnost.




Zaključavanje zavojnice

3. Zatvorite zavojnicu, pazeći da se pacijent, odjeća ili posteljina ne zahvati između polovica zavojnice. U protivnom, to može izazvati ozljeđivanje pacijenta, lošu kvalitetu slike ili moguće oštećenje zavojnice.

Polovice zavojnice osmišljene su tako da se zavojnica može zatvoriti samo u pravilno određenom smjeru.





4. Nakon što prednju polovicu potpuno zatvorite, gurnite zasunske prijeklope s obje strane uz stijenku zavojnice kako bi se potpuno prikopčali mehanički zasuni. U slučaju da zasuni nisu potpuno prikopčani, zavojnica se može odvojiti tijekom skeniranja te uzrokovati potpuni gubitak povezanosti ili isprekidani kontakt polovica zavojnice, što će rezultirati lošom kvalitetom slike ili oštećenjem zavojnice.

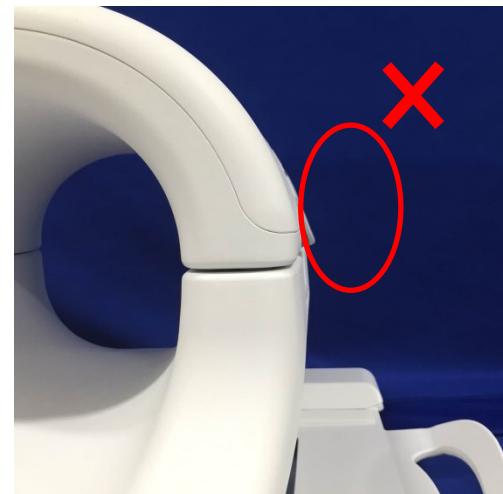

Oprez: pazite da prste ne stavite ispod zasuna. Držite samo pristupačne dijelove prijeklopa kako je prikazano na slici iznad.

Označavanje

5. Pomaknite pacijenta u magnet te zavojnicu označite pomoću referentnih oznaka na gornjoj strani 16ch T/R zavojnice za koljeno. Gurnite zavojnicu u tunel te započnite pregled.

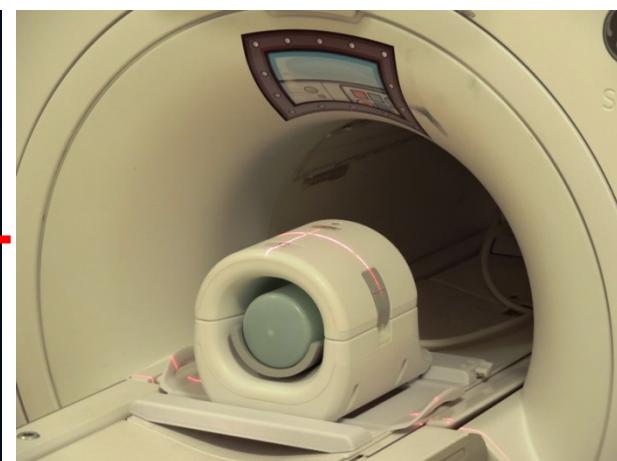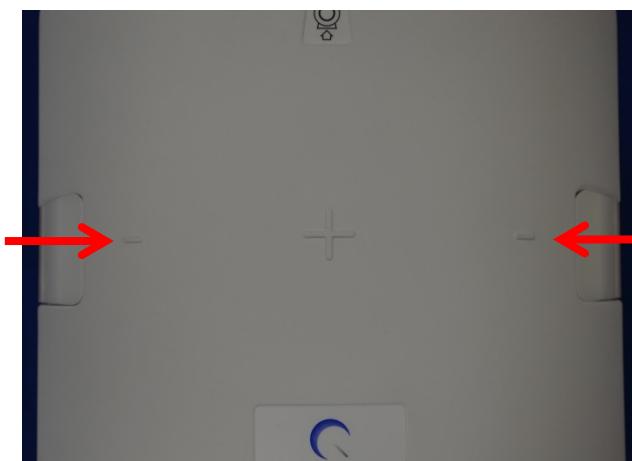

Poglavlje 6 – Čišćenje, održavanje, servisiranje i odlaganje

Čišćenje RF zavojnice



Oprez: tekućinu za čišćenje ne izlijevajte direktno na zavojnicu ili na dodatnu opremu.



Oprez: nemojte sterilizirati zavojnicu i dodatnu opremu.



Oprez: tekućinu za čišćenje ne nanosite na električne kontakte.

RF zavojnica i podlošci za pacijenta moraju se očistiti nakon svake uporabe sljedećim postupkom:

1. Prije čišćenja zavojnice, iskopčajte RF zavojnicu iz MR skenera.
2. Suhom krpom obrišite svu nečistoću na površini zavojnice. Ako je uklanjanje nečistoće teško, očistite zavojnicu prema postupcima opisanim u nastavku.
3. Zavojnicu obrišite krpom namočenom u otopini 10 % izbjeljivača, 70 – 99 % izopropanola ili u otopini 70 % etanola.
4. Materijal korišten za čišćenje zavojnice i podložaka odložite u skladu sa svim državnim i lokalnim propisima.
5. Na površinama zavojnica mogu se koristiti i uobičajena sredstva za čišćenje. Upute potražite u priručniku proizvođača sredstva za čišćenje i slijedite uobičajene bolničke postupke.

Detaljni koraci čišćenja

Koraci prije čišćenja:

1. Sve površine navlažite sredstvom CaviCide (pomoću prskalice ili maramica za određene površine kao što su područja pored električnih kontakata; tekućinu za čišćenje ne nanosite na električne kontakte). Sve površine moraju biti vidljivo vlažne i ostati vlažne najmanje 30 sekundi.
2. Mekom najlonskom čekinjastom četkom i/ili dodatnim maramicama natopljenim sredstvom za čišćenje protrljajte tvrdokorne ostatke ili biološke kontaminante. Na mesta koja ste prethodno četkali ili brisali nanesite dodatni sloj sredstva za čišćenje (pomoću prskalice ili maramica za određene površine kao što su područja pored električnih kontakata). Ta prethodno očetkana ili obrisana područja moraju biti vidljivo navlažena sredstvom za čišćenje najmanje 30 sekundi.
3. Površine obrišite čistim papirnatim maramicama kako biste uklonili ostatke prljavštine.
4. Bacite korištene četke, maramice natopljene sredstvom za čišćenje i papirnate maramice.
5. Ponovite korake od 1. do 4.

6. Ako nečistoća ostane na površinama, ponovite korake koji se provode prije čišćenja.

Koraci čišćenja:

1. Na prethodno očišćena mjesta direktno nanesite CaviCide (pomoću prskalice ili maramica za određene površine kao što su područja pored električnih kontakata). Sve površine moraju biti vidljivo vlažne i ostati vlažne najmanje dvije (2) minute. Tekućinu za čišćenje ne nanosite na električne kontakte.
2. Površine obrišite čistim papirnatim maramicama kako biste uklonili ostatke sredstva za čišćenje.
3. Bacite korištene maramice natopljene sredstvom za čišćenje i papirnate maramice.

Ostavite zavojnice i dodatnu opremu da se osuše prije uporabe.

Održavanje

Redovno održavanje nije potrebno za RF zavojnicu.

Servisiranje

Obratite se predstavniku tvrtke GE radi servisiranja RF zavojnice.

Odlaganje

Slijedite lokalne propise za odlaganje električne opreme. Ne odlažite RF-zavojnicu u kantu za nerazvrstani otpad. Obratite se predstavniku tvrtke GE radi vraćanja ili odlaganja RF zavojnice.

OVA JE STRANICA NAMJERNO OSTAVLJENA PRAZNOM



Proizvođač:

Quality Electrodynamics, LLC.
6655 Beta Drive, Suite 100
Mayfield Village, OH 44143
SAD
www.qualityelectrodynamics.com

Distributer:

GE Medical Systems, LLC

Podaci uvoznika za Tursku:

GE Medical Systems Turkey Ltd.
Sti. Esentepe Mah. Harman Sok. No: 8
34394 Sisli – İstanbul, Turska